




Funcionamento e técnica

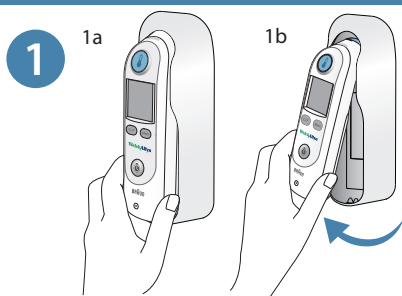


1 Remova o termômetro do descanso segurando na base do termômetro e girando-o para cima. O termômetro ligará automaticamente. O ícone da capa da sonda piscará no visor indicando que uma nova capa de sonda é necessária.

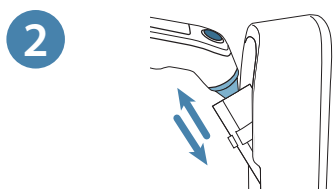


2 Conecte uma nova capa de sonda empurrando a ponta da sonda diretamente para dentro da caixa e, em seguida, puxando o termômetro para fora.

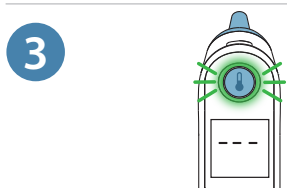

3 Aguarde pela indicação de que o termômetro está pronto. O anel em volta do botão MEASURE (Medição) fica verde, o termômetro faz um bipe e três linhas no visor indicam que o termômetro está pronto.

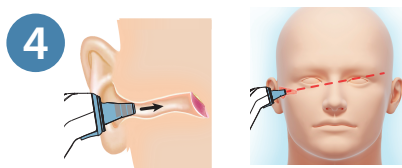


4 Coloque a sonda confortavelmente no canal auditivo e direcione-a para a têmpora oposta. Mantenha a sonda do termômetro parada no canal auditivo. O posicionamento correto da sonda é essencial para a obtenção de medições precisas.

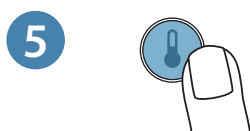

5 Pressione e libere o botão MEASURE (Medição). O termômetro emitirá um bipe, traços em deslocamento aparecerão no visor e, em seguida, a luz verde ExacTemp piscará, indicando uma posição consistente da sonda.



6 Medição da temperatura. Um bipe longo e uma luz verde ExacTemp permanente sinalizarão o fim do processo de medição. A temperatura será exibida no visor.

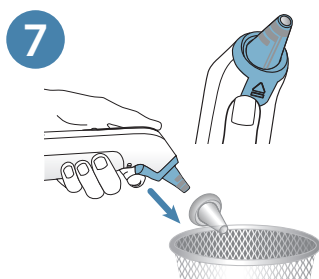


7 Remova a capa de sonda usada pressionando o botão ejetor da capa da sonda. Para alcançar medições precisas, use uma capa de sonda nova e limpa para cada medição. Para fazer outra medição, coloque uma nova capa de sonda limpa no termômetro.

Funções adicionais




Memória
Pressione o botão MEMORY (Memória) para exibir a última temperatura concluída.

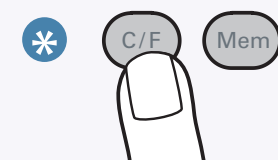


Conversão de temperatura
Pressione e libere o botão C/F para visualizar a medição na escala de temperatura alternada temporariamente. Pressione o botão novamente para voltar à escala de temperatura padrão.

A temperatura padrão pode ser definida com o interruptor C/F localizado dentro do compartimento da bateria.

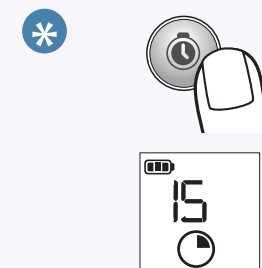


Temporizador manual
Pressione o botão e mantenha-o pressionado por um segundo para ativar o temporizador. Um bipe é ouvido na iniciação do temporizador. O primeiro segmento irá piscar até os primeiros 15 segundos estarem concluídos e em seguida emitirá um bipe. (Isso se repetirá nos 3 segmentos seguintes.) Aos 60 segundos, um longo bipe será emitido. O termômetro encerrará o modo temporizador 5 segundos após o último segmento.

Você pode encerrar o temporizador a qualquer momento pressionando o botão novamente.

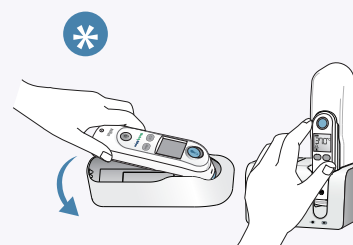


Segurança e carregamento
Para UNLOCK (Desbloquear), o termômetro deve voltar para a estação de carregamento ou para um dispositivo Vital Signs compatível.

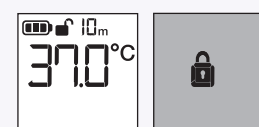




O ícone UNLOCK (Desbloquear) mostra quando o Modo de segurança está ativo e conta o tempo restante disponível (se inferior a 60 minutos) antes de o termômetro bloquear.

Quando o tempo acaba, o ícone LOCK (Bloquear) fica no visor.

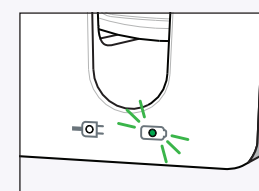

Indicador de luz de carregamento
Acende indicando que a bateria recarregável está carregando. O indicador muda de âmbar para verde quando a bateria está completamente carregada.

Erros e notificações

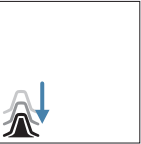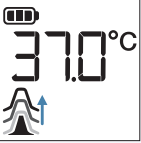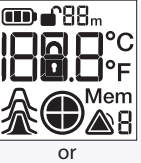Mensagem de erro	Situação	Situação
	Nenhuma capa de sonda está acoplada (animação de COLOCAÇÃO).	Acople agora, uma capa de sonda nova e limpa.
	Uma capa de sonda usada está acoplada (animação de REMOÇÃO).	Descarte a capa de sonda que está colocada e coloque uma capa de sonda nova e limpa se for medir outra temperatura.
	(POS = posição de erro) O monitor infravermelho não consegue encontrar uma temperatura de equilíbrio e não permite realizar a medição.	Mude a capa da sonda para reiniciar. Restrinja os movimentos do paciente e certifique-se de que o posicionamento da sonda esteja correto e permaneça estável durante a medição da nova temperatura.
	A temperatura ambiente não está dentro do intervalo de funcionamento permitido (50 a 104 °F ou 10 a 40 °C) ou está mudando muito rapidamente.	Aguarde 20 s até que o termômetro desligue automaticamente e, em seguida, ligue novamente. Certifique-se de que o termômetro e o paciente estejam por 30 minutos em um ambiente onde a temperatura esteja entre 50 °F e 104 °F ou 10 °C e 40 °C.
	A temperatura medida não está dentro do intervalo típico de temperatura humana. "HI" será exibido quando a temperatura estiver acima de 108 °F (42,2 °C).	seguida, certifique-se de que o termômetro esteja inserido corretamente e meça uma nova temperatura.
	Mude a capa da sonda para reiniciar. Em "LO" será exibido quando a temperatura estiver abaixo de 68 °F (20 °C).	
	Erro no sistema (Todos os ícones são exibidos ou o visor fica em branco)	Aguarde 20 segundos até que o termômetro desligue automaticamente e, em seguida, ligue novamente.
or 	Se o erro persistir, Se o erro ainda persistir, Se o erro ainda persistir,	... reinicie o termômetro removendo as pilhas e inserindo-as de novo. ... as pilhas acabaram. Insira pilhas novas. ... entre em contato com a Central de serviços ou com um representante da Welch Allyn.
	A pilha está fraca, mas o termômetro ainda funcionará corretamente.	Insira pilhas novas.
	A pilha está fraca demais para permitir a medição da temperatura.	Insira pilhas novas.


O que afeta a precisão

Os fatores externos que podem influenciar a temperatura do ouvido são:

Fator	Afeta	Não afeta
Capa de sonda usada	✓	
Temperatura ambiente		✓
Lente molhada/suja/danificada	✓	
Aparelho auditivo	✓	
Cabeça deitada em travesseiro	✓	
Cerume moderado (cera de ouvido)		✓
Otite média (infecções no ouvido)		✓
Tubos de timpanostomia		✓


Observação: Se a lente estiver suja ou inserida no canal auditivo sem a capa de sonda, consulte a seção de manutenção e serviços nas instruções de uso. Apenas limpe conforme especificado pelo fabricante.

Substituição das pilhas

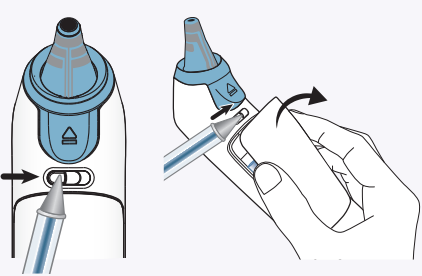


Mude as pilhas alcalinas 2 AA quando  começar a piscar no visor.

Abra a porta da pilha
Abra a porta da pilha empurrando o fecho deslizante para a direita usando o dedo ou um objeto pontiagudo, como uma caneta. Enquanto mantém o fecho na posição de aberto, segure a porta da pilha e remova-a.

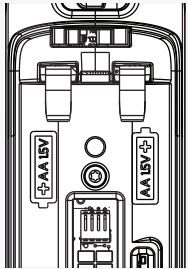

Remova as 2 pilhas alcalinas AA e substitua-as por 2 novas pilhas alcalinas AA, certificando-se de que os polos estejam na direção correta.

Encaixe a porta da pilha de volta no lugar e certifique-se de retornar o fecho para a posição original.

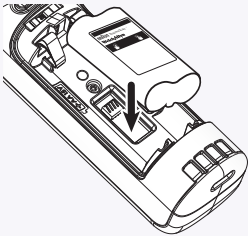

Conjunto de pilhas recarregáveis
Insira o conjunto de pilhas recarregáveis no compartimento de pilhas com a etiqueta das pilhas virada para fora.