




Λειτουργία και τεχνική

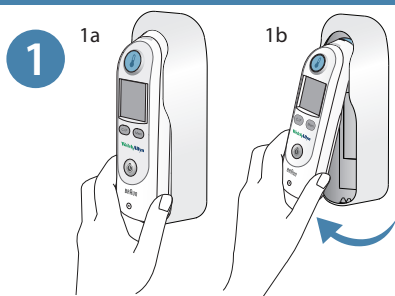


Αφαιρέστε το θερμόμετρο από το πλαίσιο υποδοχής πιάνοντάς το από τη βάση του και σηκώνοντάς το προς τα πάνω.
Το θερμόμετρο θα ενεργοποιηθεί αυτόματα. Στην οθόνη θα αρχίσει να αναβοσβήνει το εικονίδιο καλύπτρας ανιχνευτή , υποδεικνύοντας ότι πρέπει να τοποθετήσετε νέα καλύπτρα.

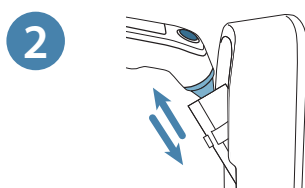


Τοποθετήστε νέα καλύπτρα ανιχνευτή πιέζοντας το άκρο ανιχνευτή στη θήκη και τραβώντας, στη συνέχεια, το θερμόμετρο προς τα έξω.

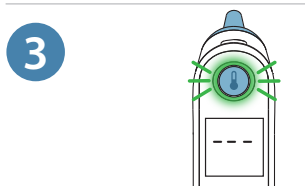


Περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη ότι το θερμόμετρο είναι έτοιμο.  γίνεται πράσινος, το θερμόμετρο θα εκπέμψει ένα ηχητικό σήμα και στην οθόνη θα εμφανιστούν τρεις γραμμές που υποδεικνύουν ότι το θερμόμετρο είναι έτοιμο.

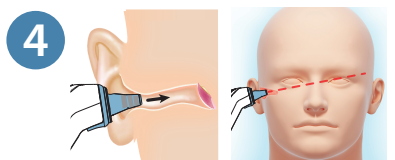


Τοποθετήστε τον ανιχνευτή χωρίς πίεση στον ακουστικό πόρο και κατευθύνετε τον προς τον αντίθετο κρόταφο. Κρατήστε τον ανιχνευτή του θερμομέτρου σε σταθερή θέση στον ακουστικό πόρο. Η σωστή τοποθέτηση του ανιχνευτή είναι αναγκαία για ακριβείς μετρήσεις.

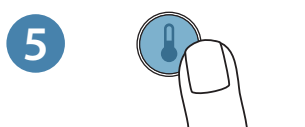

Πατήστε και αφήστε το κουμπί  ΜΕΤΡΗΣΗΣ.
Το θερμόμετρο θα εκπέμψει ένα ηχητικό σήμα, στην οθόνη θα εμφανιστούν κινούμενες παύλες, και, στη συνέχεια, θα αναβοσβήνει η πράσινη λυχνία ExacTemp, υποδεικνύοντας ότι η θέση του ανιχνευτή είναι σταθερή.

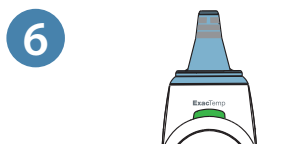

Θερμομέτρηση. Ένα ηχητικό σήμα διαρκείας και η πράσινη λυχνία ExacTemp που ανάβει σταθερά σηματοδοτούν το τέλος της διαδικασίας μέτρησης. Στην οθόνη εμφανίζεται η θερμοκρασία.

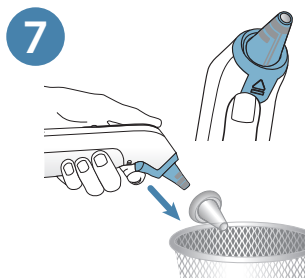


Αφαιρέστε τη χρησιμοποιημένη καλύπτρα ανιχνευτή  πιέζοντας το κουμπί Εξολκεία καλύπτρας ανιχνευτή.

Για ακριβείς μετρήσεις, χρησιμοποιείτε νέα, καθαρή καλύπτρα ανιχνευτή για κάθε μέτρηση.
Για να πραγματοποιήσετε νέα μέτρηση, τοποθετήστε στο θερμόμετρο νέα, καθαρή καλύπτρα ανιχνευτή.

Πρόσθετες λειτουργίες




Μνήμη
Πατήστε το κουμπί ΜΝΗΜΗΣ για να εμφανίσετε την τελευταία ολοκληρωθείσα θερμομέτρηση.

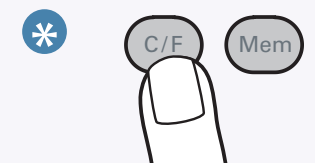

Μετατροπή θερμοκρασίας
Πατήστε και αφήστε το κουμπί C/F για να προβάλετε προσωρινά τη θερμοκρασία στην εναλλακτική κλίμακα θερμοκρασίας. Πατήστε το κουμπί ξανά για να επιστρέψετε στην προεπιλεγμένη κλίμακα θερμοκρασίας.


Μπορείτε να ορίσετε την προεπιλεγμένη κλίμακα θερμοκρασίας μέσω του διακόπτη C/F που βρίσκεται μέσα στον χώρο μπαταριών.

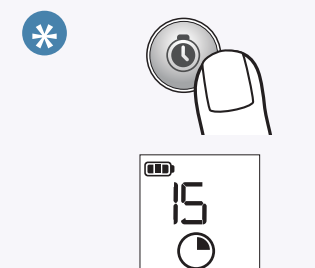


Μη αυτόματος χρονομετρητής
Πιέστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί  για ένα δευτερόλεπτο για να ενεργοποιήσετε τον χρονομετρητή. Με την ενεργοποίηση του χρονομετρητή εκπέμπεται ένα ηχητικό σήμα.

Το πρώτο τμήμα αναβοσβήνει μέχρι να παρέλθουν τα πρώτα 15 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, εκπέμπεται ένα ηχητικό σήμα. (Η διαδικασία επαναλαμβάνεται για τα υπόλοιπα 3 τμήματα). Όταν παρέλθουν 60 δευτερόλεπτα, εκπέμπεται ηχητικό σήμα μεγαλύτερης διάρκειας. Μετά τη συμπλήρωση και του τελευταίου τμήματος, το θερμόμετρο εξέρχεται από τον τρόπο λειτουργίας χρονομετρητή.

Μπορείτε να εξέλθετε από τον τρόπο λειτουργίας χρονομετρητή ανά πάσα στιγμή πατώντας ξανά το κουμπί .

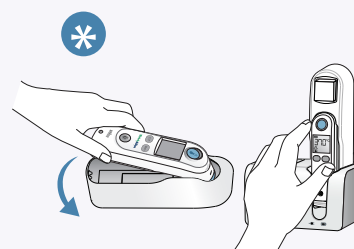


Ασφάλεια και φόρτιση
Για ΞΕΚΛΕΙΔΩΜΑ, πρέπει να επιστρέψετε το θερμόμετρο στον σταθμό φόρτισης ή στη συμβατή συσκευή ζωτικών λειτουργιών.

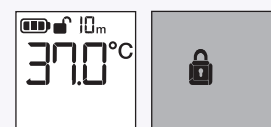



Όταν είναι ενεργοποιημένος ο τρόπος λειτουργίας ασφάλειας, εμφανίζεται το εικονίδιο ΞΕΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ  και πραγματοποιείται αντίστροφη μέτρηση του υπολειπόμενου διαθέσιμου χρόνου (εφόσον απομένουν λιγότερα από 60 λεπτά) πριν από το κλείδωμα του θερμομέτρου.

Μόλις εξαντληθεί ο χρόνος, στην οθόνη εμφανίζεται και παραμένει το εικονίδιο ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ .

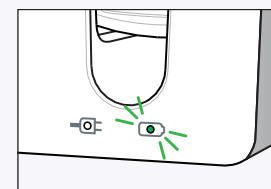

Φωτεινή ένδειξη φόρτισης
Ανάβει υποδεικνύοντας ότι πραγματοποιείται φόρτιση της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας. Όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως, το χρώμα της ένδειξης αλλάζει από πορτοκαλί σε πράσινο.

Σφάλματα και ειδοποιήσεις

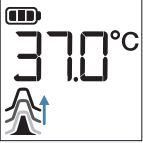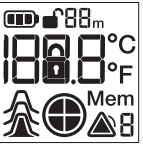Μήνυμα σφάλματος	Κατάσταση	Λύση
	Δεν έχει τοποθετηθεί καλύπτρα ανιχνευτή (υποδεικνύει την τοποθέτηση).	Τοποθετήστε νέα, καθαρή καλύπτρα ανιχνευτή.
	Έχει τοποθετηθεί χρησιμοποιημένη καλύπτρα ανιχνευτή (υποδεικνύει την αφαίρεση).	Σε περίπτωση που επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε νέα μέτρηση, απορρίψτε την καλύπτρα ανιχνευτή που έχει τοποθετηθεί και τοποθετήστε νέα, καθαρή καλύπτρα ανιχνευτή.
	(POS = σφάλμα θέσης) Η διάταξη παρακολούθησης υπέρυθρων ακτίνων δεν μπορεί να εντοπίσει ισορροπία θερμοκρασίας και δεν επιτρέπει την πραγματοποίηση μέτρησης.	Αλλάξτε την καλύπτρα ανιχνευτή για επαναφορά της συσκευής. Περιορίστε τις κινήσεις του ασθενή και βεβαιωθείτε ότι η τοποθέτηση του ανιχνευτή είναι η σωστή και ότι παραμένει σταθερή ενώ πραγματοποιείτε νέα θερμομέτρηση.
	Η θερμοκρασία περιβάλλοντος δεν εμπίπτει στο επιτρεπτό εύρος λειτουργίας (10 – 40 °C) ή μεταβάλλεται πολύ γρήγορα.	Περιμένετε 20 δευτερόλεπτα μέχρι να απενεργοποιηθεί αυτόματα το θερμόμετρο, και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε το ξανά. Φροντίστε ο ασθενής και το θερμόμετρο να βρίσκονται για 30 λεπτά σε περιβάλλον όπου η θερμοκρασία κυμαίνεται μεταξύ 10 °C και 40 °C.
	Η θερμοκρασία που καταγράφηκε δεν εμπίπτει στο τυπικό εύρος θερμοκρασίας του ανθρώπου. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη «HI» (Υψηλή) σε περίπτωση που η θερμοκρασία υπερβαίνει τους 42,2 °C.	Αλλάξτε την καλύπτρα ανιχνευτή για επαναφορά της συσκευής. Στη συνέχεια, βεβαιωθείτε ότι το θερμόμετρο έχει εισαχθεί σωστά και πραγματοποιήστε νέα θερμομέτρηση.
	Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη «LO» (Χαμηλή) σε περίπτωση που η θερμοκρασία δεν υπερβαίνει τους 20 °C.	
	Σφάλμα συστήματος (Εμφανίζονται όλα τα εικονίδια ή η οθόνη είναι κενή)	Περιμένετε 20 δευτερόλεπτα μέχρι να απενεργοποιηθεί αυτόματα το θερμόμετρο, και στη συνέχεια ενεργοποιήστε το ξανά.
	Αν το σφάλμα εξακολουθήσει να εμφανίζεται,	...κάντε επαναφορά του θερμομέτρου αφαιρώντας τις μπαταρίες και τοποθετώντας τες ξανά στη θέση τους.
	Αν το σφάλμα εξακολουθήσει να εμφανίζεται,	... οι μπαταρίες έχουν εξαντληθεί. Τοποθετήστε καινούριες μπαταρίες.
	Αν το σφάλμα εξακολουθήσει να εμφανίζεται,	... επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις της Welch Allyn της περιοχής σας ή τον τοπικό αντιπρόσωπό σας
	Το επίπεδο της μπαταρίας είναι χαμηλό, αλλά το θερμόμετρο θα εξακολουθεί να λειτουργεί σωστά.	Εισάγετε καινούριες μπαταρίες.
	Το επίπεδο της μπαταρίας είναι πολύ χαμηλό, δεν είναι εφικτή η θερμομέτρηση.	Εισάγετε καινούριες μπαταρίες.


Παράγοντες που επηρεάζουν την ακρίβεια της μέτρησης

Εξωτερικοί παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν τις θερμοκρασίες του αυτιού είναι, μεταξύ άλλων, οι ακόλουθοι:

Παράγοντας	Επηρεάζει	Δεν επηρεάζει
Χρησιμοποιημένη καλύπτρα ανιχνευτή	✓	
Θερμοκρασία περιβάλλοντος		✓
Υγρός/ακάθαρτος/ φθαρμένος φακός	✓	
Βοήθημα ακοής	✓	
Οριζόντια θέση σε μαξιλάρι	✓	
Μέτρια ποσότητα κυψελίδας (κεριού αυτιού)		✓
Μέση ωτίτιδα (μολύνσεις αυτιών)		✓
Σωληνίσκοι τυμπανοστομίας		✓


Σημείωση: Εάν ο φακός είναι ακάθαρτος ή εισαχθεί στον ακουστικό πόρο χωρίς καλύπτρα ανιχνευτή, ανατρέξτε στην ενότητα συντήρησης και σέρβις των οδηγιών χρήσης. Καθαρίζετε τον φακό μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Αντικατάσταση των μπαταριών

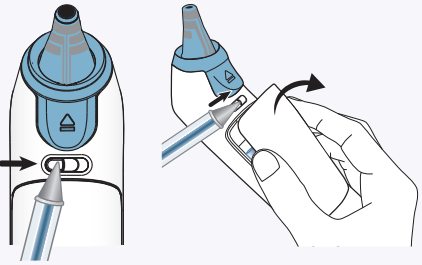


Αλλάξτε τις αλκαλικές μπαταρίες 2 AA όταν η λυχνία αρχίζει να αναβοσβήνει στην οθόνη.

Ανοίξτε το καπάκι μπαταριών
Ανοίξτε το καπάκι μπαταριών σύροντας το ελατηριωτό μάνδαλο προς τα δεξιά με το δάχτυλό σας ή με μυτερό αντικείμενο όπως ένα στυλό. Κρατώντας το μάνδαλο στην ανοικτή θέση, πιάστε το καπάκι μπαταριών και αφαιρέστε το.

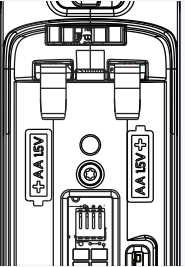

Αφαιρέστε τις 2 αλκαλικές μπαταρίες AA και αντικαταστήστε τις με 2 καινούριες αλκαλικές μπαταρίες AA, αφού βεβαιωθείτε ότι οι πόλοι έχουν τη σωστή κατεύθυνση.

Ασφαλίστε το καπάκι μπαταριών στη θέση του και βεβαιωθείτε ότι το μάνδαλο επιστρέφει στην αρχική ασφαλισμένη θέση του.

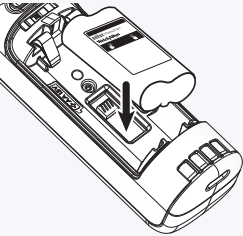

Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών
Τοποθετήστε το σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών στον χώρο μπαταριών, με την ετικέτα των μπαταριών να είναι στραμμένη προς τα έξω.

© 2019 Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Το προϊόν αυτό κατασκευάζεται βάσει άδειας του εμπορικού σήματος «Braun». Η ονομασία «Braun» αποτελεί κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα της Braun GmbH, Kronberg, Γερμανίας. Η ονομασία «ThermoScan» είναι κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα ιδιοκτησίας της Helen of Troy Limited.



Κατασκευάζεται από:
Welch Allyn, Inc.
4341 State Street Road
Skaneateles Falls, NY 13153
USA



Welch Allyn Limited
Navan business Park
Dublin road,
Navan, County Meath
Republic of Ireland
C15 AW22

Κατασκευάζεται στο Μεξικό Ημερομηνία αναθεώρησης: 2019-05

BRAUN

WelchAllyn®