




## Funcionamento e técnica

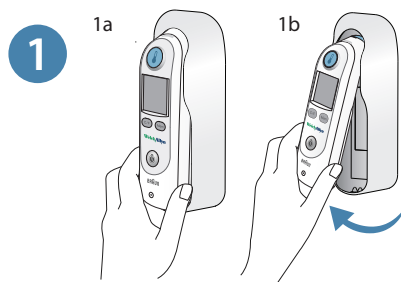


**Retire o termómetro da base segurando na parte inferior do termómetro e levantando-o para fora e para cima.** O termómetro liga-se automaticamente. O ícone do protetor da sonda pisca no visor, indicando que é necessário um novo protetor da sonda.

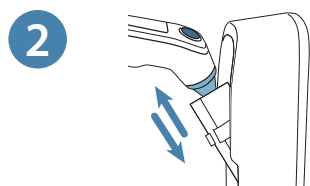

**Instale o novo protetor da sonda** empurrando a ponta da sonda para dentro da caixa e, de seguida, retirando o termómetro.

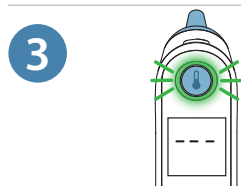


**Aguarde pela indicação de termómetro pronto.** O anel à volta do botão MEDIR fica verde, o termómetro emite um bipe e três linhas no visor indicam que o termómetro está pronto para ser utilizado.

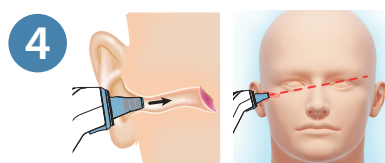

**Coloque a sonda de forma cómoda no canal auditivo e oriente-a na direção da tampa oposta.** Mantenha a sonda do termómetro estável no canal auditivo. A correta colocação da sonda é essencial para a obtenção de medições exatas.



**Prima e liberte o botão MEDIR.** O termómetro emite um bipe, aparecem travessões em movimento no visor e, de seguida, a luz ExacTemp verde pisca, indicando que a sonda se encontra numa posição estável.

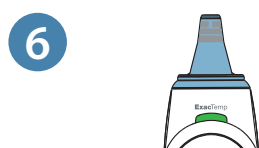

**Medição da temperatura.** Um bipe prolongado e a luz ExacTemp verde contínua assinalam o fim do processo de medição. A temperatura aparece indicada no visor.



**Retire o protetor da sonda usado** premindo o botão do ejetor do protetor da sonda.

Para obter medições exatas, use sempre um novo protetor de sonda limpo para cada medição da temperatura.


Para realizar outra medição, coloque um novo protetor de sonda limpo no termómetro.

## Funções adicionais



### Memória


Prima o botão MEMÓRIA para visualizar a última medição da temperatura.

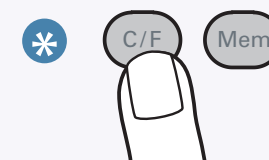

### Conversão de temperatura

Prima e liberte o botão C/F para ver temporariamente a medição na escala de temperatura alternativa. Prima novamente o botão para voltar à escala predefinida.

A escala de temperatura predefinida pode ser escolhida através do interruptor C/F, localizado dentro do compartimento das pilhas.

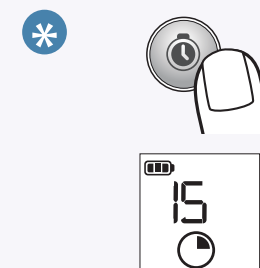


### Temporizador manual

Prima e mantenha premido o botão do temporizador durante um segundo para ativar o temporizador. Ouve-se um bipe que assinala a ativação do temporizador.


O primeiro quadrante estará intermitente até que tenham decorrido 15 segundos e então ouvir-se-á um bipe (o mesmo ocorre para os 3 quadrantes restantes). Decorridos 60 segundos, ouve-se um bipe longo. O termómetro sai do modo do temporizador 5 segundos após estar concluído o último quadrante.

Pode sair do temporizador a qualquer momento premindo novamente o botão.

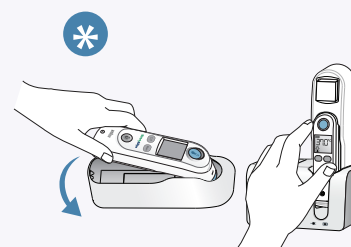


### Segurança e carregamento

Para DESBLOQUEAR, o termómetro deverá ser recolocado na estação de carregamento ou no dispositivo de sinais vitais compatível.

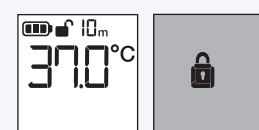

O ícone DESBLOQUEADO é apresentado quando o modo de segurança está ativo e conta o tempo restante disponível (caso seja inferior a 60 minutos) antes de o termómetro ser bloqueado.




Quando o tempo se esgota, o ícone BLOQUEADO permanece no ecrã.

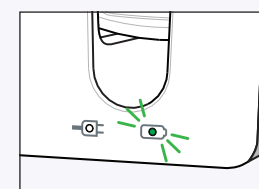

### Indicador luminoso de carga

Acende-se indicando que a pilha recarregável está a ser carregada. O indicador passa de âmbar a verde quando a pilha está totalmente carregada.

Mensagem de erro
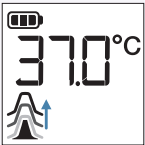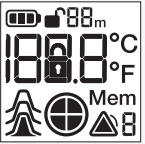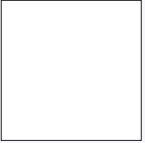
| Mensagem de erro                                                                   | Situação                                                                                                                                              | Solução                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Sem protetor de sonda instalado (animação ativada).                                                                                                   | Instale um novo protetor de sonda limpo.                                                                                                                                                                                                                      |
|    | Protetor de sonda usado instalado (animação desativada).                                                                                              | Elimine o protetor de sonda instalado e instale um novo protetor de sonda limpo, se quiser fazer outra medição da temperatura.                                                                                                                                |
|    | (POS = erro de posição)<br>O monitor de infravermelhos não consegue detetar uma temperatura estável, pelo que não permite a medição.                  | Substitua o protetor da sonda para reiniciar o dispositivo. Restrinja os movimentos do doente e certifique-se de que o posicionamento da sonda está correto e que a sonda permanece estável durante a obtenção da nova medição.                               |
|    | A temperatura ambiente não se encontra dentro do intervalo de funcionamento permitido (50 – 104 °F ou 10 – 40 °C) ou altera-se com demasiada rapidez. | Aguarde 20 segundos até que o termómetro se desligue automaticamente e depois ligue-o novamente. Certifique-se de que o termómetro e o doente se encontram, durante 30 minutos, num ambiente cuja temperatura se situa entre 50 °F e 104 °F ou 10 °C e 40 °C. |
|   | A temperatura medida não está dentro do intervalo típico da temperatura humana.                                                                       | Substitua o protetor da sonda para reiniciar o dispositivo. De seguida, certifique-se de que o termómetro está adequadamente introduzido e meça novamente a temperatura.                                                                                      |
|  | Aparece a indicação HI (Alta) sempre que a temperatura for superior a 108 °F (42,2 °C).                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                    | Aparece a indicação LO (Baixa) sempre que a temperatura for inferior a 68 °F (20 °C).                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  | Erro do sistema (Visor com todos os ícones ou visor em branco)                                                                                        | Aguarde 20 segundos até que o termómetro se desligue automaticamente e depois ligue-o novamente.                                                                                                                                                              |
|  | Se o erro persistir,                                                                                                                                  | ... reinicie o termómetro removendo as pilhas e introduzindo-as novamente.                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                    | Se o erro ainda persistir,                                                                                                                            | ... as pilhas estão sem carga. Coloque novas pilhas.                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                    | Se o erro ainda persistir,                                                                                                                            | ... entre em contacto com o Centro de Assistência ou um representante da Welch Allyn.                                                                                                                                                                         |
|  | A carga está fraca, mas o termómetro vai continuar a funcionar corretamente.                                                                          | Coloque novas pilhas.                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | A carga está demasiado fraca para permitir a medição da temperatura.                                                                                  | Coloque novas pilhas.                                                                                                                                                                                                                                         |


Aspetos que afetam a precisão

Alguns fatores externos podem influenciar as temperaturas nos ouvidos, incluindo:

| Fator                             | Afeta | Não afeta |
|-----------------------------------|-------|-----------|
| Protetor da sonda usado           | ✓     |           |
| Temperatura ambiente              |       | ✓         |
| Lente molhada/suja/danificada     | ✓     |           |
| Aparelho auditivo                 | ✓     |           |
| Deitado numa almofada             | ✓     |           |
| Cerúmen moderado (cera)           |       | ✓         |
| Otite média (infecções do ouvido) |       | ✓         |
| Tubos de timpanostomia            |       | ✓         |


Nota: Se a lente estiver suja ou inserida no canal auditivo sem o protetor de sonda, consultar as instruções de utilização da secção de manutenção e reparação. Limpar exclusivamente conforme indicado pelo fabricante.

Mudar as pilhas

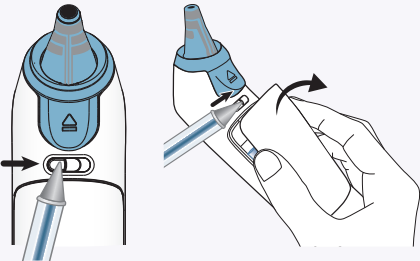


**Mudar as 2 pilhas alcalinas AA quando começar a piscar no ecrã.**

**Abrir a tampa do compartimento das pilhas**  
Abra a tampa do compartimento das pilhas deslizando o trinco de mola para a direita com o dedo ou um objeto pontiagudo como uma caneta. Mantendo o trinco na posição aberta, agarre na tampa do compartimento das pilhas e retire-a.

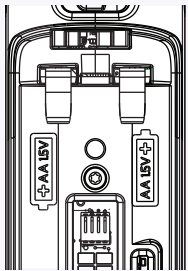

Remover as 2 pilhas alcalinas AA e substituí-las por 2 pilhas alcalinas AA novas, certificando-se de que os polos estão com a orientação correta.

Encaixe a tampa do compartimento das pilhas e certifique-se de que o trinco regressa à sua posição original engatada.

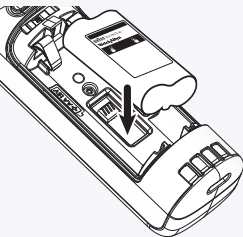

**Bateria recarregável**  
Introduza a bateria recarregável no compartimento das pilhas, com o rótulo da bateria virado para fora.