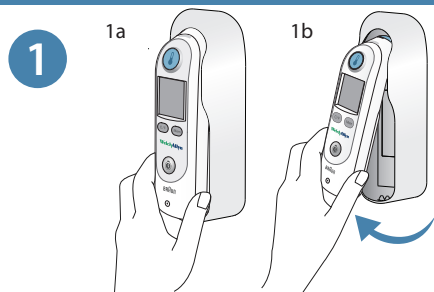
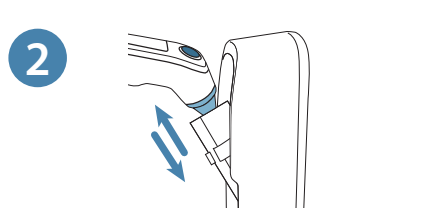
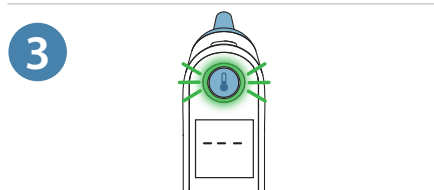
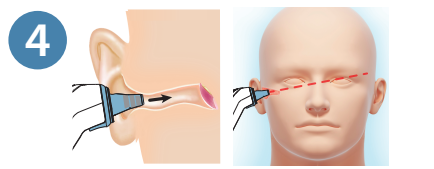


Operare și tehnică


- 


Scoateți termometrul din suport apucând baza termometrului și pivotându-l în sus.
Termometrul va porni automat. Simbolul capacului pentru vârful va clipi pe ecran, solicitând montarea unui capac pentru vârful nou.
- 

Montați un nou capac pe vârful apăsând capătul vârfului direct în cutie, apoi retrageți termometrul.
- 

Așteptați ca termometrul să indice că este pregătit.
Inelul din jurul butonului de MĂSURARE devine verde, termometrul emite un semnal sonor și afișarea celor trei linii pe ecran indică faptul cu termometrul este pregătit.
- 

Presăți vârful în conductul auditiv și îndreptați-l spre tâmpla opusă. Mențineți vârful termometrului nemișcat în conductul auditiv. Amplasarea corectă a vârfului este esențială pentru obținerea de măsurători corecte.
- 

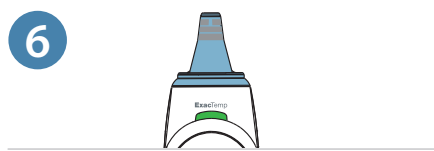Apăsați și eliberați butonul de MĂSURARE.
Termometrul va emite un semnal sonor, ecranul va afișa o linie în mișcare, apoi lampa ExacTemp va clipi, indicând amplasarea stabilă a vârfului.
- 

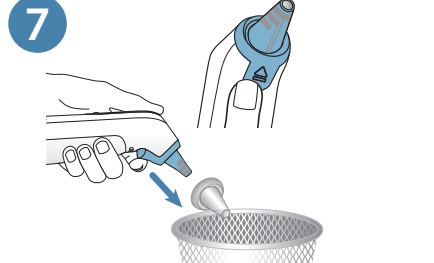
Măsurarea temperaturii. La sfârșitul procesului de măsurare va fi emis un semnal sonor lung, iar lampa verde ExacTemp va rămâne aprinsă. Temperatura va fi afișată pe ecran.
- 

Scoateți capacul utilizat al vârfului apăsând butonul de detașare a capacului vârfului.

Pentru a obține măsurători precise, folosiți un capac pentru vârful nou și curat la fiecare măsurare.


Pentru a efectua o altă măsurare, amplasați pe termometru un capac pentru vârful nou și curat.

Funcții suplimentare

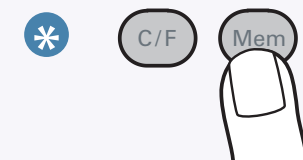- 


Memorie
Apăsați butonul MEMORIE pentru a afișa ultima temperatură măsurată.
- 


Conversia temperaturii
Apăsați și eliberați butonul C/F pentru a vizualiza temporar valoarea măsurată în cealaltă scară de temperatură. Apăsați din nou butonul pentru a reveni la scara de temperatură implicită.

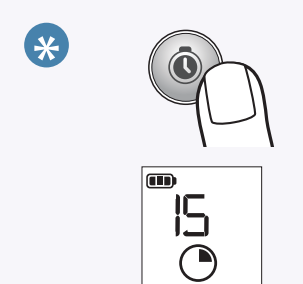
Scara de temperatură implicită poate fi setată folosind comutatorul C/F din compartimentul bateriilor.
- 

Temporizator manual
Apăsați și mențineți apăsat butonul timp de o secundă pentru a activa temporizatorul. La inițierea temporizatorului este emis un semnal sonor.

Primul segment va clipi până la scurgerea primelor 15 secunde, apoi va fi emis un semnal sonor. (Se repetă pentru cele 3 segmente rămase). La 60 de secunde va fi emis un semnal sonor lung. Termometrul va ieși din modul temporizare la 5 secunde după ultimul segment.

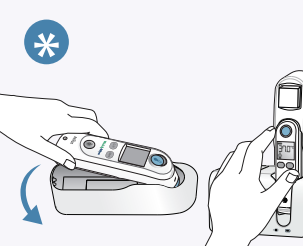Puteți să închideți oricând temporizatorul apăsând din nou butonul.
- 

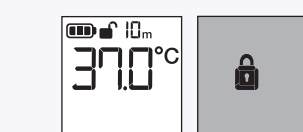Securitate și încărcare
Pentru DEBLOCARE, termometrul trebuie repus în stația de încărcare sau într-un dispozitiv Vital Signs compatibil.
- 

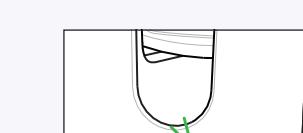Simbolul DEBLOCARE este afișat când modul Securitate este activ, fiind afișat timpul rămas (dacă este mai mic de 60 de minute) până la blocarea termometrului.
- 

Când timpul expiră, simbolul BLOCARE rămâne afișat.
- 

Indicator luminos de încărcare
Luminează pentru a indica faptul că bateria reîncărcabilă se încarcă. Indicatorul își schimbă culoarea de la portocaliu la verde când bateria este complet încărcată.

Erori și notificări

Mesajul de eroare	Situația	Soluția
	Nu este atașat capacul vârfului (animație ATAȘARE).	Atașați un capac nou și curat pe vârful.
	Este atașat un capac folosit pe vârful (animație DETAȘARE).	Aruncați capacul existent și atașați un capac pentru vârful nou și curat dacă măsurați din nou temperatura.
	(POS = eroare poziție) Monitorul infraroșu nu reușește să găsească o temperatură stabilă și nu permite măsurarea.	Schimbați capacul vârfului pentru resetare. Restricționați mișcările pacientului și asigurați-vă că poziționarea vârfului este corectă și că vârful este stabil în timp ce măsurați din nou temperatura.
	Temperatura ambiantă nu se încadrează în intervalul de funcționare permis (50 – 104 °F sau 10 – 40 °C) sau se schimbă prea rapid.	Așteptați 20 de secunde ca termometrul să se oprească, apoi reporniți-l. Asigurați-vă că termometrul și pacientul stau timp de 30 de minute într-un mediu în care temperatura este cuprinsă între 50 °F și 104 °F sau 10 °C și 40 °C.
	Temperatura măsurată nu se încadrează în intervalul tipic de temperaturi al corpului uman. Va fi afișat mesajul HI când temperatura este mai mare de 108 °F (42,2 °C).	Schimbați capacul vârfului pentru resetare. Asigurați-vă apoi că termometrul este introdus corect și luați din nou temperatura.
	Va fi afișat mesajul LO când temperatura este mai mică de 68 °F (20 °C).	
	Eroare de sistem (Sunt afișate toate simbolurile sau ecranul este gol)	Așteptați 20 de secunde ca termometrul să se oprească automat, apoi porniți-l din nou.
	Dacă eroarea persistă,	... resetați termometrul scoțând bateriile și introducându-le la loc.
	Dacă eroarea persistă în continuare,	... bateriile sunt descărcate. Introduceți baterii noi.
	Dacă eroarea persistă în continuare,	... contactați reprezentantul sau centrul de service Welch Allyn.
	Nivelul bateriei este redus, însă termometrul va funcționa corect.	Introduceți baterii noi.
	Bateria este prea descărcată pentru a măsura temperatura.	Introduceți baterii noi.


Factori care afectează precizia

Temperatura urechii poate fi afectată de factori externi, inclusiv:

Factor	Afectată	Neafectată
Capac pentru vârful folosit	✓	
Temperatură ambiantă		✓
Lentilă udă / murdară / deteriorată	✓	
Proteză auditivă	✓	
Culcat pe pernă	✓	
Cerumen moderat (ceară din urechi)		✓
Otită medie (infecții auriculare)		✓
Tuburi de timpanostomie		✓


Notă: Dacă lentila este murdară sau este introdusă în conductul auditiv fără capac pentru vârful, consultați secțiunea de întreținere și servizare din instrucțiunile de utilizare. Curățați-o doar conform indicațiilor producătorului.

Înlocuirea bateriilor

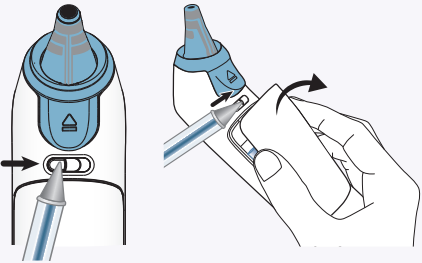


Schimbați cele 2 baterii alcaline AA când simbolul începe să clipească pe ecran.

Deschideți ușa bateriilor
Deschideți ușa bateriilor glisând spre dreapta blocajul cu arc folosind degetul sau un obiect ascuțit, cum ar fi un pix. În timp ce mențineți blocajul în poziție deschisă, apucați ușa bateriilor și scoateți-o.

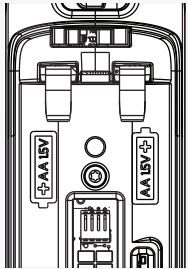

Scoateți cele 2 baterii alcaline AA și schimbați-le cu 2 baterii alcaline AA noi, asigurându-vă că respectați polaritatea.

Fixați la loc ușa bateriilor și asigurați-vă că blocajul revine în poziția de blocare.

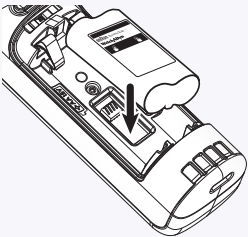

Baterie reîncărcabilă
Introduceți setul de baterii reîncărcabile în compartiment, cu eticheta bateriilor spre exterior.

© 2019 Toate drepturile sunt rezervate. Acest produs este fabricat sub licența mărcii comerciale 'Braun'. 'Braun' este o marcă înregistrată de Braun GmbH, Kronberg, Germania. ThermoScan este marcă comercială înregistrată deținută de Helen of Troy Limited.



Fabricat de:
Welch Allyn, Inc.
4341 State Street Road
Skaneateles Falls, NY 13153
USA



Welch Allyn Limited
Navan business Park
Dublin road,
Navan, County Meath
Republic of Ireland
C15 AW22

Produs în Mexic

DIR 80025068
Data revizuirii: 2019-05

BRAUN

WelchAllyn®