




操作和技巧

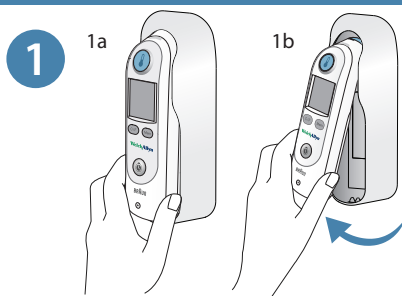


1 握住耳温计底部并向上旋转从支架中取出耳温计。温度计会自动启动。屏幕上的探头套图标  会闪烁，指示需要探头套。

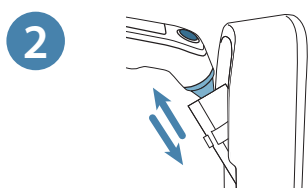


2 将探头径直推入盒中，然后拔出，即装上新耳套。

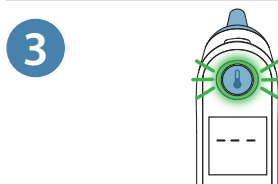

3 等待就绪指示。按钮外围的圆环变成绿色，温度计会发出哔的一声，屏幕上显示三横，指示温度计已准备就绪。

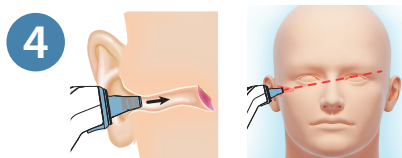


4 将探头紧贴地置入耳道，指向对面的太阳穴。将温度计探头在耳道内保持不动。正确放置探头是精确测量的关键。

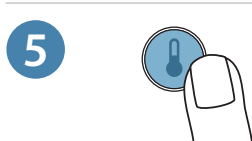

5 按下然后松开按钮。温度计会发出哔的一声，屏幕上将显示正在，然后 ExacTemp 绿色指示灯会闪烁，表示探头位置未发生变动。



6 温度测量：温度计发出一个长的哔声，ExacTemp 绿色指示灯停止闪烁，表示测量结束。温度将显示在屏幕上。

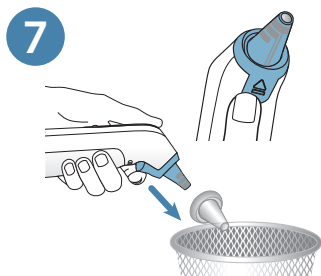


7 按下耳套弹出器按钮，卸下用过的耳套。


为了实现精确测量，请在每次测量时都使用一个干净的新耳套。

再一次测量温度时，请在温度计上放置一个干净的新耳套。


附加功能

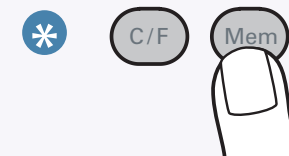


内存
按 MEM 键可调出上一次测量的温度测量值。

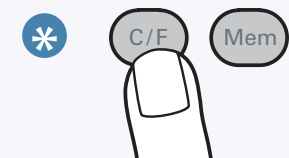


温度转换
按 C/F 按钮可临时查看用备选刻度表示的温度。再次按下该按钮可返回默认刻度。
默认刻度可以用位于电池盒中的 C/F 开关设置。

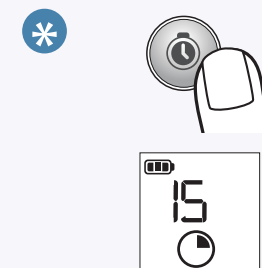

手动计时器
按住  按钮可激活用于进行脉搏或呼吸计数的计时器。计时器启动时会发出哔的一声。
第一个象限段将持续闪烁 15 秒钟，然后会发出哔声。（剩下的三个象限段将重复此过程。）到达 60 秒时，计时器会发出一个长的哔声。最后一个象限段结束 5 秒后，温度计将退出计时器模式。
您可以随时再按一下  按钮退出计时器模式。

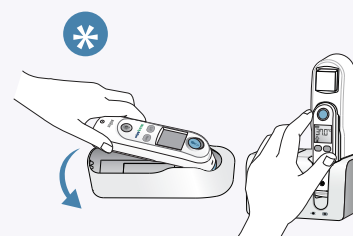


安全和充电
要解锁，必须将温度计放回充电座或兼容的生命体征设备。

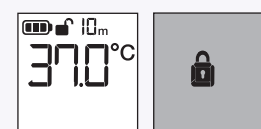



安全模式激活时解锁图标  会显示，并计算温度计锁定前的剩余可用时间（如 60 分钟内）。

当时间用完时，锁定图标  将持续显示。

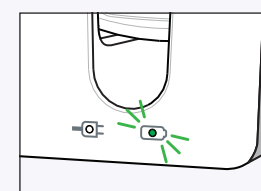

充电指示灯
亮起表示可充电电池正在充电。
电池完全充满时，指示灯将从黄色变成绿色。

错误和通知

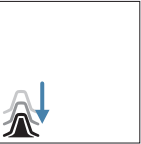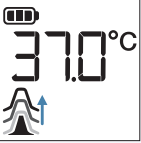错误消息	情况	解决方案
	未装耳套（动画“开”）。	装上干净的新耳套。
	装着已用过的耳套（动画“关”）。	如果要再一次测量温度，请丢掉用过的耳套，并装上干净的新耳套。
	（POS = 位置错误）红外监测器找不到温度平衡，从而不能测量。	更换耳套以重置。让患者不要乱动，并确保探头位置正确，并在测量新温度时保持不动。
	环境温度不在允许的工作范围内（10-40 °C 或 50-104 °F）或环境温度出现快速变化。	等待 20 秒钟，直到温度计自动关闭，然后再次打开。确保温度计和患者处于温度介于 10 °C 和 40 °C 或 50 °F 和 104 °F 之间的同一环境中达 30 分钟。
	测得的温度不在典型的人体温度范围内。当温度高于 42.2 °C (108 °F) 时，将显示 HI。	更换耳套以重置。然后，确保温度计已正确插入，并再次测量温度。
	当温度低于 20 °C (68 °F) 时，将显示 LO。	
	系统错误（所有图标均显示或显示屏为空白）	等待 20 秒钟，直到温度计自动关闭，然后再次打开。
	如果错误仍然存在，	... 取出电池并放回，以重置温度计。
	如果错误仍然存在，	... 请联系 Welch Allyn 服务中心或代表。
	电池电量低，但温度计仍正常运行。	插入新电池。
	电池电量太低，无法测量温度。	插入新电池。


影响准确性的因素

外部因素会影响耳温，包括：

因素	影响	不影响
用过的耳套	✓	
环境温度		✓
镜片湿/脏/受损	✓	
助听器	✓	
躺在枕头上	✓	
适量的耳垢（耳屎）		✓
中耳炎（耳部感染）		✓
鼓膜置管		✓

注意：如果镜片脏污或未使用耳套便插入耳道，请参阅使用指南的“保养和维修”部分。必须按制造商的要求进行清洁。


更换电池

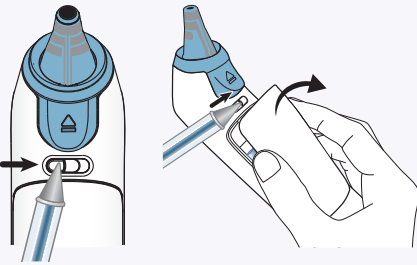

当屏幕上开始闪烁  时，更换两节 AA 碱性电池。


打开电池盖

要打开电池盖，用手指或钢笔等尖头物体将弹簧门滑到右边，将弹簧门保持在打开位置的同时，抓住电池盖，将其取下。

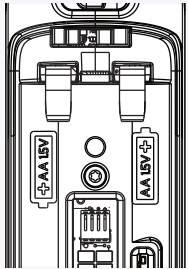

取下两节 AA 碱性电池，并更换上两节新的 AA 碱性电池，确保电池的两极方向正确。

将电池盖推至原位，直至卡入定位。

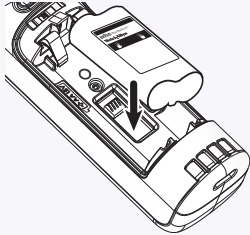

充电电池

按照电池盒内的电池图标放置电池。

© 2019 保留所有权利。本产品在“Braun”商标的授权下制造。
“Braun”是 Braun GmbH（德国克朗伯格）的注册商标。
ThermoScan 是 Helen of Troy Limited 的注册商标。

制造商：
Welch Allyn, Inc.
4341 State Street Road
Skaneateles Falls, NY 13153
USA



Welch Allyn Limited
Navan business Park
Dublin road,
Navan, County Meath
Republic of Ireland
C15 AW22

墨西哥制造

DIR 80025069
修订日期：2019 年 5 月

BRAUN

WelchAllyn®