



Работа и техника

- 1** 1a 1b

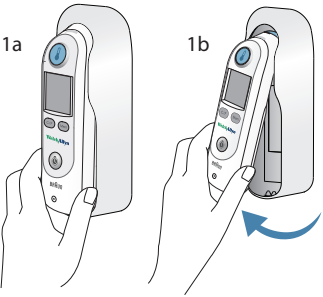


Извадете термометъра от стойката, като го хванете в основата и го извъртите нагоре. Термометърът ще се включи автоматично. Иконата на покритието за сонда ще примигва на дисплея, указвайки, че е необходимо ново покритие за сонда.
- 2**

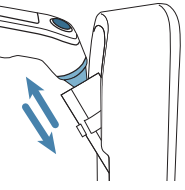

Прикрепете ново покритие за сонда, като натиснете върха на сондата право в кутията, след което издърпайте термометъра навън.
- 3**



Изчакайте индикатора за готовност. Кръгът около бутона за ИЗМЕРВАНЕ става зелен, подава се еднократен звуков сигнал и на дисплея се появяват три линии, указващи, че термометърът е в готовност.
- 4**

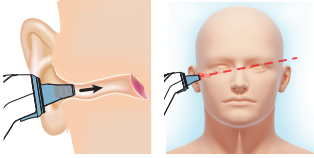


Поставете сондата плътно в ушния канал и я насочете към срещуположното слепоочие. Дръжте сондата на термометъра неподвижно в ушния канал. Правилното поставяне на сондата е изключително важно за точното измерване.
- 5**



Натиснете и освободете бутона за ИЗМЕРВАНЕ. Ще се подаде еднократен звуков сигнал, на дисплея ще се появят движещи се чертички, след което зеленият индикатор ExaTemp ще примигва, указвайки правилно положение на сондата.
- 6**




Измерване на температурата. Дълъг звуков сигнал и постоянно светещ зелен индикатор ExaTemp ще сигнализират края на процеса на измерване. Температурата ще се покаже на дисплея.
- 7**

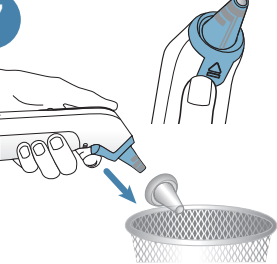


Свалете използваното покритие за сонда, като натиснете бутона за изваждане на покритието за сонда. За да постигнете точно измерване, използвайте ново, чисто покритие за сонда за всяко измерване. За да направите друго измерване, поставете ново, чисто покритие за сонда на термометъра.

Допълнителни функции

- ***

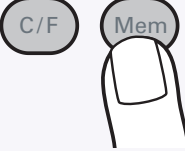


Памет
Натиснете бутона MEMORY (ПАМЕТ), за да видите последно измерената температура.
- ***

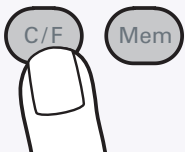

Преобразуване на температурата
Натиснете и освободете бутона C/F, за да видите временно измерването в алтернативната температурна скала. Натиснете бутона отново, за да се върнете към температурната скала по подразбиране. Температурната скала по подразбиране може да се зададе с превключвателя C/F, намиращ се в отделението за батерии.
- ***



Ръчен таймер
Натиснете и задръжте бутона за една секунда, за да активирате таймера. При стартиране на таймера се чува звуков сигнал. Първият сегмент ще примигва до изтичане на първите 15 секунди, след което ще се чуе звуков сигнал. (Повтаря се за 3-те останали сегмента.) След 60 секунди ще се чуе дълъг звуков сигнал. Термометърът ще излезе от режим на таймер 5 секунди след последния сегмент. Можете да прекратите таймера по всяко време, като натиснете бутона отново.
- ***

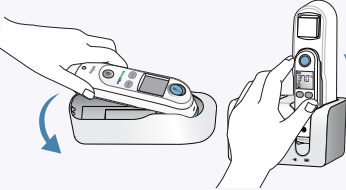

Защита и зареждане
За да ОТКЛЮЧИТЕ, термометърът трябва да се върне към станцията за зареждане или съвместимо устройство за жизнени показатели. Иконата за ОТКЛЮЧВАНЕ се показва, когато защитеният режим е активен, и отброява оставащото налично време (ако е под 60 минути), преди термометърът да се заключи. Когато времето изтече, на дисплея остава иконата за ЗАКЛЮЧВАНЕ. Светлинен индикатор за зареждане Светва, за да укаже, че презареждащата се батерия се зарежда. Индикаторът се променя от жълт на зелен цвят, когато батерията е напълно заредена.


Съобщение за грешка	Ситуация	Решение
	Не е поставено покритие за сонда (анимирано поставяне).	Поставете ново чисто покритие за сонда.
	Поставено е използвано покритие за сонда (анимирано сваляне).	Изхвърлете покритието за сонда, което е поставено, и поставете ново чисто покритие за сонда, ако правите друго измерване на температурата.
	(POS = грешка в позицията) Инфракчервеният монитор не може да намери равновесна температура и не позволява измерване.	Сменете покритието за сонда, за да нулирате. Ограничете движението на пациента и се уверете, че положението на сондата е правилно и остава стабилно, докато се извършва новото измерване на температурата.
	°F Околната температура не е в рамките на допустимия работен диапазон (50 – 104 °F или 10 – 40 °C) или се променя твърде бързо.	Изчакайте 20 секунди, докато термометърът се изключи автоматично, след което го включете отново. Погрижете се термометърът и пациентът да са 30 минути в среда, в която температурата е между 50 °F и 104 °F или 10 °C и 40 °C.
	Измерената температура не е в рамките на диапазона на типичната човешка температура. Ще се покаже HI, ако температурата е над 108 °F (42,2 °C).	Сменете покритието за сонда, за да нулирате. След това се уверете, че термометърът е поставен правилно и направете ново измерване.
	Ще се покаже LO (НИСКА), ако температурата е под 68 °F (20 °C).	
	Грешка в системата (Показват се всички икони или дисплеят е празен)	Изчакайте 20 секунди, докато термометърът се изключи автоматично, след което го включете отново.
	Ако грешката продължава,	... нулирайте термометъра, като извадите батериите и ги поставите обратно.
	Ако грешката все още продължава,	... батериите са изчерпани. Поставете нови батериии.
	Ако грешката все още продължава,	... свържете се с местния сервизен център или представител на Welch Allyn.
	Батерията е на изчерпване, но термометърът все още ще работи правилно.	Поставете нови батерии.
	Батерията е твърде изчерпана, за да позволи измерване на температурата.	Поставете нови батерии.

Ушната температура може да се повлияе от външни фактори, като:

Фактор	Влияе се	Не се влияе
Използвано покритие за сонда	✓	
Околна температура		✓
Мокри/замърсени/повредени лещи	✓	
Слухов апарат	✓	
Лежане върху възглавница	✓	
Умерен церумен (ушна кал)		✓
Отит на средното ухо (ушни инфекции)		✓
Тимпаностомни тръбички		✓


Забележка: Ако лещите са замърсени или са поставени в ушния канал без покритие за сонда, вижте раздела за поддръжка и обслужване в указанията за употреба. Почиствайте само съгласно посоченото от производителя.

Смяна на батериите

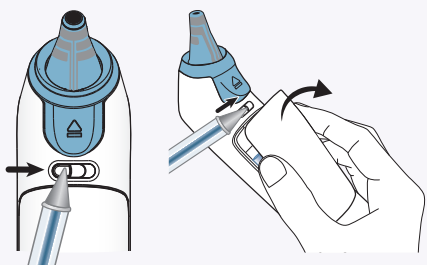


Сменете 2-те алкални батерии AA, когато започне да примигва на дисплей.

Отваряне на капачето на батериите
Отворете капачето на батериите, като плъзнете пружинния фиксатор надясно с пръст или заострен предмет, като химикалка. Докато държите фиксатора в отворено положение, хванете капачето на батериите и го отстранете.

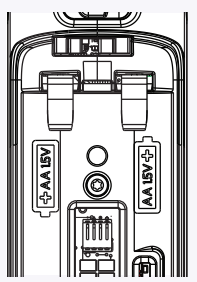

Извадете 2-те алкални батерии AA и ги заменете с 2 нови алкални батерии AA, като спазвате посоката на полюсите.

Затворете капачето на батериите с изщракване и се уверете, че фиксаторът се връща към първоначалното си положение.

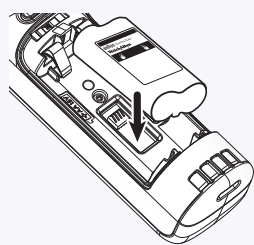

Презареждащ се пакет батерии
Поставете презареждащ се пакет батерии в отделението за батерии със сочещ навън етикет на батериите.