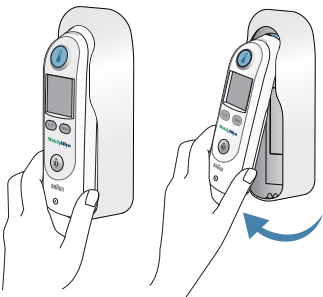
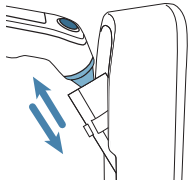
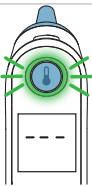
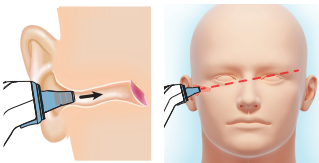


Rad i tehnika

- 

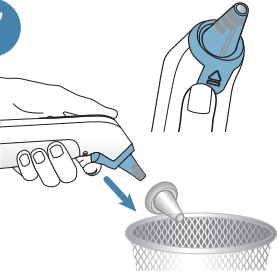
Izvadite toplomjer iz nosača držeći ga pri dnu i zakrećući ga prema gore. Toplomjer će se uključiti automatski. Na zaslonu će treperiti ikonica , što znači da je potrebna nova kapica sonde.
- 

Postavite novu kapicu sonde tako da gurnete vrh sonde ravno u kutiju, zatim izvučete toplomjer.
- 

Čekajte da toplomjer bude spreman. Prsten oko gumba MEASURE  pozeleni, toplomjer će se oglasiti jednom i tri crtice na zaslonu pokazuju da je toplomjer spreman.
- 

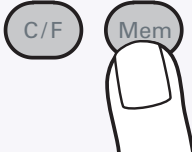
Postavite sondu čvrsto u kanal uha i usmjerite prema suprotnoj sljepoočnici. Držite mirno sondu toplomjera u kanalu uha. Za precizno mjerenje neophodno je pravilno postavljanje sonde.
- 

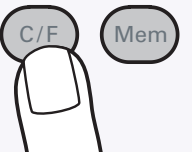
Pritisnite i otpustite gumb MEASURE . Toplomjer će se oglasiti jednom, na zaslonu će se pojaviti crtice, zatim će zelena lampica ExacTemp bljeskati, što označava na dosljedni položaj sonde.
- 

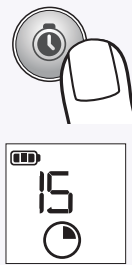
Mjerenje temperature. Dugi zvučni signal i mirno zeleno ExacTemp svjetlo označavaju kraj mjerenja. Na zaslonu će se prikazati temperatura.
- 

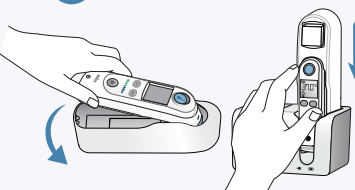
Izbacite upotrijebljenu kapicu sonde pritiskom na gumb izbacivača kapice sonde . Kako biste postigli točna mjerenja za svako mjerenje temperature uvijek postavite novu, čistu kapicu sonde. Za novo mjerenje temperature postavite novu, čistu kapicu sonde na toplomjer.

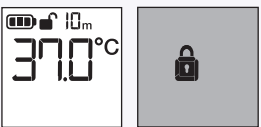
Dodatne funkcije

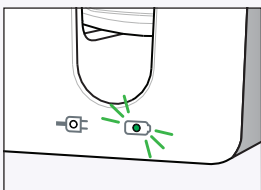
- 


Memorija
Pritisnite gumb MEMORY za prikaz posljednje izmjerene temperature.
- 


Konverzija temperature
Pritisnite i otpustite gumb C/F za pregledati mjerenja u temperaturnoj ljestvici koja nije zadana. Pritisnite ponovo i otpustite taj gumb za vraćanje na zadanu ljestvicu.
Zadana temperaturna ljestvica može se postaviti pomoću C/F preklopnika u odjeljku za baterije.
- 


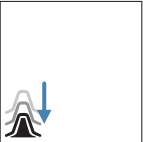
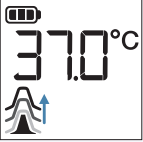
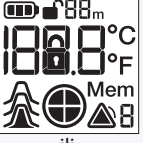

Vremenski programator ručno
Pritisnite i držite gumb  jednu sekundu kako biste aktivirali vremenski programator. Pri aktiviranju vremenskog programatora čuje se zvučni signal.
Prvi segment će treptati dok se ne završi prvih 15 sekundi, a zatim se čuje zvučni signal. (Ponavlja se za 3 preostala segmenta). Na 60 sekundi će se oglasiti dugački zvučni signal. Toplomjer će izaći iz načina rada vremenskog programatora 5 sekundi nakon zadnjeg segmenta.
Iz načina rada vremenskog programatora možete izaći ponovnim pritiskanjem gumba .
- 


Sigurnost i punjenje
Za OTKLJUČIVANJE, toplomjer se mora vratiti na postaju za punjenje ili kompatibilni uređaj za vitalne znakove.
- 

UNLOCK  ikona prikazuje kada je aktivan način rada Security (Sigurnost) i računa preostalo vrijeme (ako je ispod 60 minuta) prije zaključavanja toplomjera.
Nakon isteka vremena ikona LOCK  ostaje na zaslonu.
- 

Svjetlo pokazivača punjenja
Svjetli ukazujući na punjenje punjive baterije. Pokazivač se mijenja od jantarne u zelenu boju kada je baterija potpuno napunjena.

Pogreške i obavijesti

Poruka o grešci	Situacija	Rješenje
	Kapica sonde nije postavljena (animira se ON).	Postavite novu, čistu kapicu sonde.
	Postavljena je korištena kapica sonde (animira se OFF).	Za novo mjerenje temperature bacite korištenu kapicu sonde i postavite novu, čistu.
	(POS = greška položaja) Infracrveni monitor ne može pronaći uravnoteženu temperaturu i ne dopušta mjerenje.	Promijenite kapicu sonde. Ograničite micanje bolesnika i provjerite je li položaj sonde ispravan i ostaje stabilan pri novom mjerenju temperature.
	Temperatura okoline nije unutar dopuštenog radnog raspona (10 – 40 °C ili 50 – 104 °F) ili se previše brzo mijenja.	Pričekajte 20 sekundi. dok se toplomjer ne isključi automatski, a zatim ponovno uključite. Osigurajte da se toplomjer i pacijent 30 minuta nalaze u okolini gdje je temperatura između 10 °C i 40 °C ili 50 °F i 104 °F.
	Izmjerena temperatura nije unutar raspona normalne temperature ljudskog tijela. HI će se prikazati kada je temperatura viša od 42,2 °C (108 °F).	Promijenite kapicu sonde za resetiranje. Zatim provjerite je li toplomjer pravilno umetnut i obavite novo mjerenje temperature.
	LO će se prikazati kada je temperatura niža od 20 °C (68 °F).	
	Greška sustava (Prikazuju se sve ikonice ili je zaslon prazan)	Pričekajte 20 sekundi dok se toplomjer automatski ne ugasi, zatim ga ponovno uključite.
	Ako je greška i dalje prisutna,	... resetirajte toplomjer tako da uklonite baterije i ponovno ih umetnete.
	Ako je greška još uvijek prisutna,	... baterije su ispražnjene. Umetnite nove baterije.
	Ako je greška još uvijek prisutna,	... obratite se lokalnom Welch Allyn servisnom centru ili zastupniku
	Baterija je slaba, ali toplomjer još uvijek ispravno radi.	Umetnite nove baterije.
	Baterija je preslaba za mjerenje temperature.	Umetnite nove baterije.

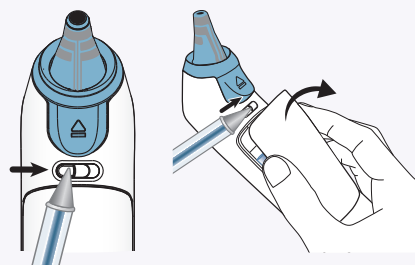
Što utječe na točnost

Vanjski čimbenici mogu utjecati na temperature u uhu, uključujući:

Čimbenik	Utječe	Ne utječe
Korištena kapica sonde	✓	
Temperatura okoline		✓
Vlažna / prljava / oštećena leća	✓	
Slušno pomagalo	✓	
Ležanje na jastuku	✓	
Umjereni cerumen (ušni vosak)		✓
Upala srednjeg uha (infekcija uha)		✓
Cjevčice timpanostomije		✓

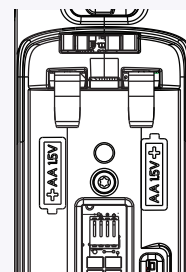
Napomena: Ako je leća prljava ili umetnuta u ušni kanal bez kapice sonde, pogledajte odjeljak za održavanje i servisiranje u uputama za uporabu. Čistite samo prema proizvođača.

Zamjena baterija



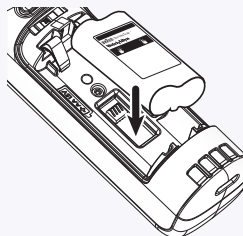
Zamijenite 2 AA alkalne baterije kada  na zaslonu počne bljeskati.

Otvorite pokrov pretinca za baterije
Otvorite vratašca baterije klizanjem zasuna s oprugom na desnoj strani prstom ili šiljastim predmetom poput olovke. Držeći zasun u otvorenom položaju, primite vratašca baterije i uklonite ih.



Uklonite 2 AA alkalne baterije i zamijenite ih s 2 nove AA alkalne baterije te provjerite jesu li polovi pravilno postavljeni.

Pričvrstite vratašca baterije natrag na mjesto i osigurajte da se zasun vrati na prvotni zaključani položaj.



Sklop punjivih baterija
Umetnite sklop punjive baterije u odjeljak za baterije s oznakom baterije okrenutom prema van.

© 2019 Sva prava pridržana. Ovaj uređaj je proizveden prema licenci za zaštitni znak 'Braun'.
'Braun' je registrirani zaštitni znak tvrtke Braun GmbH, Kronberg, Njemačka.
ThermoScan je registrirani zaštitni znak u vlasništvu tvrtke Helen of Troy Limited.



Proizvođač:
Welch Allyn, Inc.
4341 State Street Road
Skaneateles Falls, NY 13153
USA



Welch Allyn Limited
Navan business Park
Dublin road,
Navan, County Meath
Republic of Ireland
C15 AW22

Proizvedeno u Meksiku

DIR 80025051
Datum izmjene: 2019-05

BRAUN

WelchAllyn®