




Kasutamish juhised ja -tehnika

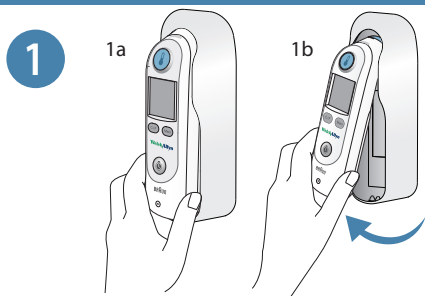


Eemaldage termomeeter hoidikust, haarates termomeetri käepidemeosast ja keerates üles. Termomeeter lülitub automaatselt sisse. Ekraanil vilgub otsakukatte ikoon , mis näitab, et vaja on uut otsakukatet.

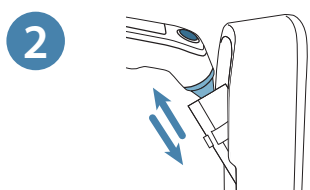

Paigaldage uus otsakukate, surudes otsaku otse salve ja tõmmates uuesti välja.

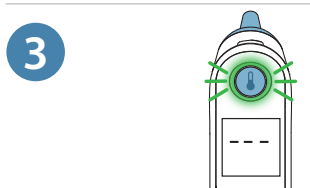

Oodake, kuni seade annab märku valmisolekust. MÕÖTMISNUPPU  ümber süttib roheline valgus, termomeeter piiksub üks kord ja ekraanil ilmub kolm kriipsu, mis näitab, et termomeeter on valmis.

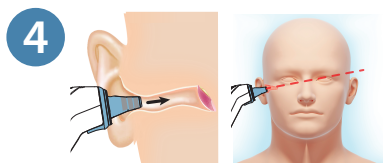


Sisestage otsak tihedalt kuulmekäiku suunaga vastas-oimukohale. Hoidke termomeetri otsakut kuulmekäigus paigal. Otsaku hoidmine õiges asendis on täpse mõõtmistulemuse saamiseks oluline.



Vajutage korra MÕÖTMISNUPPU . Termomeeter teeb ühe piiksu, ekraanil ilmuvad liikuvad kriipsud ja roheline ExacTemp-tuli vilgub, mis näitab, et otsaku asend on stabiilne.



Temperatuuri mõõtmistulemus. Mõõtmise lõppemisest annab märku pikk piiks ja pidevalt põlev ExacTemp-tuli. Temperatuur kuvatakse ekraanil.

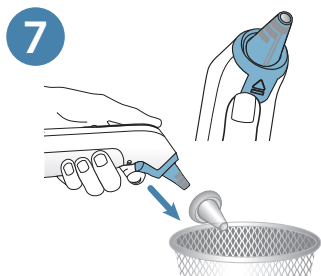


Eemaldage kasutatud otsakukate, vajutades otsakukatte eemaldamise nuppu .

Täpsete mõõtmistulemuste saamiseks kasutage igaks mõõtmiseks uut puhast otsakukatet.

Mõõtmise kordamiseks paigaldage termomeetrile uus puhas otsakukate.

Lisafunktsioonid

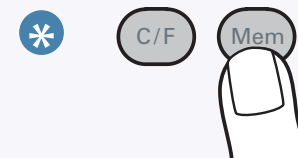


Mälu
Viimati mõõdetud temperatuuri kuvamiseks vajutage MÄLUNUPPU.




Temperatuuri skaalateisendus
Mõõtmistulemuse ajutiseks kuvamiseks teisel temperatuuriskaalal vajutage korra nuppu C/F. Vaike-temperatuuriskaalale naasmiseks vajutage sama nuppu uuesti.
Vaike-temperatuuriskaala saab valida akupesas oleva C/F-lülitiga.




Käsitaimer
Taimeri käivitamiseks hoidke nuppu  üks sekund all. Taimeri käivitumisest annab märku piiks.
Esimese 15 sekundi jooksul vilgub esimene veerand, misjärel kõlab piiks. (Sama toimub ülejäänud 3 veerandiga.) 60 sekundi möödumisel kõlab pikk piiks. Termomeeter väljub taimerirežiimist 5 sekundit pärast viimase veerandi täitumist.
Võite taimerirežiimist väljuda ka nuppu  uuesti vajutades.

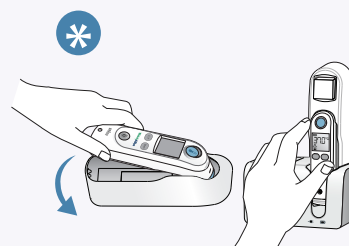

Turvalisus ja laadimine
VABASTAMISEKS tuleb termomeeter panna tagasi laadimisjaama või ühilduvasse eluliste näitajate monitori.


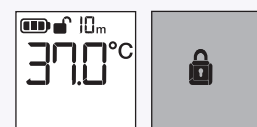


Turvarežiimis kuvatakse VABASTATUD ikooni  ja termomeetri lukustamiseni jäänud aega (kui jäänud on alla 60 minuti).
Aja lõppemisel jääb ekraanile LUKUSTATUD ikoon .

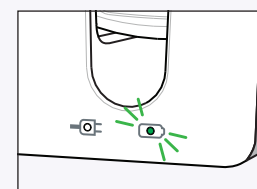

Laadimistuli
Süttib siis, kui akut laetakse. Kui aku saab täis laetud, muutub indikaatorituli kollasest roheliseks.

Veateated ja märguanded

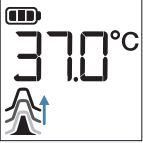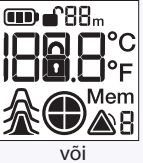Veateade	Olukord	Lahendus
	Otsakukate pole paigaldatud (paigaldamise animatsioon).	Kinnitage uus puhas otsakukate.
	Otsakul on kasutatud otsakukate (eemaldamise animatsioon).	Visake kasutatud otsakukate ära ja paigaldage enne järgmist temperatuuri mõõtmist uus puhas otsakukate.
	(POS = vale asend) Infrapunaandur ei saavuta soojustasakaalu, mistõttu mõõtmistulemust ei saa registreerida.	Lähtestamiseks vahetage otsakukate välja. Järgmisel temperatuurimõõtmisel jälgige, et patsient ei liigutaks ning et otsak oleks kõrvas õiges asendis ja ei liiguks.
	Õhutemperatuur ei ole lubatud kasutusvahemikus (10–40 °C ehk 50–104 °F) või muutub liiga kiiresti.	Oodake 20 s, kuni termomeeter lülitub automaatselt välja, ja lülitage seejärel uuesti sisse. Enne mõõtmist peavad termomeeter ja patsient olema vähemalt 30 minutit keskkonnas, kus temperatuur on vahemikus 10–40 °C ehk 50–104 °F.
	Mõõdetud temperatuur ei ole inimese kehatemperatuuri tüüpilises vahemikus. Kui temperatuur on kõrgem kui 42,2 °C (108 °F), kuvatakse HI.	Lähtestamiseks vahetage otsakukate välja. Seejärel kontrollige, et termomeeter oleks õigesti sisestatud, ning mõõtke temperatuuri uuesti.
	Kui temperatuur on madalam kui 20 °C (68 °F), kuvatakse LO.	
	Süsteemi viga (Kuvatakse kõik ikoonid või ekraan on tühi)	Oodake 20 sekundit, kuni termomeeter automaatselt välja lülitub, ning lülitage see uuesti sisse.
	Kui viga püsib,	... lähtestage termomeeter, eemaldades patareid ja pannes need tagasi sisse.
	Kui viga püsib ikkagi,	... on patareid tühjad. Sisestage uued patareid.
	Kui viga püsib ikkagi,	... võtke ühendust Welch Allyn'i kohaliku hoolduskeskuse või esindajaga.
	Patarei hakkab tühjaks saama, aga termomeeter töötab veel korralikult.	Sisestage uued patareid.
	Patarei on temperatuuri mõõtmiseks liiga tühi.	Sisestage uued patareid.


Täpsust mõjutavad tegurid

Kõrvasisest temperatuuri võivad mõjutada välistegurid, näiteks järgmised.

Tegur	Mõjutab	Ei mõjuta
Kasutatud otsakukate	✓	
Õhutemperatuur		✓
Märg/määratud/kahjustatud lääts	✓	
Kuuldeaparaat	✓	
Kõrv toetatud padjale	✓	
Möödukas koguses kõrvavaiku		✓
Keskkõrvapõletik		✓
Tümpaanostoomia torud		✓

Märkus. Kui lääts on määratud või sisestatud kuulmekäiku ilma otsakukatteta, siis juhendage kasutusjuhendi jaotisest, milles käsitletakse puhastamist ja hooldamist. Puhastage ainult tootja juhiste kohaselt.


Patareide vahetamine

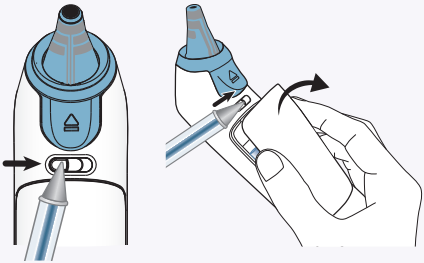

Vahetage patareid kahe (2) uue AA-tüüpi leelispatari vastu välja, kui ekraanil hakkab vilkuma .


Patareipesa kate avamine

Avage patareipesa kate, libistades vedrunappu paremale sõrme või sobiva esemega, näiteks pastapliatsiga. Hoidke nappu avatud asendis, haarake patareipesa kattedest ja eemaldage see.

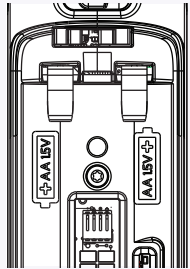

Eemaldage kaks (2) AA-tüüpi leelispatareid ja asendage kahe (2) uue AA-tüüpi leelispatareiga, jälgides polaarsust.

Pange patareipesa kate tagasi, jälgides, et vedrunapp klõpsataks tagasi algsesse lukustatud asendisse.

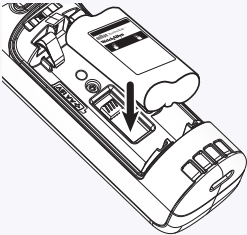

Akupakk

Sisestage akupakk patareipesasse nii, et selle silt jääb väljapoole.