



Fonctionnement et technique


- 1**

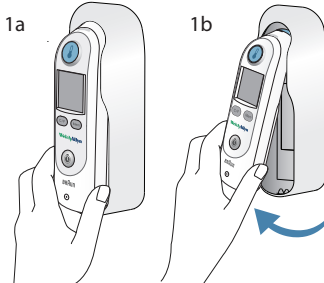


Retirez le thermomètre du socle en saisissant le thermomètre par sa base et en la faisant pivoter vers le haut.
Le thermomètre s'allume automatiquement. L'icône des couvre-sondes  clignote à l'écran, ce qui indique qu'un nouveau couvre-sonde doit être utilisé.
- 2**

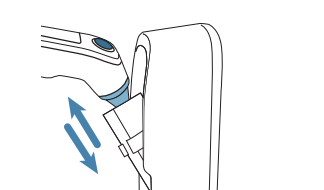


Fixez un nouveau couvre-sonde : poussez l'extrémité du thermomètre (côté lentille) dans la boîte, puis retirez le thermomètre.
- 3**

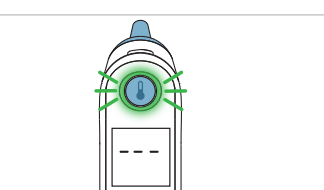


Attendez que le thermomètre soit prêt à être utilisé. Le cercle entourant le bouton de MESURE  devient vert. Le thermomètre émet un bip et trois lignes apparaissent à l'écran, indiquant que le thermomètre est prêt à être utilisé.
- 4**

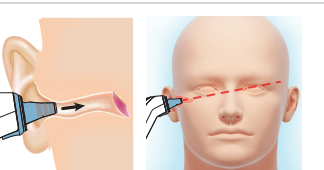


Ajustez bien la sonde dans le conduit auditif et orientez-la en direction de la tempe opposée.
La sonde du thermomètre placée dans le conduit auditif doit rester dans une position stable. Pour obtenir des mesures précises, il est essentiel que la sonde soit positionnée correctement.
- 5**

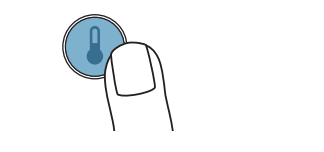

Appuyez sur le bouton de MESURE  et relâchez-le. Le thermomètre émet un seul bip, des tirets horizontaux défilent à l'écran, le voyant lumineux vert ExacTemp clignote, confirmant que la position de la sonde est stable.
- 6**

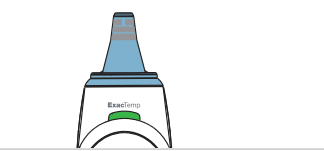

Mesure de la température. La fin de la prise de mesure est confirmée par un long bip et une indication visuelle (voyant lumineux ExacTemp vert et fixe). La température apparaît à l'écran.
- 7**

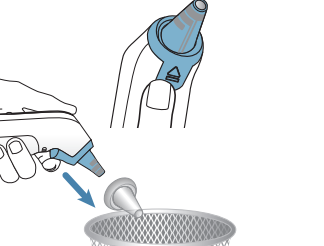


Retirez le couvre-sonde usagé en appuyant sur le bouton éjecteur du couvre-sonde .

Pour obtenir des résultats précis, utilisez un nouveau couvre-sonde propre pour chaque mesure.


Pour prendre une autre mesure, placez un nouveau couvre-sonde propre sur le thermomètre.

Fonctions supplémentaires

- ***

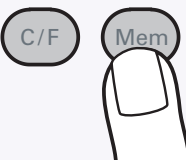


Mémoire
Pour connaître la dernière température mesurée, appuyez sur le bouton **Mem** (MÉMOIRE).
- ***

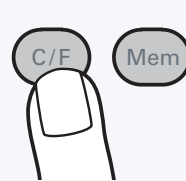

Conversion de température
Appuyer sur le bouton **C/F**, puis relâchez-le afin de visualiser temporairement la mesure sur une autre échelle de température. Appuyer une nouvelle fois afin de revenir à l'échelle par défaut.


L'échelle de température par défaut peut être paramétrée grâce au commutateur C/F situé dans le compartiment à piles.
- ***

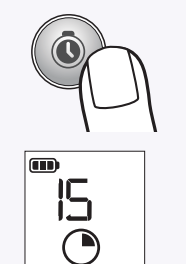


Minuterie manuelle
Pour activer le minuteur, appuyez sur le bouton du minuteur  pendant une seconde. Au déclenchement du minuteur, le thermomètre émet un bip.


Le premier segment clignotera pendant les 15 premières secondes puis un bip sera émis. (Ce processus sera répété pour les 3 autres segments). Un bip de longue durée sera émis à 60 secondes. Le thermomètre quittera le mode du minuteur 5 secondes après le dernier segment.

Pour arrêter le minuteur à tout moment, appuyez sur le bouton  du minuteur.
- ***

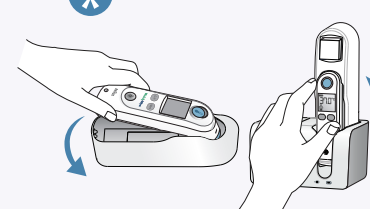





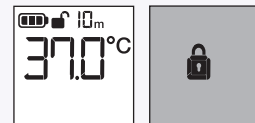
Sécurité et chargement des piles
Pour DÉVERROUILLER, le thermomètre doit être remis dans sa station de charge ou un dispositif de mesure des signes vitaux compatible.
- 

L'icône de DÉVERROUILLAGE  s'affiche lorsque le mode Sécurité est activé et compte le temps restant (si inférieur à 60 minutes) avant que le thermomètre se verrouille.

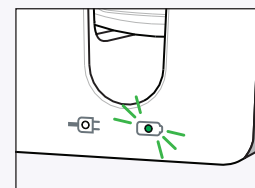Une fois le temps écoulé, l'icône de VERROUILLAGE  reste affichée.
- 

Voyant lumineux de charge
S'allume pour indiquer que les piles rechargeables sont en charge. Le voyant passe de l'orange au vert lorsque les piles sont complètement chargées.

Erreurs et notifications

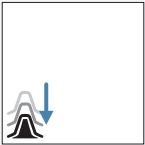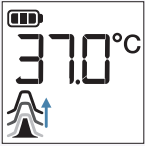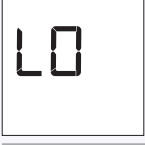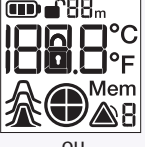Message d'erreur	Situation	Solution
	Aucun couvre-sonde n'est fixé (l'icône signalant qu'un couvre-sonde doit être fixé apparaît).	Fixez un nouveau couvre-sonde propre.
	Un couvre-sonde usagé est fixé (l'icône signalant qu'un couvre-sonde doit être remplacé apparaît).	Si vous devez prendre une nouvelle mesure de température, retirez le couvre-sonde en place et fixez un nouveau couvre-sonde propre.
	(POS = erreur de position) L'appareil de mesure à infrarouge ne permet pas de détecter une température stable. Aucune mesure ne peut être effectuée.	Pour réinitialiser le dispositif, changez le couvre-sonde. Demandez au patient de rester immobile. Vérifiez que la sonde est positionnée correctement et reste stable pendant que vous prenez à nouveau la température.
	La température ambiante ne correspond pas aux températures de fonctionnement autorisées (de 10 à 40 °C ou de 50 à 104 °F) ou varie trop rapidement.	Attendez 20 secondes jusqu'à ce que le thermomètre s'éteigne automatiquement, puis rallumez-le. Assurez-vous que le thermomètre et le patient restent pendant 30 minutes dans un environnement où la température se situe entre 10 °C et 40 °C (ou entre 50 °F et 104 °F).
	La température prise ne se situe pas dans la plage de températures habituelle observée chez l'homme.	Pour réinitialiser le dispositif, changez le couvre-sonde. Ensuite, assurez-vous que le thermomètre est inséré correctement et reprenez la température.
	La mention HI apparaît lorsque la température est supérieure à 42,2 °C (108 °F). La mention LO apparaît lorsque la température est inférieure à 20 °C (68 °F).	
	Erreur système (toutes les icônes s'affichent ou l'écran est vierge)	Attendez 20 secondes jusqu'à ce que le thermomètre s'éteigne automatiquement, puis rallumez-le.
	Si l'erreur persiste,	... réinitialisez le thermomètre en retirant les piles et en les remettant en place.
	Si l'erreur persiste toujours,	... les piles sont épuisées. Changez les piles.
	Si l'erreur persiste toujours,	... contactez le centre d'assistance ou le représentant Welch Allyn local.
	Le niveau des piles est faible, mais le thermomètre fonctionne toujours correctement.	Changez les piles.
	Le niveau des piles est trop faible et ne permet pas de prendre la température.	Changez les piles.


Facteurs affectant la précision de la mesure

Des facteurs externes peuvent influencer sur la température auriculaire, notamment :

Facteur	Influe sur la mesure	N'influe pas sur la mesure
Couvre-sonde usagé	✓	
Température ambiante		✓
Lentille mouillée/sale/abîmée	✓	
Prothèse auditive	✓	
Personne étendue sur un oreiller	✓	
Quantité modérée de cérumen (cire)		✓
Otite moyenne (infections de l'oreille)		✓
Tubes de tympanostomie		✓


Remarque : se référer à la rubrique maintenance et entretien du mode d'emploi si la lentille est sale ou insérée dans le conduit auditif sans couvre-sonde. Respecter les instructions de nettoyage du fabricant.

Remplacement des piles

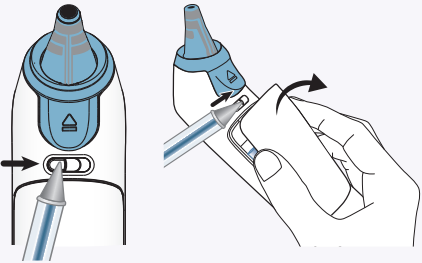


Remplacer les 2 piles alcalines AA lorsque commence à clignoter sur l'écran. 

Ouvrez le compartiment à piles
Ouvrez le compartiment à piles en faisant glisser le loquet vers la droite avec le doigt ou un objet pointu, comme un stylo. Tout en maintenant le loquet en position d'ouverture, saisissez le couvercle du compartiment à piles et retirez-le.

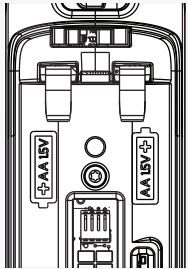

Retirer les 2 piles alcalines AA et les remplacer par 2 piles alcalines AA neuves, en s'assurant de la bonne orientation des pôles.

Refermez le couvercle du compartiment à piles en l'enclenchant et vérifiez que le loquet se replace en position verrouillée.

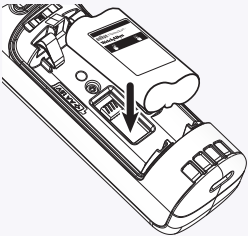

Piles rechargeables
Insérez les piles rechargeables dans le compartiment à piles. Leur étiquette doit être visible (tournée vers l'extérieur).

© 2019 Tous droits réservés. Ce produit est fabriqué sous licence de la marque « Braun ». « Braun » est une marque déposée de Braun GmbH, Kronberg, Allemagne
ThermoScan est une marque déposée appartenant à Helen of Troy Limited.

Fabriqué par:
Welch Allyn, Inc.
4341 State Street Road
Skaneateles Falls, NY 13153
USA



Welch Allyn Limited
Navan business Park
Dublin road,
Navan, County Meath
Republic of Ireland
C15 AW22

Fabriqué au Mexique

DIR 80025057
Date de révision : 05/2019