
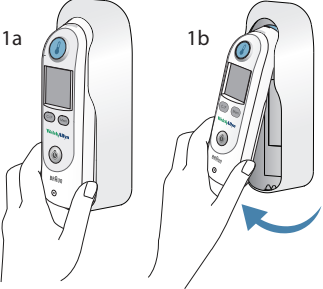
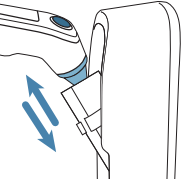



작동 및 방법

- 1a 1b

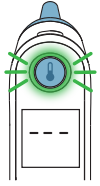


체온계 밀부분을 잡고 위로 들어올려 체온계를 크래들에서 분리합니다. 체온계가 자동으로 켜집니다. 프로브 커버 아이콘이 디스플레이에서 깜박이면 새 프로브 커버가 필요하다는 의미입니다.
- 

프로브 끝을 상자에 똑바로 밀어넣은 다음 체온계를 밖으로 당겨 새 프로브 커버를 부착합니다.
- 

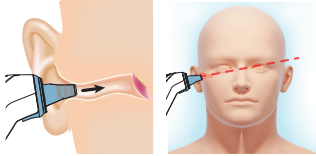준비 표시가 나타날 때까지 기다립니다. 측정 버튼의 테두리 원이 녹색으로 켜지고 체온계에서 신호음이 한 번 울리고 디스플레이에 세 개의 선이 나타나면 체온계가 준비된 것입니다.
- 

외이도에 꼭 맞게 프로브를 넣고 반대 관자놀이 방향으로 향하도록 합니다. 체온계 프로브가 외이도에서 움직이지 않도록 합니다. 프로브를 올바르게 넣어야 정확한 측정이 가능합니다.
- 

측정 버튼을 눌렀다 놓습니다. 체온계에서 신호음이 한 번 울리고 움직이는 대신 기호가 디스플레이에 나타난 다음 녹색 ExacTemp 표시등이 깜박입니다. 이는 프로브 위치가 일관적으로 유지된다는 의미입니다.
- 

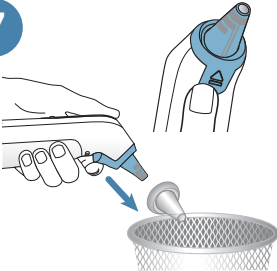온도를 측정합니다. 신호음이 길게 울리고 녹색 ExacTemp 표시등이 계속 켜진 상태로 유지되면 측정이 끝났다는 의미입니다. 온도가 디스플레이에 표시됩니다.
- 


프로브 커버 꺼내기 버튼 을 눌러 사용한 프로브 커버를 제거합니다.

정확한 측정을 위해 측정할 때마다 깨끗한 새 프로브 커버를 사용해야 합니다.


한 번 더 측정하려면 체온계에 깨끗한 새 프로브 커버를 부착해야 합니다.

추가 기능

- * C/F Mem

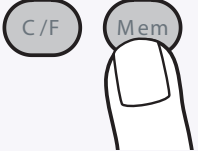


메모리
메모리 버튼을 눌러 마지막으로 측정된 온도를 표시합니다.
- * C/F Mem

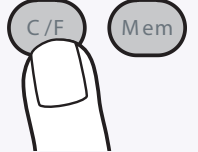

온도 변환
C/F 버튼을 눌렀다 놓으면 다른 온도 단위로 측정값이 일시적으로 표시됩니다. 이 버튼을 다시 누르면 기본 온도 단위로 돌아옵니다.


기본 온도 단위는 배터리함 안의 C/F 스위치로 설정할 수 있습니다.
- *

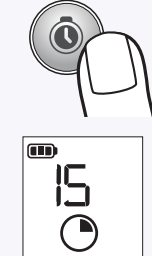


수동 타이머
버튼을 1초 동안 누르면 타이머가 활성화됩니다. 신호음이 타이머의 시작을 알립니다.

첫 15초가 완료될 때까지 첫 번째 세그먼트가 깜박인 다음 신호음이 납니다. (이 과정이 나머지 3개 세그먼트에도 반복됩니다.) 60초가 되면 신호음이 길게 울립니다. 마지막 세그먼트가 완료된 후 5초가 경과되면 체온계는 타이머 모드를 종료합니다.

언제든지 버튼을 다시 눌러 타이머를 종료할 수 있습니다.
- *



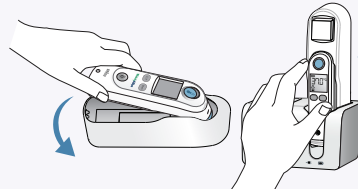


보안 및 충전
잠금 해제하려면 체온계를 충전 스테이션에 다시 놓거나 호환되는 활력징후 장치에 넣어야 합니다.

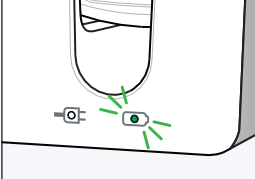보안 모드가 활성화된 경우 잠금 해제 아이콘이 나타나고 체온계가 잠기기 전 남은 시간(60분 미만인 경우)을 표시합니다. 시간이 다 경과되면 잠금 아이콘 이 디스플레이에 표시됩니다.
- 

충전 표시등
이 표시등이 켜져 있으면 충전식 배터리를 충전 중이라는 의미입니다. 배터리가 완전히 충전되면 표시등이 황색에서 녹색으로 바뀝니다.

오류 및 알림

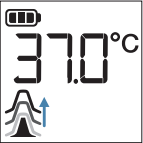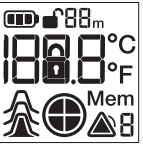오류 메시지	상황	해결책
	프로브 커버가 부착되지 않았습니다(애니메이션 켜짐).	깨끗한 새 프로브 커버를 부착합니다.
	사용한 프로브 커버를 부착했습니다(애니메이션 꺼짐).	온도 측정을 한 번 더 수행하는 경우 부착된 프로브 커버를 떼기하고 깨끗한 새 프로브 커버를 부착합니다.
	(POS = 위치 오류) 적외선 모니터가 온도 평형을 찾지 못하여 측정이 불가능합니다.	프로브 커버를 교체하여 재설정합니다. 새로 온도를 측정하는 동안 환자가 움직이지 않도록 하고 프로브의 위치를 올바른 상태로 안정적으로 유지합니다.
	주변 온도가 작동 허용 범위 (10 ~ 40°C 또는 50 ~ 104°F)를 벗어났거나 너무 급격하게 변합니다.	체온계가 자동으로 꺼질 때까지 20초 동안 기다린 다음 다시 켜니다. 환자와 체온계를 10°C ~ 40°C 또는 50°F ~ 104°F 의 온도가 유지되는 환경에 30분 동안 두어야 합니다.
	측정된 온도가 일반적인 체온 범위를 벗어났습니다. 온도가 42.2°C(108°F)보다 더 높은 경우 HI가 표시됩니다.	프로브 커버를 교체하여 재설정합니다. 그 다음, 체온계가 제대로 삽입되었는지 확인하고 새로 온도를 측정합니다.
	온도가 20°C(68°F)보다 낮은 경우 LO가 표시됩니다.	
	시스템 오류 (아이콘이 모두 표시되거나 표시되지 않음)	체온계가 자동으로 꺼질 때까지 20초 동안 기다린 다음 다시 켜니다.
	오류가 지속되면	… 배터리를 뺐다가 다시 끼워서 체온계를 재설정합니다.
	오류가 여전히 지속되면	… 배터리가 방전되었습니다. 새 배터리를 삽입합니다.
	오류가 여전히 지속되면	… 현지 Welch Allyn 서비스 센터 또는 담당자에게 문의합니다.
	배터리 수준이 낮지만 체온계를 올바르게 작동할 수 있습니다.	새 배터리를 삽입합니다.
	배터리 수준이 너무 낮아서 온도 측정이 불가능합니다.	새 배터리를 삽입합니다.


정확도에 영향을 주는 요인

다음과 같은 외부 요인은 귀 온도에 영향을 줄 수 있습니다.

요인	영향받음	영향받지 않음
사용한 프로브 커버	✓	
주변 온도		✓
젖거나 더럽거나 손상된 렌즈	✓	
보청기	✓	
베개를 베고 누워 있음	✓	
보통 양의 귀지		✓
중이염(귀 감염)		✓
고막 튜브		✓

참고: 렌즈가 더럽거나 프로브 커버 없이 외이도에 삽입된 경우 사용 지침의 정비 및 서비스
섹션을 참조하십시오. 제조업체가 명시한 대로 청소하십시오.


배터리 교체

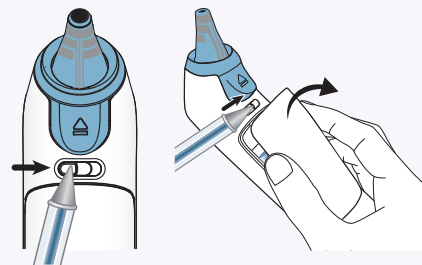

디스플레이에서 가 깜박이기 시작하면  AA
알카라인 배터리 2개를 교체합니다.


배터리 도어 열기

손가락 또는 펜과 같은 뾰족한 물체를 사용하여
스프링 래치를 오른쪽으로 밀고 배터리 도어를
열니다. 래치를 열기 위치로 잡은 상태로 배터리
도어를 잡고 분리합니다.

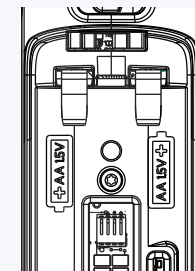

AA 알카라인 배터리 2개를 빼고 새 AA 알카라인
배터리 2개를 넣습니다. 이 때 양 극을 올바른
방향으로 삽입하십시오.

배터리 도어를 다시 닫고 래치가 원래 위치로
돌아가는지 확인합니다.

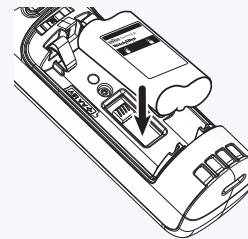

충전식 배터리 팩

배터리 라벨이 바깥쪽을 향하도록 배터리함에
충전식 배터리 팩을 삽입합니다.

© 2019 All rights reserved. 이 제품은 'Braun' 상표 라이선스에 따라 제조되었습니다.
'Braun'은 독일 크론베르크 소재 Braun GmbH의 등록 상표입니다.
ThermoScan은 Helen of Troy Limited가 소유한 등록 상표입니다.