




Darbība un mērīšana

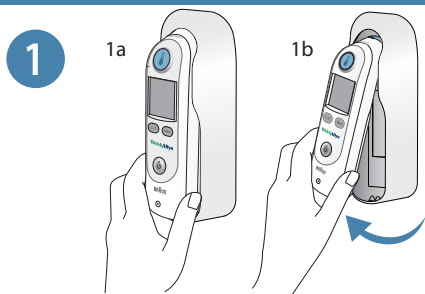


1 Izņemiet termometru no ietvara, satverot termometra pamatni un pagriežot to augšup. Termometrs automātiski ieslēgsies. Displejā iedegsies uzgaļa vāciņa ikona , norādot, ka nepieciešams jauns uzgaļa vāciņš.

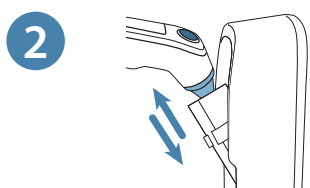

2 Piestipriniet jaunu uzgaļa vāciņu, stumjot uzgaļa galu taisni kastītē un pēc tam izvelkot termometru ārā.

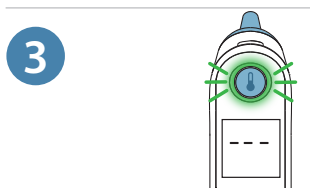

3 Gaidiet, kad tiks parādītas norādes, ka termometrs ir gatavs darbam. Aplītis ap MĒRĪŠANAS pogu  kļūst zaļš, termometrs raida vienu skaņas signālu un displejā tiek parādītas trīs līnijas, norādot, ka termometrs ir gatavs darbam.

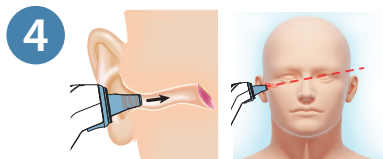


4 Stingri ievietojiet uzgali auss ejā un vērsiet to pret pretējās puses deniņiem. Stingri turiet termometra uzgali auss ejā. Lai iegūtu pareizus mērījumus, ir svarīgs pareizs uzgaļa novietojums.



5 Nospiediet un atlaidiet MĒRĪŠANAS pogu . Termometrs vienu reizi raidīs skaņas signālu, displejā tiks parādītas kustīgas svītrīņas un pēc tam iedegsies zaļa ExacTemp lampiņa, norādot uz pastāvīgu uzgaļa pozīciju.



6 Temperatūras mērījums. Garš skaņas signāls un pastāvīgi zaļa ExacTemp lampiņa norādis uz mērīšanas procedūras beigām. Displejā tiks parādīta temperatūra.

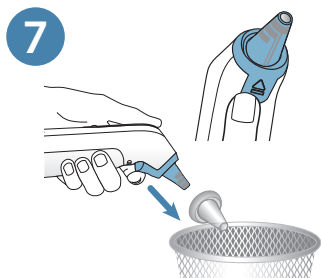


7 Noņemiet lietoto uzgaļa vāciņu, nospiežot uzgaļa vāciņa izgrūdēja pogu .

Lai panāktu precīzus mērījumus, izmantojiet jaunu, tīru uzgaļa vāciņu katram mērījumam.

Lai veiktu vēl vienu mērījumu, uzlieciet termometram jaunu, tīru uzgaļa vāciņu.

Papildu funkcijas

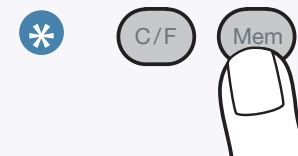

Atmiņa


Nospiediet ATMIŅAS pogu, lai parādītu pēdējo izmērīto temperatūras rādījumu.



Temperatūras pārvēršana

Nospiediet un atlaidiet pogu C/F, lai uz laiku skatītu mērījumu mainīgā temperatūras skalā. Nospiediet pogu vēlreiz, lai atgrieztos noklusējuma temperatūras skalā.

Noklusējuma temperatūras skalu var iestatīt ar slēdzi C/F, kas atrodas bateriju nodalījuma iekšpusē.

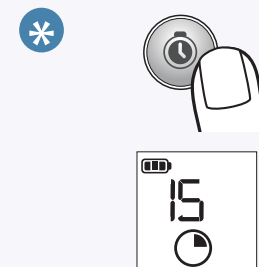


Manuāls taimeris

Nospiediet un turiet pogu  vienu sekundi, lai aktivizētu taimeri. Uzsākot taimera darbību, var dzirdēt skaņas signālu.


Pirmais segments mirgos, kamēr būs pagājušas pirmās 15 sekundes, un pēc tam atskanēs skaņas signāls. (Atkārtojas 3 atlikušajiem segmentiem.) Pēc 60 sekundēm atskanēs garš skaņas signāls. Termometram tiks izslēgts taimera režīms, kad būs pagājušas 5 sekundes pēc pēdējā segmenta.

Taimera darbību var pārtraukt jebkurā laikā, atkārtoti nospiežot pogu .

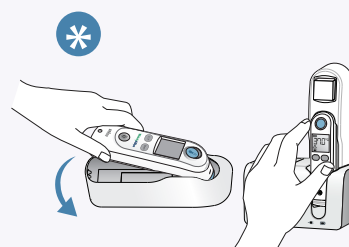


Drošība un uzlāde

Lai ATBLOKĒTU, termometrs jāatgriež uzlādes stacijā vai saderīgā dzīvībai svarīgo funkciju mērīšanas ierīcē.

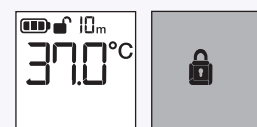

ATBLOKĒŠANAS ikona  tiek parādīta, kad ir aktīvs Drošības režīms un tiek skaitīts atlikušais laiks (ja mazāk par 60 minūtēm) pirms termometra bloķēšanas.



Kad laiks ir pagājis, BLOKĒŠANAS ikona  paliek displejā.

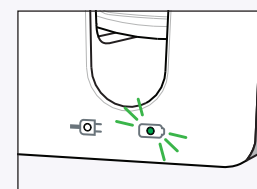

Uzlādes lampiņas indikators

Iedegas, norādot, ka tiek lādēta uzlādējamā baterija.

Indikatora krāsa mainās no dzeltenas uz zaļu, kad baterija ir pilnībā uzlādēta.

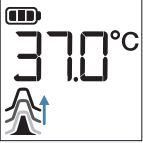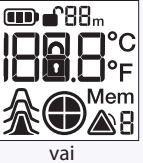
Kļūdas ziņojums	Situācija	Risinājums
	Nav piestiprināts uzgaļa vāciņš (IESLĒGTA animācija).	Piestipriniet jaunu, tīru uzgaļa vāciņu.
	Piestiprināts lietots uzgaļa vāciņš (IESLĒGTA animācija).	Izmetiet uzlikto uzgaļa vāciņu un piestipriniet jaunu, tīru uzgaļa vāciņu, ja veicat jaunu temperatūras mērījumu.
	(POS = pozīcijas kļūda) Infrasarkanais monitors nevar noteikt temperatūras līdzsvaru un neļauj veikt mērījumu.	Nomainiet uzgaļa vāciņu, lai atiestatītu. Ierobežojiet pacienta kustības un nodrošiniet pareizu uzgaļa pozīciju, kas tiek stabili saglabāta, kamēr tiek veikts jauns temperatūras mērījums.
	Apkārtējās vides temperatūra nav pieļaujamā darba diapazonā (50–104 °F vai 10–40 °C) vai mainās pārāk strauji.	Uzgaidiet 20 sekundes, līdz termometrs automātiski izslēdzas, pēc tam to atkārtoti ieslēdziet. Nodrošiniet, lai termometrs un pacients 30 minūtes būtu vidē, kurā temperatūra ir diapazonā no 50 °F līdz 104 °F jeb no 10 °C līdz 40 °C.
	Izmērītā temperatūra neatbilst parastam cilvēka temperatūras diapazonam. HI tiks parādīts, ja temperatūra pārsniedz 108 °F (42,2 °C).	Nomainiet uzgaļa vāciņu, lai atiestatītu. Pēc tam pārliecinieties, ka termometrs ir pareizi ievietots, un veiciet jaunu temperatūras mērījumu.
	LO tiks parādīts, ja temperatūra būs zemāka nekā 68 °F (20 °C).	
	Sistēmas kļūda (Displejā tiek parādītas visas ikonas, vai displejs ir tukšs)	Uzgaidiet 20 sekundes, līdz termometrs automātiski izslēdzas, pēc tam to atkārtoti ieslēdziet.
	Ja kļūda netiek novērsta,	... atiestatiet termometru, izņemot baterijas un ievietojot tās atpakaļ.
	Ja kļūda joprojām netiek novērsta,	... baterijas ir tukšas. Ievietojiet jaunas baterijas.
	Ja kļūda joprojām netiek novērsta,	... sazinieties ar vietējo Welch Allyn apkalpošanas centru vai pārstāvi.
	Zems bateriju uzlādes līmenis, tomēr termometrs joprojām pareizi darbosies.	Ievietojiet jaunas baterijas.
	Bateriju uzlādes līmenis ir pārāk zems, lai varētu izmērīt temperatūru.	Ievietojiet jaunas baterijas.

Ārēji faktori var ietekmēt auss temperatūru, tostarp:

Faktors	Ietekmē	Neietekmē
Lietots uzgaļa vāciņš	✓	
Apkārtējās vides temperatūra		✓
Mitra / netīra / bojāta lēca	✓	
Dzirdes aparāts	✓	
Gulēšana uz spilvena	✓	
Mērens daudzums ausu sēra		✓
Vidusauss iekaisums (auss infekcijas)		✓
Timpanostomijas caurulītes		✓


Piezīme. Ja lēca ir netīra vai ir ievietota auss ejā bez uzgaļa vāciņa, skatiet lietošanas pamācības sadaļu par ekspluatāciju un apkopi. Tiriet tikai tā, kā norādījis ražotājs.

Bateriju nomainīšana

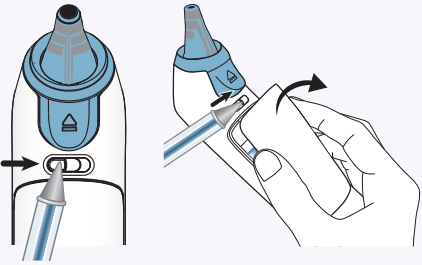


Nomainiet 2 AA sārma baterijas, kad  sāk mirgot displejā.

Bateriju nodalījuma vāciņa atvēršana
Atveriet bateriju nodalījuma vāciņu, ar pirkstu vai spicu objektu, piemēram, pildspalvu, pabīdot fiksatoru ar atsperi uz labo pusi. Turot fiksatoru atvērtā pozīcijā, satveriet bateriju nodalījuma vāciņu un noņemiet.

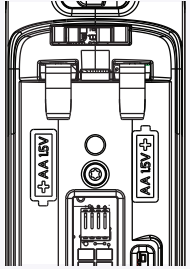

Izņemiet 2 AA sārma baterijas un nomainiet ar 2 jaunām AA sārma baterijām, pārliecinoties, lai poli būtu pareizā virzienā.

Ievietojiet bateriju nodalījuma vāciņu vietā un pārliecinieties, ka fiksators atgriežas sākotnējā fiksatora pozīcijā.

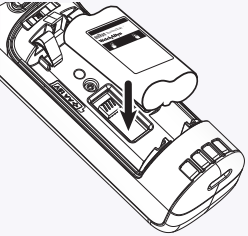

Uzlādējamu bateriju komplekts
Ievietojiet uzlādējamu bateriju komplektu bateriju nodalījumā ar bateriju etiķeti uz ārpusi.