




Veikimas ir technika

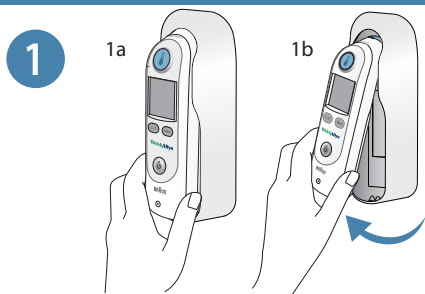


1 Išimkite termometrą iš laikyklės suimdami termometro pagrindą ir apsukdami jį į viršų. Termometras įsijungs automatiškai. Jei reikia naujo zondo dangtelio, ekrane mirksi zondo dangtelio piktograma 🦠.

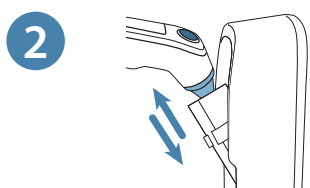

2 Uždėkite naują zondo dangtelį įspausdami zondo antgalį tiesiai į dėžutę, tada ištraukite termometrą.

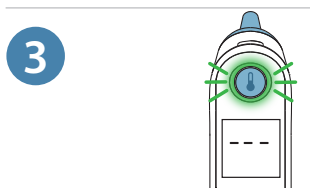

3 Palaukite, kol termometras bus paruoštas. Ratas aplink MATAVIMO mygtuką užsidega žaliai, termometras vieną kartą pypteli ir ekrane pasirodo trys eilutės, rodančios, kad termometras yra paruoštas.

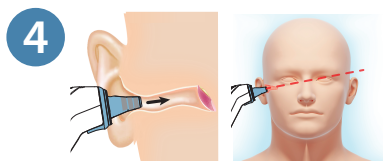


4 Švelniai įstatykite zondą į ausies kanalą tiesiai priešingo smilkinio link. Tvirtai laikykite termometro zondą ausies kanale. Norint gauti tikslius matavimo rezultatus, būtina zondą įstatyti tinkamai.



5 Nuspauskite ir atleiskite MATAVIMO mygtuką. Termometras vieną kartą pypteli, ekrane pasirodo bėgantys brūkšneliai, tada užsidega žalias „ExacTemp“ šviesos signalas, rodantis tinkamą zondo padėtį.



6 Temperatūros matavimas. Ilgas pyptelėjimas ir pastoviai šviečiantis žalias „ExacTemp“ šviesos signalas nurodo, kad matavimo procedūra užbaigta. Temperatūra rodoma ekrane.

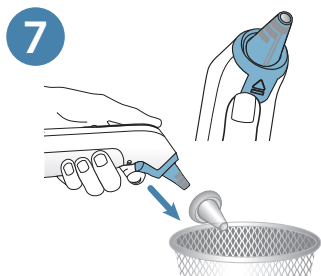


7 Nuimkite naudotą zondo dangtelį paspaudę zondo dangtelio išmetiklio mygtuką 🗑️.

Norėdami gauti tikslius matavimo rezultatus, kiekvieną kartą naudokite naują, švarų zondo dangtelį.

Atlikdami kitą matavimą, uždėkite ant termometro naują, švarų zondo dangtelį.

Papildomos funkcijos

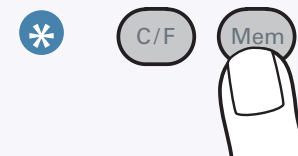


Atmintis
Spauskite ATMINTIES mygtuką, kad peržiūrėtumėte paskutinį užbaigtą temperatūros matavimą.



Temperatūrų konvertavimas
Paspauskite ir atleiskite C / F mygtuką, kad laikinai matytumėte matavimą pakaitinėje temperatūros skalėje. Dar kartą paspauskite mygtuką, kad grįžtumėte į numatytąją temperatūros skalę.


Numatytąją temperatūros skalę galima nustatyti naudojant C / F jungiklį, esantį baterijų skyriaus viduje.

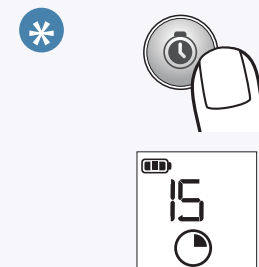


Rankinis laikmatis
Paspauskite ir vieną sekundę palaikykite laikmatį mygtuką, kad įjungtumėte laikmatį. Paleidus laikmatį pasigirsta pyptelėjimas.

Pirmasis segmentas mirksi, kol bus baigiasi pirmosios 15 sekundžių, tada pasigirsta pyptelėjimas. (Kartojama 3 likusiems segmentams.) Po 60 sekundžių nuskamba ilgas pyptelėjimas. Termometras išjungs laikmačio režimą po 5 sekundžių po paskutiniojo segmento.

Laikmatį išjungti galite bet kuriuo metu dar kartą paspaudę laikmatį mygtuką.

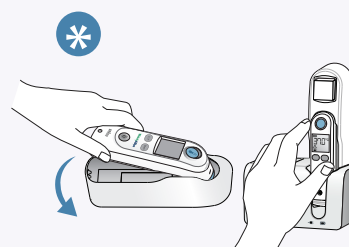


Sauga ir įkrovimas
Norėdami ATRAKINTI, grąžinkite termometrą į įkrovimo stotį arba suderinamą gyvybės požymių įrenginį.

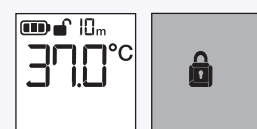



Rodoma ATRAKINIMO piktograma, kai aktyvus apsaugos režimas ir skaičiuojamas likęs laikas (jei jis neviršija 60 minučių) iki termometro užrakinimo.

Pasibaigus laikui, ekrane lieka UŽRAKINIMO piktograma.

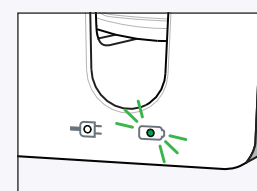

Įkrovimo šviesos indikatorius
Šviečia, kai kraunama įkraunamoji baterija. Kai baterija visiškai įkrauta, indikatorius gintarinės spalvos šviesa pasikeičia į žalią.

Klaidos ir pranešimai

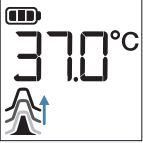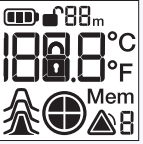Klaidos pranešimas	Situacija	Sprendimas
	Neuždėtas zondo dangtelis (juda signalas „JUNGTA“).	Uždėkite naują, švarų zondo dangtelį.
	Uždėtas naudotas zondo dangtelis (juda signalas „IŠJUNGT“).	Prieš atlikdami kitą temperatūros matavimą, išmeskite esamą ir uždėkite naują, švarų zondo dangtelį.
	(POS = padėties klaida) Infraraudonųjų spindulių stebėjimo įrenginys neranda temperatūros pusiausvyros, todėl matavimas negalimas.	Pakeiskite zondo dangtelį, kad atstatytumėte. Apribokite paciento judėjimą ir įsitikinkite, kad atliekant naują temperatūros matavimą zondas įstatytas tinkamoje padėtyje ir išlieka stabilus.
	Aplinkos temperatūra yra už leistino veikimo diapazono ribų (50 – 104 °F arba 10 – 40 °C) arba per greitai keičiasi.	Palaukite 20 sekundžių, kol termometras išsijungs automatiškai, tada vėl įjunkite. Įsitikinkite, kad termometras ir pacientas 30 minučių yra aplinkoje, kurios temperatūra yra nuo 50 iki 104 °F arba nuo 10 iki 40 °C.
	Pamatuota temperatūra yra už įprastos žmogaus temperatūros diapazono ribų. Jei temperatūra viršija 108 °F (42,2 °C) ekrane rodomas simbolis „HI“.	Pakeiskite zondo dangtelį, kad atstatytumėte. Tada įsitikinkite, kad termometras tinkamai įstatytas ir atlikite naują temperatūros matavimą.
	Jei temperatūra yra mažesnė negu 68 °F (20 °C) ekrane rodomas simbolis „LO“.	
	Sistemos klaida (Rodomos visos piktogramos arba tuščias ekranas)	Palaukite 20 sekundžių, kol termometras išsijungs automatiškai, tada vėl įjunkite.
	Jei klaida išlieka,	... atstatykite termometrą, išimdami ir vėl įstatydami baterijas.
	Jei klaida išlieka,	... baterijos tuščios. Įdėkite naujas baterijas.
	Jei klaida išlieka,	... susisiekite su vietiniu „Welch Allyn“ techninės priežiūros centru arba atstovu.
	Baterijos įkrova maža, tačiau termometras vis dar veikia tinkamai.	Įdėkite naujas baterijas.
	Baterijos įkrova per maža, kad būtų galima atlikti temperatūros matavimą.	Įdėkite naujas baterijas.


Kas daro poveikį tikslumui

Išoriniai veiksniai, galintys paveikti ausies temperatūrą, yra šie:

Veiksny	Veikia	Neveikia
Naudotas zondo dangtelis	✓	
Aplinkos temperatūra		✓
Drėgnas / nešvarus / pažeistas lęšis	✓	
Klausos aparatas	✓	
Gulėjimas ant pagalvės	✓	
Vidutinis ausų vaško kiekis		✓
Vidurinės ausies uždegimas (ausies infekcijos)		✓
Ausų būgnelio praplovimo vamzdeliai		✓


Pastaba: Jei lęšis yra purvinas arba įdėtas į ausies kanalą be zondo dangtelio, žr. naudojimo instrukcijų skyrių „Techninė priežiūra“. Valykite tik taip, kaip nurodyta gamintojo.

Baterijų keitimas

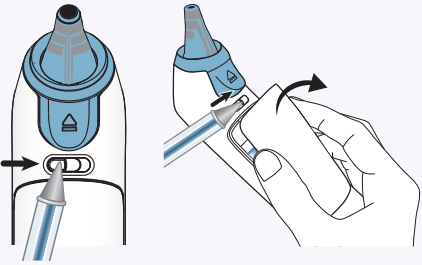


Pakeiskite 2 AA tipo šarmines baterijas, kai pradeda mirksėti ekrane.

Baterijos dangtelio atidarymas
Atidarykite baterijos dangtelį, paslinkę spyruoklinį skląstį į dešinę pirštu arba smailiu objektu, pvz., rašikliu. Laikydami skląstį atvertą, suimkite baterijų dangtelį ir ištraukite jį.

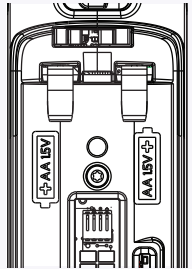

Išimkite 2 AA tipo šarmines baterijas ir pakeiskite 2 naujomis AA tipo šarminėmis baterijomis; įsitikinkite, kad poliai įstatyti teisinga kryptimi.

Įstatykite baterijų dangtelį atgal ir įsitikinkite, kad skląstis grįžo į pradinę fiksavimo padėtį.

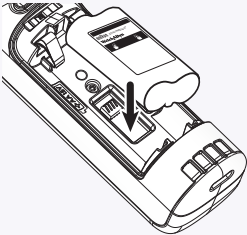

Įkraunamų baterijų pakuotė
Įdėkite įkraunamų baterijų pakuotę į baterijų skyrių taip, kad baterijos etiketė būtų viršuje.

© 2019 Visos teisės saugomos. Šis gaminys gaminamas pagal „Braun“ prekės ženklo licenciją. „Braun“ yra registruotasis „Braun GmbH“ prekės ženklas, Kronbergas, Vokietija. „ThermoScan“ yra registruotasis prekės ženklas, priklausantis „Helen of Troy Limited“.