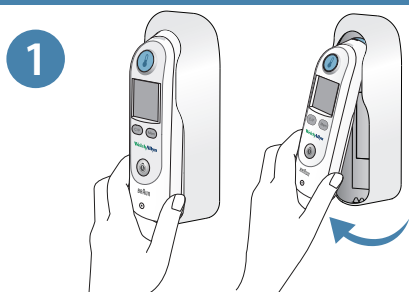
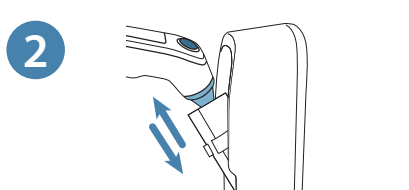
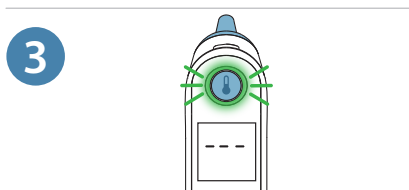
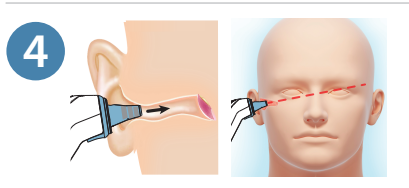


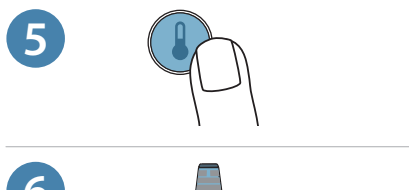
Bruk og teknikk

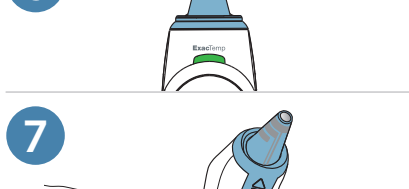
- 

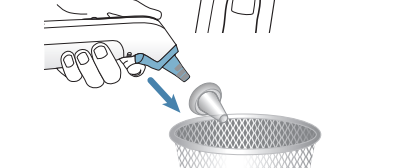
Fjern termometeret fra holderen ved å gripe nederst på termometeret og vippe opp.
Termometeret slår seg på automatisk. Sondehette-ikonet  vil blinke på skjermen og indikere at det trengs en ny sondehette.
- 

Fest en ny sondehette ved å skyve sondespissen rett inn i boksen, og trekk deretter termometeret ut.
- 

Vent på klarindikasjon. Ring rundt MÅLE -knappen blir grønn, termometeret piper én gang og tre linjer på skjermen indikerer at termometeret er klart.
- 

Sett sonden tet inn i øregangen og før den mot motsatt tinning. Hold termometersonden stødig i øregangen. Riktig sondeplassering er avgjørende for nøyaktige målinger
- 

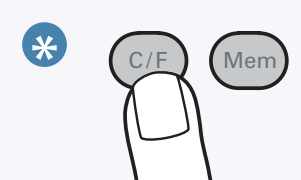
Trykk på og slipp MÅLE -knappen.
Termometeret vil pipe én gang, løpende tankestreker vil vises på displayet, deretter vil det grønne ExacTemp-lyset blinke og indikere konsekvent sondestilling.
- 

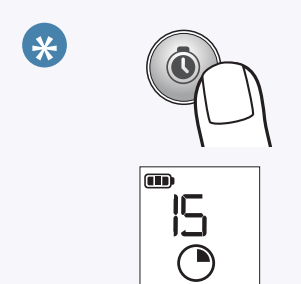
Temperaturmåling. Et langt pip og et fast, grønt ExacTemp-lys vil angi slutten på måleprosessen. Temperaturen vises på displayet.
- 

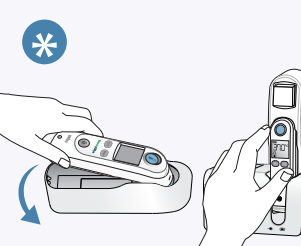
Fjern den brukte sondehette ved å trykke på knappen for utløsning av sondehette .
Bruk en ny, ren sondehette for hver måling, for å oppnå nøyaktige målinger.
Sett en ny, ren sondehette på termometeret for å ta en ny måling.

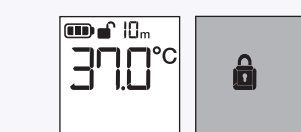
Ytterligere funksjoner

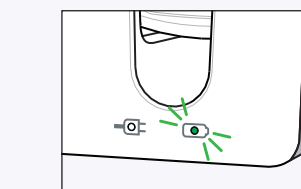
- 

Minne
Trykk på MINNE-knappen for å vise den sist fullførte temperaturen.
- 

Temperaturomregning
Trykk på C/F-knappen og slipp for å midlertidig vise målingen i den alternative temperaturskalaen. Trykk på knappen igjen for å gå tilbake til standard temperaturskala.
Standard temperaturskala kan bli innstilt med C/F-bryteren som sitter inne i batterikammeret.
- 

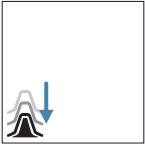
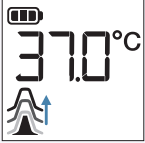
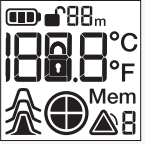
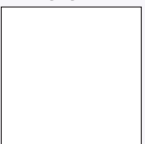
Manuell tidsgiver
Trykk og hold nede -knappen i ett sekund for å aktivere tidsgiveren. Det høres et pip ved igangsettingen av tidsgiveren.
Første segment vil blinke i femten sekunder og deretter pipe. (Gjentas for de 3 gjenværende segmentene.) Ved 60 sekunder lyder en lang pipelyd. Termometeret vil gå ut av tidsgivermodus 5 sekunder etter siste segment.
Du kan gå ut av tidsgiver når som helst ved å trykke på -knappen igjen.
- 

Sikkerhet og lading
For å LÅSE OPP må termometeret bli returnert til ladestasjonen eller en kompatibel enhet for vitale tegn.
- 

LÅSE OPP -ikonet vises når sikkerhetsmodus er aktiv og teller gjenværende tid (hvis under 60 minutter) før termometeret blir låst.
Når tiden utløper, forblir LÅS ikon  på displayet.
- 

Ladelys-indikator
Lyser opp for å indikere at det oppladbare batteriet blir ladet. Indikatoren endrer seg fra gul til grønn når batteriet er fullstendig ladet.

Feil og varsler

Feilmelding	Situasjon	Løsning
	Det er ikke festet noen sondehette (animerer PÅ)	Sett på ny, ren sondehette.
	En brukt sondehette er festet (animerer AV)	Kast sondehetten som er på og fest en ny, ren sondehette hvis du skal foreta en ny temperaturmåling.
	(POS = posisjonsfeil) Den infrarøde monitoren finner ikke temperaturlikevekt og måling er ikke mulig.	Bytt sondehetten for å nullstille. Begrens pasientens bevegelse og påse at sonden er riktig plassert og holder seg stabil mens du tar ny temperatur.
	Omgivelsestemperaturen er ikke innenfor tillatt driftsområde (10–40 °C eller 50–104 °F) eller endres for raskt.	Vent 20 sek. til termometeret slås automatisk av, og slå det så på igjen. Påse at termometeret og pasienten er i omgivelser i 30 minutter der temperaturen er mellom 10 °C og 40 °C eller 50 °F og 104 °F.
	Den målte temperaturen er ikke innenfor typisk område for menneskelig temperatur. HI vises når temperaturen er over 42,2 °C (108 °F).	Bytt sondehette for å nullstille. Pass deretter på at termometeret er satt ordentlig inn og ta en ny temperatur.
	LO vises når temperaturen er under 20°C (68°F).	
	Systemfeil (Alle ikoner vises eller skjermen er tom)	Vent 20 minutter til termometeret slås automatisk av, og slå det så på igjen.
	Hvis feilen ikke er avklart,	... nullstill termometeret ved å ta ut batteriene og sette dem inn igjen.
	Hvis feilen fortsatt ikke er avklart,	... Batteriene er utladet Sett inn nye batterier.
	Hvis feilen fortsatt ikke er avklart,	... kontakt det lokale Welch Allyn servicesenteret eller -representanten.
	Batterinivået er for lavt til å kunne foreta korrekt temperaturmåling.	Sett inn nye batterier.
	Batterinivået er for lavt til å kunne foreta korrekt temperaturmåling.	Sett inn nye batterier.

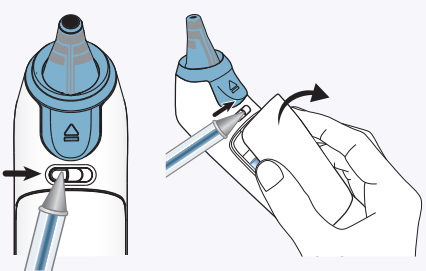
Hva innvirker på nøyaktighet

Eksterne faktorer kan innvirke på øretemperatur, inkludert:

Faktor	Påvirket	Ikke påvirket
Brukt sondelokk	✓	
Romtemperatur		✓
Våte/skitne/skadde linser	✓	
Høreapparat	✓	
Ligge på en pute	✓	
Moderat ørevoks		✓
Otitis media (ørebetennelse)		✓
Tympanostomirør		✓

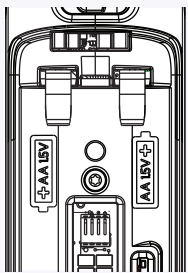
Merk: Hvis linsen er skitten eller er innsatt i ørekanalen uten sondelokk, se avsnittet for vedlikehold og service i bruksanvisningen. Må kun rengjøres som spesifisert av fabrikanten.

Skifte batterier



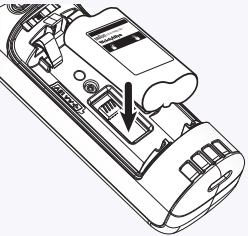
Skift 2 AA alkaliebatterier når  begynner å blinke på displayet.

Åpne batteridøren
Åpne batteridøren ved å skyve fjærlåsen til høyre ved å bruke fingeren eller en spiss gjenstand slik som en penn. Mens du holder låsen i den åpne stillingen, grip batteridøren og fjern den.



Fjern de 2 AA alkaliebatteriene og erstatt dem med 2 nye AA alkaliebatterier, og vær sikker på at polene er i riktig retning.

Skyv batteridøren tilbake til den knepper på plass.



Oppladbare batterier
Plasser batteriet ved å følge batteriikonene inne i batterikammeret.