



Delovanje in tehnika

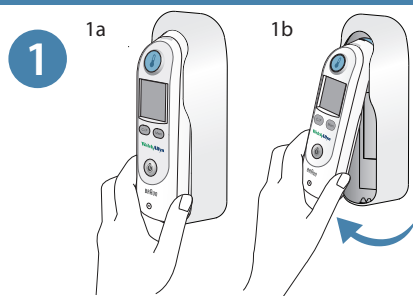


Termometer vzemite iz nosilca, tako da ga primete ob vznožju in zavrtite navzgor.
Termometer se samodejno vklopi. Na prikazovalniku začne utripati ikona nastavka , kar pomeni, da potrebujete nov nastavek.

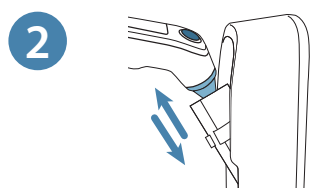

Pritrdite nov nastavek, tako da konico sonde potisnete naravnost v škatlico, nato pa termometer vzamete ven.



Počakajte na znak za pripravljenost.
Obroček okrog gumba za MERJENJE  zasveti zeleno, termometer enkrat zapiska in na prikazovalniku se pojavijo tri črtice, kar pomeni, da je termometer pripravljen.

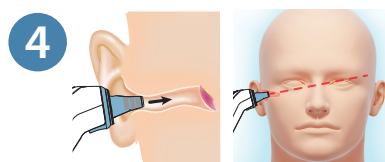


Sondo tesno prilegajoče se namestite v sluhovod in usmerite proti nasprotnim sencam.
Termometer v sluhovodu držite pri miru. Pravilna namestitev sonde je bistvenega pomena za natančno merjenje.



Gumb za MERJENJE  pritisnite in spustite.
Termometer enkrat zapiska, na prikazovalniku se pojavijo premikajoče se črtice, nato zasveti lučka ExacTemp. To pomeni, da je sonda v stabilni legi.




Merjenje temperature. Dolg pisk in stalna zelena lučka ExacTemp pomenita, da je meritev opravljena. Temperatura se prikaže na prikazovalniku.

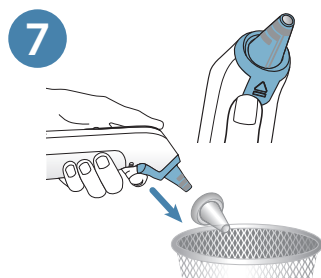


Uporabljeni nastavek odstranite, tako da pritisnete na gumb za sprostitve nastavka .
Da boste opravili natančne meritve, pri vsakem merjenju temperature pritrdite nov, čist nastavek.
Če želite ponovno izmeriti temperaturo, na termometer namestite nov, čist nastavek.


Dodatne funkcije

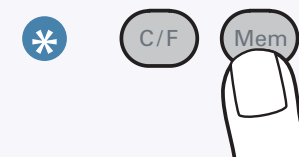


Spomin
S pritiskom na gumb za SPOMIN se prikaže zadnja opravljena temperaturna meritev.

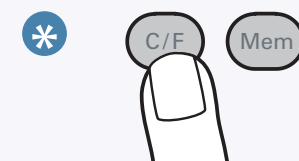


Pretparjanje temperature
Pritisnite in sprostite gumb **C/F**, da se začasno pokaže temperatura v drugi merski enoti. S ponovnim pritiskom na gumb se vrnete na privzeto temperaturno lestvico.
Privzeta temperaturna lestvica se lahko nastavi s preklopom stikala C/F, ki je v prostoru za baterije.

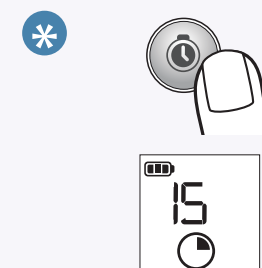

Ročni odštevalnik
Pritisnite in držite gumb  eno sekundo, da aktivirate odštevalnik. Na začetku odštevanja se zasliši pisk.
Prvi segment bo utripal prvih 15 sekund., nato bo se bo zaslišal pisk. (Se ponovi za preostale 3 segmente.) Pri 60 sekundah se zasliši dolg pisk. Način odštevanja v termometru preneha 5 sekund po zadnjem segmentu.
Odštevalnik lahko zapustite kadarkoli s ponovnim pritiskom na tipko .

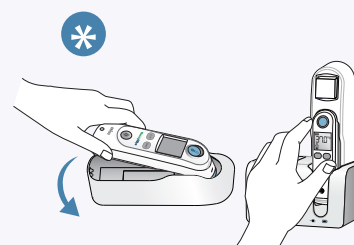


Varnost in polnjenje
Če želite **ODKLENITI** termometer, ga morate vrniti v polnilno postajo ali v združljivo napravo za nadzor vitalnih znakov.

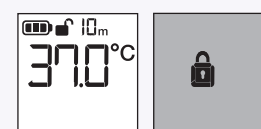

Ikona **ODKLENJENO**  se prikaže, kadar je varnostni način aktiven in odštevajo preostali razpoložljiv čas (če je pod 60 minut), dokler se termometer ne zaklene.

Ko čas poteče, ikona **ZAKLENJENO**  ostane na prikazovalniku.

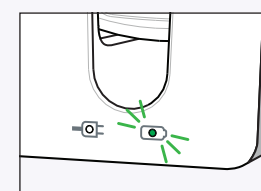

Lučka za prikaz polnjenja
Kadar sveti, prikazuje da se akumulatorska baterija polni. Lučka spremeni barvo iz oranžne v zeleno, ko je baterija napolnjena.

Napake in opozorila

Sporočilo o napaki	Položaj	Rešitev
	Nastavek ni nameščen (animacija NAMESTITE).	Pritrdite nov, čist nastavek.
	Nameščen je uporabljen nastavek (animacija SNEMITE).	Zavržite nastavek, ki je trenutno nameščen, in pritrdite novega, čistega, če boste ponovno merili temperaturo.
	(POS = napaka položaja) Infrardeči monitor ne najde temperaturnega ravnovesja, zato meritev ni mogoča.	Za ponastavitev zamenjajte nastavek. Omejite bolnikovo gibanje in poskrbite, da je lega sonde pravilna in med merjenjem stabilna.
	Okoljska temperatura ni znotraj dovoljenega delovnega razpona (10–40 °C ali 50–104 °F) ali pa se prehitro spreminja.	Počakajte 20 sekund, da se termometer samodejno izklopi, nato ga znova vklopite. Termometer in bolnik morata biti 30 minut v okolju s temperaturo med 10 in 40 °C oziroma med 50 in 104 °F.
	Izmerjena temperatura ni znotraj tipičnega temperaturnega razpona za človeka. Če je temperatura nad 42,2 °C (108 °F), se prikaže napis HI.	Za ponastavitev zamenjajte nastavek. Nato preverite, da je termometer pravilno vstavljen, in temperaturo ponovno izmerite.
	Če je temperatura pod 20 °C (68 °F), se prikaže napis LO.	
	Sistemska napaka (Prikažejo se vse ikone ali pa je prikazovalnik prazen)	Počakajte 20 sekund, da se termometer samodejno izklopi, nato ga znova vklopite.
	Če napake ne odpravite,	... ponastavite termometer, tako da vzamete iz njega baterije in jih nato znova vstavite.
	Če napake še vedno ne odpravite,	... so baterije povsem prazne. Vstavite nove baterije.
	Če napake še vedno ne odpravite,	... se obrnite na lokalni servisni center ali zastopnika družbe Welch Allyn
	Baterije so skoraj prazne, vendar bo termometer še vedno deloval pravilno.	Vstavite nove baterije.
	Baterije so preveč prazne, da bi termometer lahko izmeril temperaturo.	Vstavite nove baterije.


Kaj vpliva na točnost

Na ušesno temperaturo lahko vplivajo tudi zunanji dejavniki, med njimi naslednji:

Dejavnik	Vpliva	Ne vpliva
Uporabljen nastavek	✓	
Temperatura okolja		✓
Mokra/umazana/poškodovana leča	✓	
Slušni aparat	✓	
Ležanje na blazini	✓	
Zmerna količina cerumna (ušesnega masla)		✓
Vnetje srednjega ušesa (ušesne okužbe)		✓
Timpanalne cevke		✓

Opomba: Če je leča umazana ali je vstavljena v slušni kanal brez pokrova sonde, pogledajte poglavje o vzdrževanju in popravilu v navodilih za uporabo. Čistite samo v skladu z navodili proizvajalca.


Menjava baterij

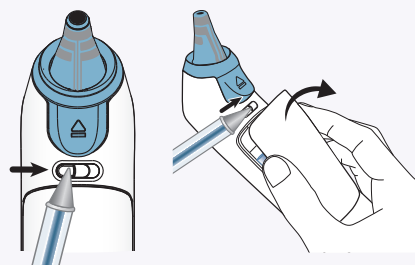

Zamenjajte alkalni bateriji tipa AA, kadar prične na prikazovalniku utripati


Odprite pokrovček za baterije

Odprite pokrovček za baterije, tako da vzmetno zapiralo s prstom ali koničastim predmetom, na primer kemičnim svinčnikom, potisnete na desno. Zapiralo držite odprto, primite pokrovček za baterije in ga odstranite.

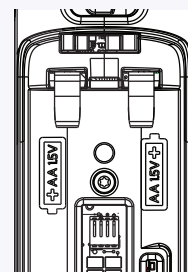

Odstranite 2 alkalni bateriji tipa AA in jih zamenjajte z 2 novima alkalnima baterijama tipa AA, pri čemer pazite, da so poli v pravi smeri.

Pokrovček za baterije namestite nazaj in preverite, da je zapiralo v legi zapiranja.

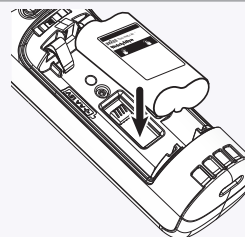

Baterije za ponovno polnjenje

Komplet baterij za ponovno polnjenje vstavite v prostor za baterije, tako da je oznaka baterij obrnjena navzven.

© 2019 Vse pravice pridržane. Ta izdelek je izdelan po licenci blagovne znamke "Braun". "Braun" je registrirana blagovna znamka družbe Braun GmbH, Kronberg, Nemčija. ThermoScan je registrirana blagovna znamka v lasti družbe Helen of Troy Limited.



Proizvajalec:
Welch Allyn, Inc.
4341 State Street Road
Skaneateles Falls, NY 13153
USA



Welch Allyn Limited
Navan business Park
Dublin road,
Navan, County Meath
Republic of Ireland
C15 AW22

Proizvedeno v Mehiki

DIR 80025071
Revidirano: 2019-05

BRAUN

WelchAllyn®