



Användning och teknik

- 1** 1a 1b

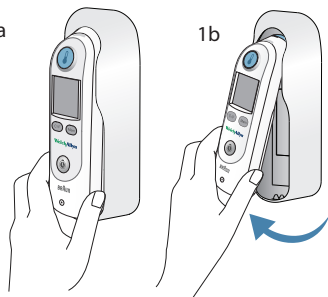


Ta bort termometern från hållaren genom att ta tag i termometern i nederdelen och vrida den uppåt. Termometern slås på automatiskt. Ikonen för probskydd  blinkar på displayen vilket betyder att det behövs ett nytt probskydd.
- 2**

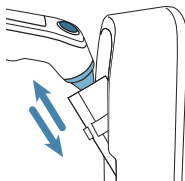

Fäst ett nytt probskydd genom att trycka in probspetsen direkt i lådan och sedan dra ut termometern.
- 3**




Vänta på indikationen klar. Ringen runt knappen MÄTNING  blir grön, termometern piper en gång och tre linjer på displayen visar att termometern är klar.
- 4**

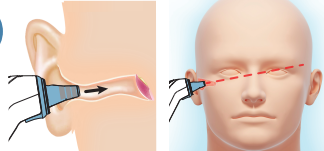


Placera proben tätt i hörselgången och riktad mot motsatt tinning. Håll termometern stilla i hörselgången. Korrekt probplacering är mycket viktigt för korrekta mätningar.
- 5**



Tryck in och släpp knappen MÄTNING . Termometern piper en gång, streck i rörelse visas på displayen och sedan blinkar den gröna ExacTemp-lampan, vilket indikerar konsekvent probposition.
- 6**

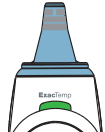

Temperaturmätning. Ett långt pip och en grön ExacTemp-lampa som lyser med fast sken signalerar att mätprocessen är slutförd. Temperaturen visas på displayen.
- 7**

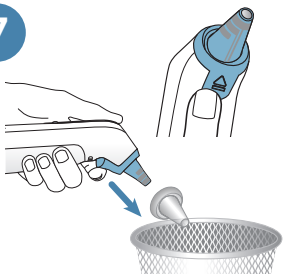


Ta bort använt probskydd genom att trycka in knappen Probskyddsejektor .

För att uppnå noggranna mätningar, använd ett nytt, rent probskydd för varje temperaturmätning.


För att göra en ny mätning, placera ett nytt, rent probskydd på termometern.

Ytterligare funktioner

- ***

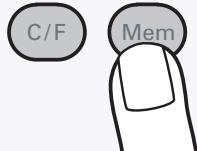


Minne
Tryck på knappen MINNE (Mem) för att visa den senast tagna temperaturen.
- ***

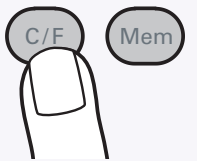

Enhetsomvandling
Tryck och håll ned på C/F-knappen för att tillfälligt visa den uppmätta temperaturen i den andra temperaturskalan. Tryck på knappen igen för att återgå till standardskalan.


Du kan ställa in vilken temperaturskala som ska vara standard med hjälp av CF-brytaren som sitter inuti batterifacket.
- ***

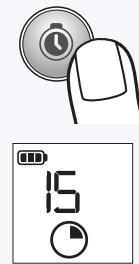

Manuell timer
Tryck på och håll ned -knappen under en sekund för att aktivera timern. Du hör ett pip när timern går i gång.

Det första segmentet blinkar i 15 sekunder, och därefter piper termometern. (Detta upprepas för de återstående 3 segmenten.) Efter 60 sekunder hörs ett långt pip. Termometern stänger av timern 5 sekunder efter det sista segmentet.


Du kan när som helst stänga av timern genom att trycka på -knappen igen.
- ***

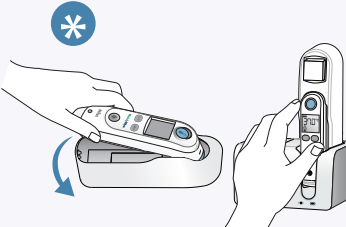



Säkerhet och laddning
För att LÅSA UPP termometern måste du sätta tillbaka den i laddningsstationen, eller i en kompatibel kompatibel Vital Signs-produkt.

UPPLÅSNINGSIKONEN, , visas när säkerhetsläget har aktiverats och termometern räknar ned tiden tills den låses (om mindre än 60 minuter återstår).

När tiden har gått ut visas LÅSIKONEN, , på displayen.
- ***

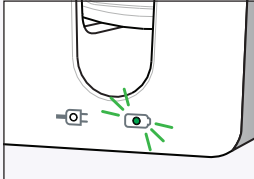

Laddningslampan
Lampan lyser medan det uppladdningsbara batteriet laddas. Lampan ändrar färg från gul till grön när batteriet är helt laddat.

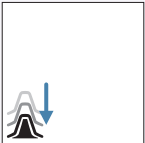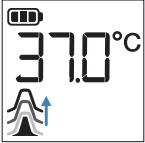
Felmeddelande	Situation	Lösning
	Inget probskydd är fastsatt (animering som visar uppmaning om påtagning).	Sätt på ett nytt, rent probskydd.
	Ett använt probskydd är fastsatt (animering som visar uppmaning om avtagning).	Kassera probskyddet som sitter på och sätt på ett nytt, rent probskydd om en ny temperaturmätning ska göras.
	(POS = positionsfel) Den infraröda skärmen kan inte hitta temperaturjämvikt och tillåter inte mätning.	Byt probskyddet för att återställa. Begränsa patientrörelserna och säkerställ att placeringen av proben är korrekt och håller sig stabil medan du tar en ny temperatur.
	Omgivande temperatur är inte inom det tillåtna användningsintervallet (10–40 °C eller 50–104 °F) eller ändras för snabbt.	Vänta 20 sekunder tills termometern stängs av automatiskt och sätt sedan på den igen. Säkerställ att termometern och patienten är i en miljö i 30 minuter där temperaturen är mellan 10 °C och 40 °C eller 50 °F och 104 °F.
	Temperaturen som tagits är inte inom det typiska temperaturintervallet för en människa.	Byt probskydd för att återställa. Se till att termometern är rätt isatt och ta sedan temperaturen igen.
	LO visas när temperaturen är lägre än 20 °C (68 °F).	
	Systemfel (Alla ikoner visas eller displayen är tom)	Vänta 20 sekunder tills termometern stängs av automatiskt och sätt sedan på den igen.
	Om felet kvarstår,	... återställ termometern genom att ta ut batterierna och sätta in dem igen.
	Om felet fortfarande kvarstår,	... är batterierna urladdade. Sätt i nya batterier.
	Om felet fortfarande kvarstår,	... kontakta lokalt Welch Allyn Service Center eller en representant.
	Batteriet är svagt, men termometern fungerar fortfarande korrekt.	Sätt i nya batterier.
	Batteriet är för svagt för möjliggöra temperaturmätning.	Sätt i nya batterier.

Yttre faktorer kan påverka örontemperaturen, bland annat:

Faktor	Påverkar	Påverkar inte
Använt probskydd	✓	
Omgivningstemperatur		✓
Våt, smutsig eller skadad lins	✓	
Hörapparat	✓	
Ligger på en kudde	✓	
Måttlig mängd cerumen (öronvax)		✓
Otitis media (öroninfektion)		✓
Tympanostomirör		✓


Obs! Om linsen är smutsig eller har förts in i hörselgången utan probskydd ska du läsa avsnittet om underhåll och service i bruksanvisningen. Rengör endast enligt tillverkarens anvisningar.

Byta batterier

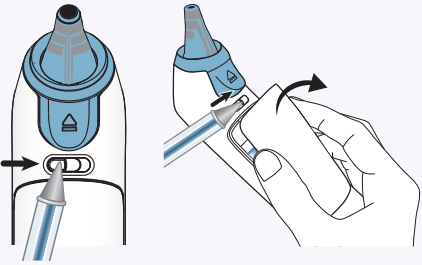


Byt ut de två alkaliska AA-batterierna när börjar blinka på displayen.

Öppna batteriluckan
Öppna batteriluckan genom att skjuta den fjädrande spärren åt höger med fingret eller ett spetsigt föremål, exempelvis en penna. Håll spärren i öppet läge. Ta tag i batteriluckan och avlägsna den.

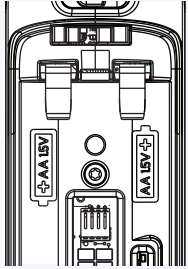

Ta ut batterierna och sätt i två nya alkaliska AA-batterier. Kontrollera att polerna är vända åt rätt håll.

Sätt tillbaka batteriluckan genom att knäppa fast den. Se till att spärren återgår till den ursprungliga låsta positionen.

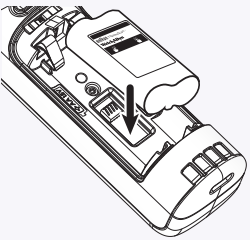

Uppladdningsbara batteripaketet
Sätt in det uppladdningsbara batteripaketet i batterifacket. Se till att batteriets etikett är vänd utåt.