




### 操作與技術

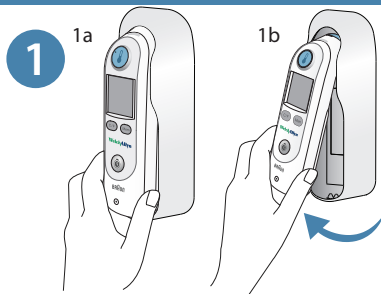


握住體溫計底端並向上旋轉，將體溫計自支架取下。然後會自動開啟溫度計。顯示幕上的探頭護套圖標  閃爍，指示需要探頭套。

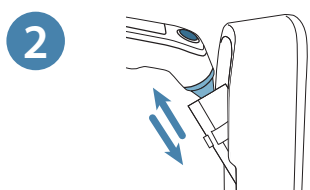


安裝新的探頭護套，方法是將探頭尖端筆直推入探頭護套盒中，然後拉出體溫計。

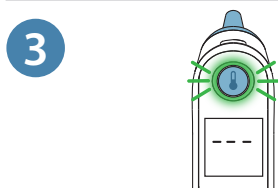

等待準備就緒指示。測量  按鈕外環的指示燈變為綠色，體溫計將發出一聲“嗶”聲，顯示屏上會顯示三條線，代表體溫計已準備就緒。

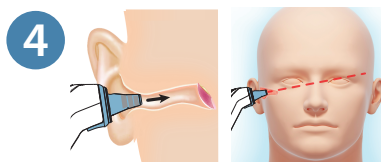


以舒適的方式將探頭插入耳道，直接朝向另一側的太陽穴。保持體溫計在耳道內保持穩定。正確的探頭位置對於準確測量溫度很重要。

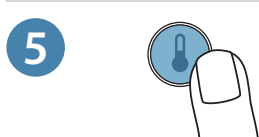

按下並鬆開  按鈕。體溫計將發出一聲“嗶”聲，顯示屏上將顯示運動的橫線，綠色 ExacTemp 燈會閃爍，代表探頭位置吻合。



溫度測量：一聲長“嗶”聲，綠色 ExacTemp 指示燈會亮起，代表測量已結束。顯示屏上將顯示溫度。

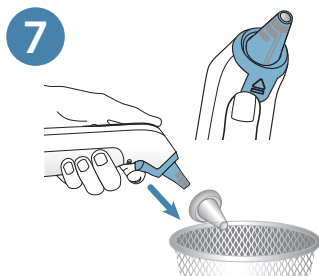


按下探頭護套彈出器按鈕，取下用過的探頭護套。


為準確測量溫度，每次測量請使用新的且乾淨的探頭護套。

下次進行測量時，在體溫計上更換新的且乾淨的探頭護套。


### 其他功能

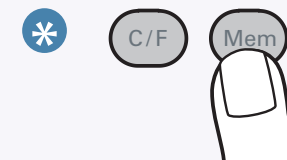


**體溫計**  
按下 **MEM** 按鈕，查詢上次完成的溫度測量。

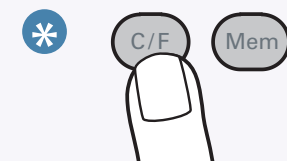


**溫度轉換**  
按下 **C/F** 按鈕，可暫時查看不同溫度標度的測量度數。再次按下按鈕，回到預設溫度標度。  
可透過電池蓋內的 C/F 開關設定預設溫度標度。

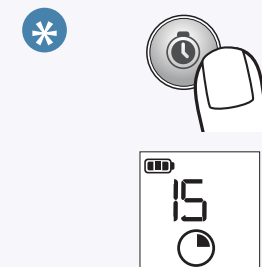

**手動計時器一秒**  
按住  按鈕，啟動計算脈搏或呼吸的計時器。啟動計時器時會發出一聲“嗶”聲。  
第一段將會閃爍，直到完成第一個 15 秒，然後發出“嗶”聲。（重複剩下的 3 段。）60 秒後將發出一聲長的“嗶”聲。最後一段結束後 5 秒，體溫計將退出計時器模式。  
再按下  按鈕一次，可隨時退出計時器模式。

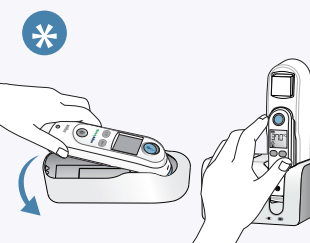


**安全與充電**  
要解鎖，務必將體溫計放回至充電站或相容的生命體徵裝置。




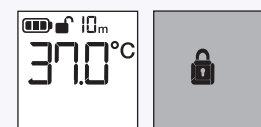


啟動安全模式時，將顯示解鎖  圖標，並計算鎖定溫度計前剩餘的可用時間（如果不到 60 分鐘）。

如果時間耗盡，顯示屏仍將顯示鎖定圖標 。

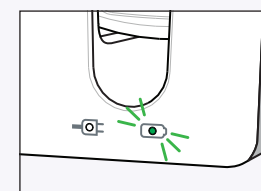

**充電指示燈**  
燈亮代表可充電電池正在充電。  
電池充滿後，指示燈會從琥珀色變為綠色。

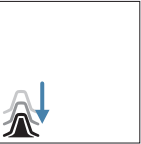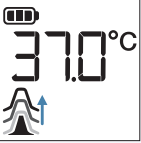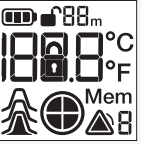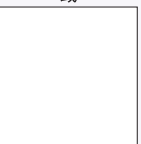
| 錯誤訊息                                                                               | 情況                                                    | 解決方案                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|    | 未安裝探頭護套<br>(動畫打開 )。                                   | 安裝新的且乾淨的探頭護套。                                                                     |
|    | 安裝使用過的探頭護套<br>(動畫打開 )。                                | 如果進行另一次溫度測量，丟棄使用過的探頭護套並安裝新的且乾淨的探頭護套。                                              |
|    | ( POS =位置錯誤 ) 紅外線監測器無法達到溫度平衡，無法進行測量。                  | 更換探頭護套以重置。限制患者移動，並確保探頭定位正確，讀取新的溫度時探頭保持穩定。                                         |
|    | 環境溫度在允許的工作範圍 ( 10 - 40 °C 或 50 - 104 °F ) 外，或變化太快。    | 等待 20 秒，直到溫度計自動關閉，然後再開啟一次。確定溫度計和患者在溫度為 10 °C 至 40 °C 或 50 °F 至 104 °F 的環境中 30 分鐘。 |
|    | 讀取的溫度在標準人體溫度範圍外。<br>溫度高於 42.2 °C ( 108 °F ) 時將顯示 HI 。 | 更換探頭護套以重置。然後，確定溫度計正確插入並獲取新的溫度。                                                    |
|  | 溫度低於 20 °C ( 68 °F ) 時將顯示 LO 。                        |                                                                                   |
|  | 系統錯誤<br>(所有圖標均顯示或顯示屏空白 )                              | 等待 20 秒，直到溫度計自動關閉，然後再開啟一次。                                                        |
|  | 如果錯誤仍然存在，                                             | ... 取出電池再重新裝回，重置體溫計。                                                              |
|  | 如果錯誤仍然存在，                                             | ... 請聯絡當地 Welch Allyn 服務中心或代表。                                                    |
|  | 電池電量低，但溫度計仍能正常工作。                                     | 當地新電池。                                                                            |
|  | 電池電量過低，無法進行溫度測量。                                      | 插入新電池。                                                                            |

可能會影響耳部溫度的外部因素包括：

| 因素           | 影響 | 不影響 |
|--------------|----|-----|
| 用過的探頭護套      | ✓  |     |
| 室溫           |    | ✓   |
| 晶體潮濕/髒污/損壞   | ✓  |     |
| 助聽器          | ✓  |     |
| 躺在枕頭上        | ✓  |     |
| 適量耳屎(耳垢)     |    | ✓   |
| 中耳炎 ( 耳部感染 ) |    | ✓   |
| 鼓膜穿刺管        |    | ✓   |


注意：如果鏡頭太髒或未安裝探頭護套就插入耳道，請參閱指示說明的維護和維修一節。請僅依據製造商的說明清理。

更換電池

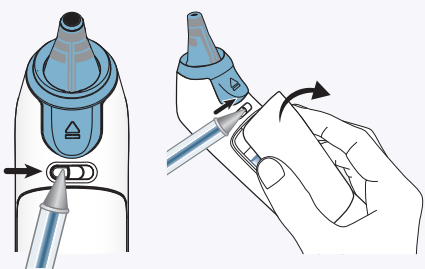


顯示幕上的  開始閃爍時，更換 2 個 AA 鹼性電池。

**開啟電池蓋**  
使用手指或用筆等尖頭物體，向右滑動彈簧門栓，開啟電池門。將門門保持在打開位置，抓住電池門並取下。

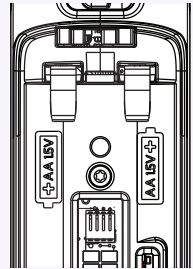

取出 2 個 AA 鹼性電池，更換 2 個新的 AA 鹼性電池，確定電池兩極位置正確。

合上電池門，并確保門門返回初始門門位置。

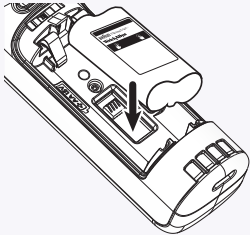

**可充電電池**  
將可充電電池插入電池盒，令電池標籤朝外。