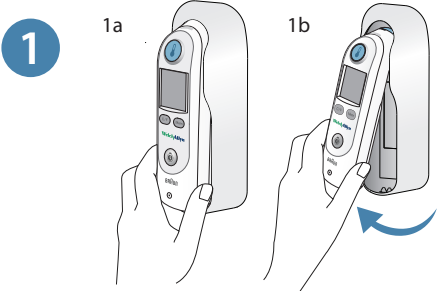
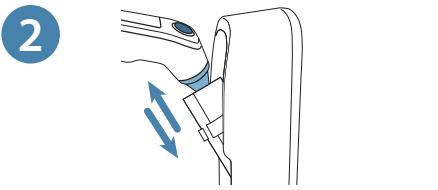
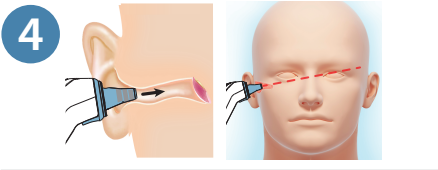


Çalıştırma ve teknik


- 


Termometreyi taban kısmından tutup yukarı doğru kaldırarak termometreyi saklama kabından çıkarın. Termometre otomatik olarak açılır. Ekrandaki prob kılıfı simgesi yanıp sönerken yeni bir prob kılıfı gerektiğini ifade eder.
- 

Yeni prob kılıfını takmak için prob ucunu düz şekilde kutunun içine sokun, ardından termometreyi dışarı çekin.
- 

Hazır göstergesini bekleyin. Halka şeklindeki ÖLÇÜM düğmesi yeşile döner, termometre bir kez bip sesi çıkarır ve ekrandaki üç çizgi termometrenin hazır olduğunu belirtir.
- 


Probu güvenli bir şekilde kulak kanalına sokun ve karşıdaki şakağa doğru yönlendirin. Termometre probunu kulak kanalında sabit tutun. Doğru ölçümler için probun doğru yerleştirilmesi şarttır.
- 

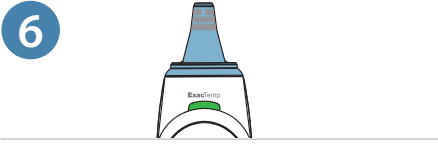ÖLÇÜM düğmesine basın ve bırakın. Termometre bir kez bip sesi çıkarır, ekranda bir birini takip eden çizgiler görünür ve ardından yeşil ExacTemp ışığı yanıp sönerken prob pozisyonunun tutarlı olduğunu ifade eder.
- 

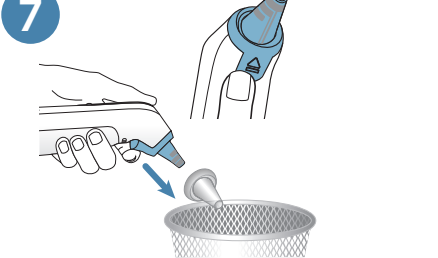
Sıcaklık ölçümü. Ölçüm işleminin sonunda uzun bir bip sesi verilir ve ExacTemp ışığı sabit şekilde yanar. Sıcaklık ekranda gösterilir.
- 


Kullanılmış prob kılıfını çıkarmak için Prob Kılıfı Çıkarma düğmesine basın. Doğru ölçümler elde etmek için, her ölçüm için daima yeni ve temiz bir prob kılıfı takın. Başka bir ölçüm almak için, termometreye yeni ve temiz bir prob kılıfı takın.


Ek işlevler

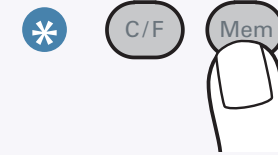- 

Bellek
En son alınan sıcaklık ölçümünü görmek için BELLEK düğmesine basın.
- 

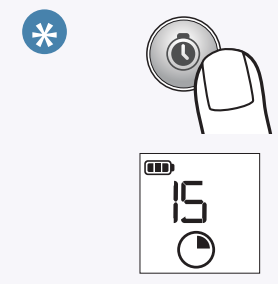Sıcaklık dönüştürme
Ölçümü alternatif sıcaklık skalasında geçici olarak görüntülemek için C/F düğmesine basın ve serbest bırakın. Varsayılan sıcaklık skalasına geri dönmek için düğmeye tekrar basın. Varsayılan sıcaklık skalası pil bölmesinin içinde bulunan C/F düğmesi ile ayarlanabilir.
- 

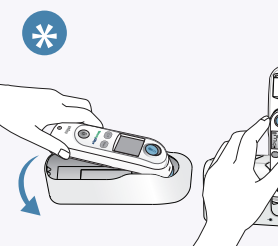Manuel zamanlayıcı
Zamanlayıcıyı etkinleştirmek için ⌚ düğmesine basın ve bir saniye boyunca basılı tutun. Zamanlayıcı başlarken bir bip sesi duyulur. İlk 15 saniye tamamlanana dek ilk dilim yanıp sönecek ve daha sonra bip sesi duyulacaktır. (Kalan 3 dilim için tekrarlanır.) 60. saniyede uzun bir bip sesi duyulacaktır. Son dilimin üzerinden 5 saniye geçtikten sonra, termometre zamanlayıcı modundan çıkacaktır. ⌚ düğmesine tekrar basarak istediğiniz zaman zamanlayıcıdan çıkabilirsiniz.
- 

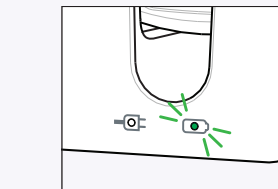Güvenlik ve şarj etme
KİLİDİ AÇMAK için, termometre şarj istasyonuna veya uyumlu yaşamsal bulgular cihazına geri konulmalıdır. Güvenlik modu aktif olduğunda KİLİT AÇIK simgesi görülür ve termometre kilitlenmeden önce kalan mevcut süreyi (60 dakikanın altındaysa) sayar. Süre bittiğinde KİLİT KAPALI simgesi ekranda kalır.
- 

Şarj ışığı göstergesi
Şarj edilebilir pilin şarj olduğunu gösterecek şekilde yanar. Pil tamamen şarj olduğunda, gösterge turuncu renginden yeşile döner.

Hatalar ve bildirimler

Hata mesajı	Durum	Çözüm
	Prob kılıfı takılmamış (AÇIK olarak gösterir)	Yeni, temiz bir prob kılıfı takın.
	Kullanılmış bir prob kılıfı takılı (KAPALI olarak gösterir)	Takılı olan prob kılıfını atın ve başka bir sıcaklık ölçümü alacaksınız yeni, temiz bir prob kılıfı takın.
	(POS = pozisyon hatası) Kızılötesi monitör bir sıcaklık dengesi bulamıyor ve ölçüm alınmasına izin vermiyor.	Sıfırlamak için prob kılıfını değiştirin. Hastanın hareket etmemesini sağlayın ve prob pozisyonunun doğru olduğundan ve yeni ölçüm alınırken stabil kaldığından emin olun.
	Çevre sıcaklığı, izin verilen çalışma aralığında (10 – 40°C veya 50 – 104°F).	Termometre otomatik olarak kapanana kadar 20 saniye bekleyin, ardından yeniden açın. Termometrenin ve hastanın sıcaklığın 10°C ile 40°C veya 50°F ile 104°F arasında olduğu bir ortamda 30 dakika boyunca beklediğinden emin olun.
	Ölçülen sıcaklık tipik insan sıcaklığı aralığında değil. Sıcaklık 42,2°C'den (108°F) yüksek olduğunda "HI" mesajı görüntülenir.	Sıfırlamak için prob kılıfını değiştirin. Ardından, termometrenin düzgün şekilde yerleştirildiğinden emin olun ve yeni bir ölçüm alın.
	Sıcaklık 20°C'den (68°F) düşük olduğunda "LO" mesajı görüntülenir.	
	Sistem hatası (Tüm simgeler görünür veya ekran boştur)	Termometre otomatik olarak kapanana kadar 20 saniye bekleyin, ardından yeniden açın.
	Hata devam ederse,	... pilleri yerinden çıkarıp, tekrar yerlerine yerleştirmek suretiyle termometreyi sıfırlayın.
	Hata yine de devam ederse,	... piller bitmiştir. Yeni pil takın.
	Hata yine de devam ederse,	... yerel Welch Allyn Servis Merkezinizle veya temsilcinizle iletişim kurun
	Pil azalmış olmakla beraber termometre yine de doğru şekilde çalışacaktır.	Yeni pil takın.
	Pil, sıcaklık ölçümü yapamayacak kadar azalmış.	Yeni pil takın.


Doğruluğu Etkileyenler Nelerdir?

Aşağıdakiler dahil olmak üzere dış etkenler, kulak sıcaklıklarını etkileyebilir:

Faktör	Etkili	Etkili değil
Kullanılmış prob kılıfı	✓	
Ortam sıcaklığı		✓
Islak/kirli/hasarlı lens	✓	
İşitme cihazı	✓	
Yastık üzerinde uzanmak	✓	
Orta seviyede serumen (kulak kiri)		✓
Otitis media (kulak enfeksiyonları)		✓
Timpanostomi tüpleri		✓

Not: Lens kirli ise veya kulak kanalına prob kılıfı olmaksızın yerleştirilmişse, kullanım talimatlarındaki bakım ve servis bölümüne bakın. Yalnızca üretici tarafından belirtilen şekilde temizleyin.


Pillerin değiştirilmesi

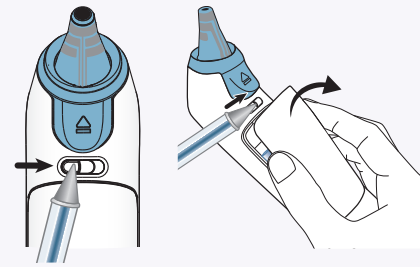

Ekran **yanıp sönmeye başladığında, 2 adet AA alkalin pili değiştirin.**


Pil kapağını açın

Parmağınızı veya kalem gibi sivri uçlu bir nesneyi kullanarak mandalı sağa kaydırarak pil kapağını açın. Mandalı açık konumda tutarken, pil kapağını tutun ve çıkarın.

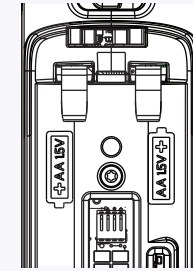

2 adet AA alkalin pili çıkarın ve kutupların doğru yönde olduğundan emin olarak 2 adet yeni AA alkalin pili yerleştirin.

Pil kapağını yerine oturtun ve mandalın orijinal kapalı pozisyonuna geldiğinden emin olun.

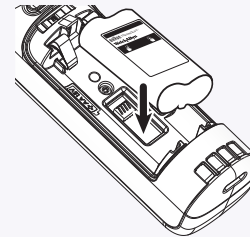

Şarj edilebilir pil paketini

Şarj edilebilir pil paketini pil bölmesine, pil etiketi dışarı bakacak şekilde yerleştirin.

BRAUN

WelchAllyn



© 2019 Tüm hakları saklıdır. Bu ürün 'Braun' ticari markasının lisansıyla üretilmiştir.
'Braun', Braun GmbH, Kronberg, Germany'nin tescilli ticari markasıdır.
ThermoScan, Helen of Troy Limited'in tescilli ticari markasıdır.
Üretici:
Welch Allyn, Inc.
4341 State Street Road
Skaneateles Falls, NY 13153
USA



Welch Allyn Limited
Navan business Park
Dublin road,
Navan, County Meath
Republic of Ireland
C15 AW22

Meksika'da üretilmiştir

DIR 80025077
Revizyon tarihi: 2019-05