


BRAUN

WelchAllyn®

Panduan penggunaan
Stasiun pengisian daya

ThermoScan®

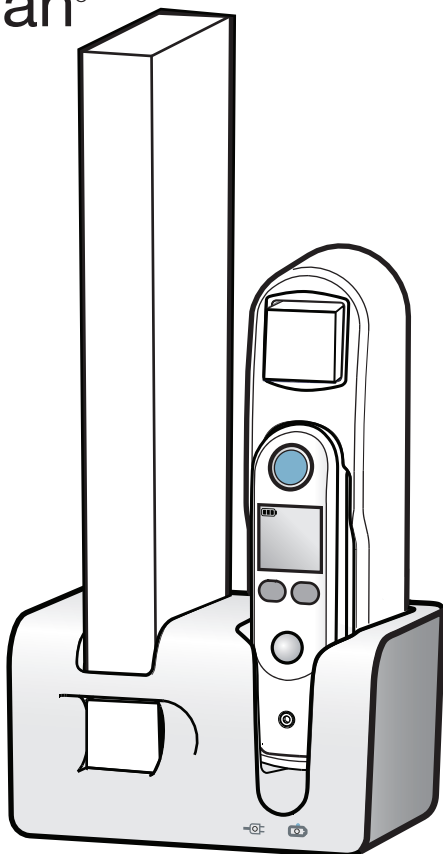

Stasiun pengisian
daya
PRO 6000

BRAUN**ThermoScan®****Stasiun pengisian daya PRO 6000**Panduan ini berlaku untuk Aksesoris, Termometri **REF 901009**

Diproduksi oleh:
Welch Allyn, Inc.
4341 State Street Road
Skaneateles Falls, NY 13153
USA



107983 (CD)
DIR 80025841
Tanggal Revisi: 2019-09



Welch Allyn Limited
Navan business Park
Dublin road,
Navan, County Meath
Republic of Ireland
C15 AW22

Untuk informasi tentang produk Welch Allyn, hubungi:

Welch Allyn Technical Support:www.welchallyn.com/support**Kunjungi lokasi:**www.welchallyn.com/about/company/locations.htm**Komponen pengganti**Untuk daftar komponen lengkap, kunjungi www.welchallyn.com**Untuk informasi paten, kunjungi**www.welchallyn.com/patents

© 2019 Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dibuat di Meksiko

Produk ini dibuat berdasarkan lisensi untuk merek dagang 'Braun'.


'Braun' adalah merek dagang terdaftar dari Braun GmbH, Kronberg, Jerman.

ThermoScan® adalah merek dagang terdaftar yang dimiliki oleh Helen of Troy Limited.

Hanya gunakan
penutup probe
Hillrom



1. Stasiun pengisian daya Braun Thermoscan® PRO 6000

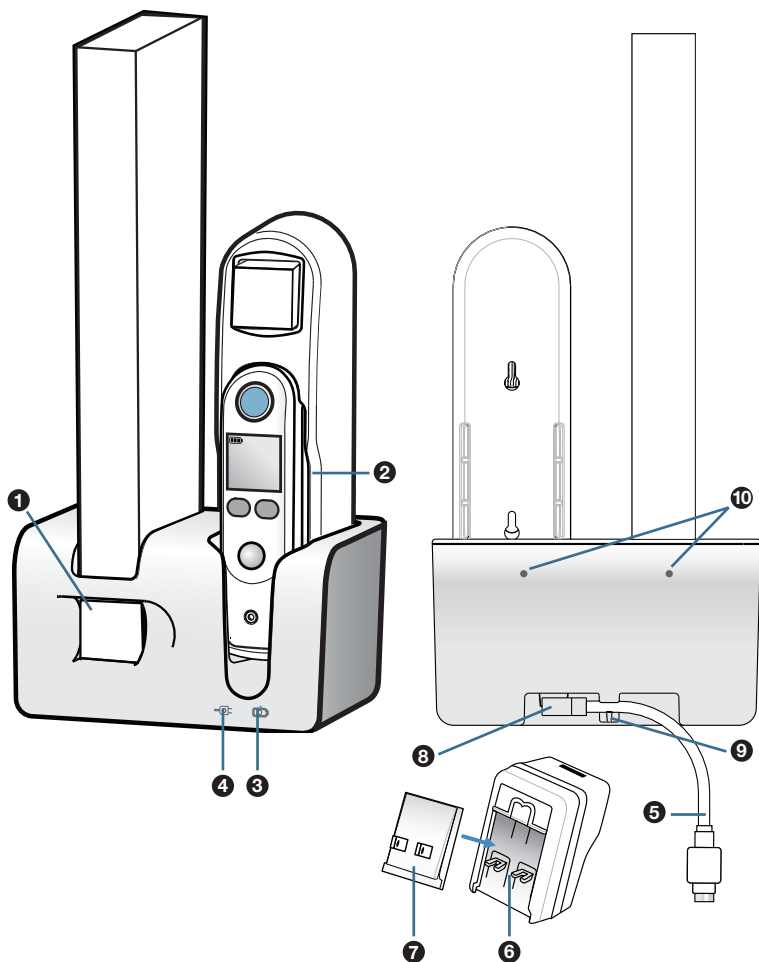

2. Komponen kemasan

Stasiun pengisian daya Braun ThermoScan® PRO 6000

CD berisi Panduan penggunaan, perangkat lunak Welch Allyn Service Tool (tersedia melalui tautan internet) dan panduan pemasangan Service Tool (tersedia melalui tautan internet)

- 1 Unit baterai yang dapat diisi daya (NiMH)
- 1 Set steker dinding yang dapat dipertukarkan
- 1 Adaptor dinding dan kabel USB

3. Deskripsi produk

- ❶ Ruang penyimpanan untuk selubung bagi 200 penutup probe Braun
- ❷ Termometer telinga Braun ThermoScan® PRO 6000 di dalam penyangganya
- ❸ Indikator pengisian daya
- ❹ Indikator daya
- ❺ Kabel USB
- ❻ Adaptor dinding
- ❼ Steker yang dapat dipertukarkan (tersedia dalam 4 konfigurasi yang berbeda)

Nomor model	Konfigurasi steker	
PRO6000BSNA / 06000-100	Steker Amerika Utara/Tiongkok	
PRO6000BSEU / 06000-125	Steker Uni Eropa & Inggris	
PRO6000BSC / 06000-575	Steker Amerika Utara/ Tiongkok, Uni Eropa & Inggris	
PRO6000BSAU / 06000-150	Steker Australia	

- ❽ Adaptor koneksi USB
- ❾ Klip pengencang USB
- ❿ Lubangudukan dinding

SIMPAN PETUNJUK INI

Stasiun pengisian daya untuk Termometer telinga Braun Thermoscan® PRO 6000, yang merupakan termometer kelas klinis, menyediakan fungsi pengisian daya dan keamanan, serta penyimpanan untuk termometer dan wadah penutup probe. Sebelum digunakan, baca petunjuk penggunaan dengan saksama.

4. Peringatan dan kewaspadaan



Untuk mengurangi risiko kejut listrik:



PERINGATAN Jangan mengambil stasiun pengisian daya yang telah jatuh ke air. Segera cabut steker.



PERINGATAN Jangan menempatkan, menyimpan, atau mengisi daya stasiun pengisian daya di tempat yang dapat membuatnya jatuh atau tertarik ke dalam bak mandi atau wastafel. Jangan menempatkan atau menjatuhkan ke dalam air atau cairan lainnya.



PERINGATAN Cabut stasiun pengisian daya ini sebelum membersihkan.



PERINGATAN Stasiun pengisian daya disediakan bersama adaptor dinding tegangan rendah (Adaptor yang Dipasang di Dinding khusus Medis, jenis TMW7-5-IPW). Oleh karena itu, Anda tidak boleh mengubah atau memanipulasi komponennya. Jika tidak, akan terdapat risiko kejut listrik.



PERINGATAN Hanya untuk digunakan oleh tenaga profesional.



PERHATIAN Untuk mengisi daya termometer, stasiun pengisian daya hanya boleh digunakan dengan unit baterai yang dapat diisi daya yang disertakan bersama unit ini.

Untuk mengurangi risiko luka bakar, kebakaran, kejut listrik, atau cedera individu:



PERINGATAN Stasiun pengisian daya tidak boleh dioperasikan dalam jarak 1,5 m (4,92 kaki) dari area sekitar pasien.



PERHATIAN Gunakan peralatan ini hanya untuk tujuan penggunaannya seperti yang diuraikan di dalam panduan ini. Jangan gunakan aksesoris lain yang tidak direkomendasikan oleh produsen.



PERINGATAN Jangan memodifikasi peralatan ini tanpa izin produsen.



PERHATIAN Peralatan ini tidak boleh terpapar pada suhu kurang dari -20°C (-4°F) dan lebih dari +50°C (122°F). Jaga agar peralatan dan kabel selalu kering. Jangan pegang dengan tangan yang basah. Jangan simpan di lingkungan yang lembap. Jaga agar kabel tidak kusut di sekeliling peralatan. Sangatlah penting untuk memeriksa kabel secara berkala (setiap 3 bulan) untuk melihat apakah terdapat kerusakan, khususnya di setiap ujung tempat kabel memasuki steker.



PERINGATAN Jangan pernah mengoperasikan peralatan ini jika kabel atau stekernya rusak, jika pernah jatuh atau rusak, atau pernah jatuh ke air. Kembalikan peralatan ke pusat layanan untuk diperiksa dan diperbaiki.



PERHATIAN Jauhkan kabel dari permukaan yang panas.



PERINGATAN Jangan pernah menjatuhkan atau memasukkan objek apa pun ke dalam lubang.



PERHATIAN Selalu pasang steker ke peralatan terlebih dahulu, lalu ke stopkontak.



PERHATIAN Perangkat ini sesuai dengan standar terkini yang disyaratkan untuk interferensi elektromagnetik dan seharusnya tidak menimbulkan masalah pada peralatan lain maupun berpengaruh oleh perangkat lainnya. Sebagai langkah pencegahan, hindari menggunakan perangkat ini dalam jarak dekat dengan peralatan lain.



PERINGATAN Jangan posisikan perangkat dalam posisi sedemikian rupa sehingga sulit untuk dioperasikan atau sulit mencabut perangkat (Steker).

5. Penyiapan

5.1 Pemasangan baterai



Stasiun pengisian daya disediakan dengan 1 unit baterai yang dapat diisi daya. Untuk menggunakan fungsi pengisian daya, letakkan unit baterai yang dapat diisi daya di kompartemen baterai yang ada di termometer.

Unit baterai mungkin tidak terisi daya ketika dikirimkan.




PERHATIAN Sebelum digunakan, isi daya perangkat ini selama 3 jam di stasiun pengisian daya. Lihat 5.2 Menghubungkan dan 5.4 Mengisi daya termometer.


- 1 Buka pintu baterai dengan menggeser kancing pegas ke kanan menggunakan jari atau benda berujung runcing seperti pena. Sambil menahan kancing pada posisi terbuka, pegang pintu baterai dan lepaskan.

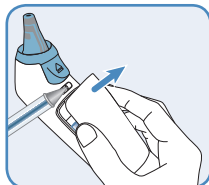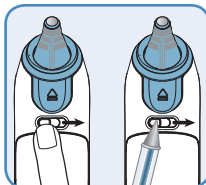

- 2 Masukkan unit baterai yang dapat diisi daya ke dalam kompartemen dengan label baterai menghadap ke luar.

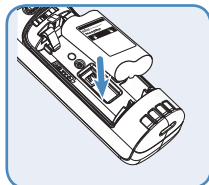

- 3 Sematkan kembali pintu baterai di tempatnya dan pastikan kaitnya sudah kembali ke posisi terkunci seperti semula.

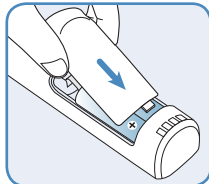

Produk ini berisi baterai dan limbah elektronik yang dapat didaur ulang.



Untuk melindungi lingkungan, jangan buang limbah ini di tempat sampah, tetapi kumpulkan di tempat pembuangan setempat yang sesuai dengan peraturan nasional atau daerah.




PERHATIAN Jangan membongkar, menyebabkan terjadinya hubungan arus pendek, atau memusnahkan dengan cara dibakar. Jangan dicampur dengan jenis baterai lain.

5.2 Menghubungkan

- 1 Hubungkan kabel USB ke belakang stasiun pengisian daya (1a) dan masukkan kabel melalui klip pengencang (1b).

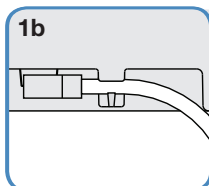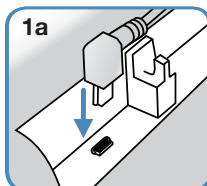


- 2 Pilih steker yang dapat diubah sesuai dengan negara dan kawasan Anda (jika tersedia lebih dari satu steker).

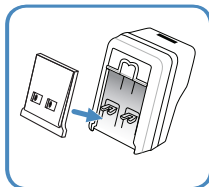


- 3 Hubungkan steker ke adaptor dinding.

- 4 Colokkan kabel USB ke adaptor dinding.

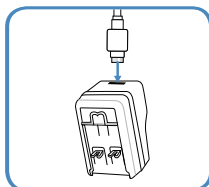

- 5 Colokkan keseluruhan unit ke stopkontak listrik.

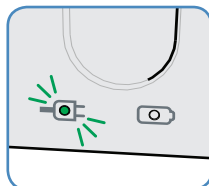

- 6 Lampu hijau akan menyala, yang menunjukkan bahwa stasiun pengisian daya siap digunakan.

5.3 Instruksi pemasangan (opsional)

Stasiun pengisian daya dapat dipasang ke dinding atau disiapkan di permukaan yang datar. Stasiun pengisian daya harus dipasang ke dinding setelah langkah 3 dari bagian 5.2 Menghubungkan selesai dilakukan.


Bahan berikut akan diperlukan untuk pemasangan:

- 2 sekrup kembang #8 Phillips (disertakan)
- 2 *Flush mount dry wall anchor* (disertakan)
- Penggaris (tidak disertakan)
- Obeng kembang Phillips –drive #2 (tidak disertakan)

Untuk memasang ke dinding:


- 1 Pastikan kabel USB sudah dicabut dari stopkontak listrik tetapi masih terpasang ke stasiun pengisian daya. Koneksi USB di stasiun pengisian daya tidak akan dapat diakses setelah pemasangan.
- 2 Cari sekrup dan *dry wall anchor* yang disertakan bersama stasiun pengisian daya tersebut.
- 3 Cari lubang pemasangan di bagian belakang stasiun pengisian daya.
- 4 Dengan menggunakan *drywall anchor* dan sekrup yang disediakan, pasang stasiun pengisian daya ke dinding atau lokasi lain yang aman.

Catatan: Jika memasang stasiun pengisian daya ke permukaan selain dinding gipsium (*drywall*), gunakan pengencang yang sesuai untuk permukaan tersebut.

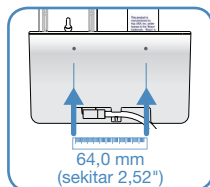

5.4 Mengisi daya termometer


- 1 Letakkan termometer dengan unit baterai yang dapat diisi daya terpasang ke penyangga termometer tersebut (1a). Letakkan termometer di dalam stasiun pengisian daya (1b).

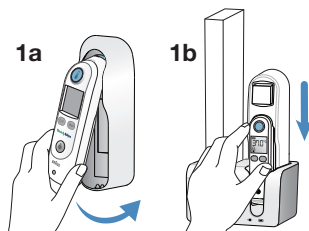

- 2 Termometer akan menghasilkan bunyi bip.




- 3 Indikator pengisian daya di stasiun pengisian daya akan menyala kuning.

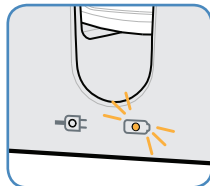


- 4 Status isi daya baterai akan ditampilkan di LCD termometer.

Indikator pengisian daya di stasiun pengisian daya akan berubah menjadi hijau bila termometer sudah terisi penuh (sekitar 3 jam jika baterai kosong). Daya baterai tidak dapat diisi melampaui kapasitasnya. Sebaiknya termometer disimpan di stasiun pengisian daya bila tidak digunakan untuk menjaga agar dayanya selalu penuh.

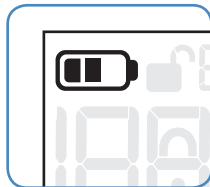

Perlu diperhatikan, meskipun dengan kondisi baterai penuh, stasiun pengisian daya mungkin memerlukan waktu hingga 5 menit untuk mengenali tingkat daya baterai yang penuh. Jika hal ini terjadi, indikator pengisian daya akan menyala kuning saat termometer dipasang di stasiun pengisian daya lalu berubah menjadi hijau setelah baterai yang terisi penuh tersebut dikenali.

Jika Anda melihat bahwa stasiun pengisian daya menunjukkan tingkat daya yang penuh (indikator pengisian daya hijau) tetapi LCD termometer tidak menunjukkan tingkat daya yang penuh, ini mungkin karena stasiun pengisian daya atau baterai mengalami panas berlebihan. Sebaiknya Anda memindahkan stasiun pengisian daya ke lingkungan yang lebih sejuk.

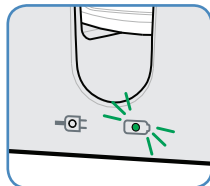

Jika indikator pengisian daya tidak menyala, salah satu hal berikut mungkin telah terjadi:


- Baterai alkali (tidak dapat diisi daya) dipasang
- Termometer/stasiun pengisian daya tidak terhubung langsung ke sumber listrik
- Termometer tidak dipasang dengan benar di stasiun pengisian daya

6. Fungsi keamanan

Termometer telinga Braun Thermoscan® PRO 6000 dilengkapi dengan fungsi keamanan yang mengharuskan termometer dikembalikan ke stasiun pengisian daya dalam kurun waktu yang ditentukan sebelumnya. Jika waktu ini terlewati, termometer akan dikunci. Fitur keamanan dapat ditetapkan melalui Service Tool hingga 12 jam / 720 menit.


Ketika meninggalkan pabrik, fungsi keamanan Termometer telinga Braun Thermoscan® PRO 6000 dimatikan. Fungsi keamanan hanya tersedia melalui penggunaan perangkat lunak Welch Allyn Service Tool dan memerlukan stasiun pengisian daya atau perangkat Tanda Vital Welch Allyn lain yang kompatibel untuk memulai. Fungsi keamanan dapat digunakan dengan baterai yang dapat diisi daya atau baterai alkali.

Lihat 6.2 Pengaturan untuk mengakses fitur ini dan mengubah pengaturan.


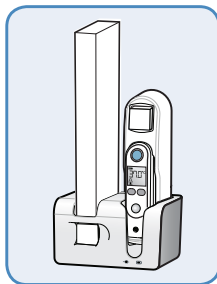


6.1 Cara kerja


- 1 Bila fungsi keamanan diaktifkan, ikon tidak terkunci ditampilkan di samping indikator baterai selama penggunaan normal untuk menunjukkan bahwa fungsi keamanan masih aktif.

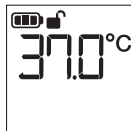


- 2 Bila termometer berada dalam jangka waktu 60 menit dari batas waktu, jam hitung mundur yang menunjukkan jumlah menit yang tersisa ditampilkan di samping ikon tidak terkunci tersebut.

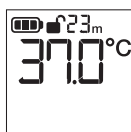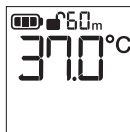


- 3 Pada waktu 5 menit sebelum berakhirnya hitung mundur tersebut, termometer akan mulai berkedip satu kali per menit dan ikon tidak terkunci tersebut akan berkedip untuk menunjukkan bahwa penguncian termometer akan segera diterapkan.

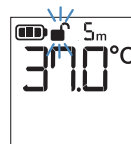

- 4 Setelah batas waktu berakhir, ikon tidak terkunci dan pengatur waktu hitung mundur akan digantikan dengan ikon terkunci dan termometer akan berkedip sekali setiap 5 menit untuk menunjukkan keadaan terkunci. Setiap tombol yang ditekan dalam keadaan terkunci akan menghasilkan bunyi bip kesalahan dan tidak ada respons dari termometer. Termometer tidak dapat digunakan dalam keadaan terkunci.

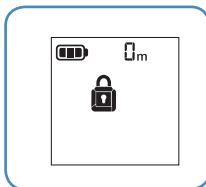


- 5 Buka kunci termometer dengan cara mengembalikannya ke stasiun pengisian daya.

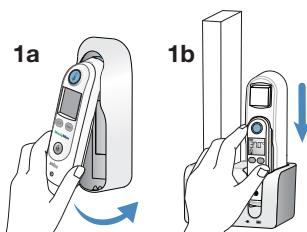

- 6 Termometer akan menghasilkan bunyi bip dan lampu latar akan menyala selama 5 detik.




- 7 Batas waktu akan direset dan termometer akan kembali ke keadaan tidak terkunci untuk pengoperasian normal. Bila keadaan tidak terkunci telah tercapai, termometer akan mengeluarkan bunyi bip dan layar akan kembali menyala.

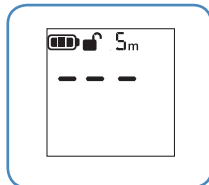

8 Mengisi daya termometer dengan fungsi keamanan diaktifkan:

Jika baterai yang dapat diisi daya dipasang, lampu kuning di stasiun pengisian daya akan menyala untuk menunjukkan bahwa pengisian daya telah dilanjutkan dan ikon baterai akan muncul di layar termometer.

Meskipun fungsi keamanan akan beroperasi, jika baterai alkali (tidak dapat diisi daya) dipasang di termometer tersebut, lampu kuning tidak akan menyala di stasiun pengisian daya, ikon baterai tidak akan muncul di layar termometer, dan baterai tidak akan mengisi daya.

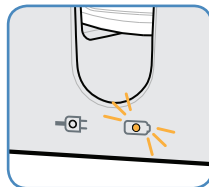

6.2 Pengaturan fungsi keamanan


Stasiun pengisian daya atau perangkat Tanda Vital Welch Allyn dapat digunakan dengan Welch Allyn Service Tool untuk memodifikasi pengaturan di termometer.

Perangkat lunak Welch Allyn Service Tool diperlukan untuk memodifikasi konfigurasi termometer.

Stasiun pengisian daya dan baterai isi ulang atau Perangkat Welch Allyn yang kompatibel diperlukan untuk menyambung ke PC yang menjalankan Welch Allyn Service Tool.

Ikuti petunjuk untuk mengakses pengaturan lanjutan Termometer telinga Braun Thermoscan® PRO 6000 menggunakan Welch Allyn Service Tool.

- 1 Pasang Termometer telinga Braun Thermoscan® PRO 6000 di stasiun pengisian daya.

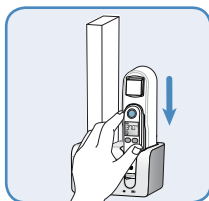

- 2 Tindakan yang disarankan adalah menggunakan kabel USB yang tersambung ke adaptor dinding—cabut kabel dari adaptor dinding dan tancapkan ke komputer Anda.




- 3 a. Jalankan Welch Allyn Service Tool.
- b. Jika layar pengaktifan dengan tombol "Add new features" (Tambahkan fitur baru) dan "Service" (Servis) muncul, klik "Service" (Servis).
- c. Masuk sebagai ADMIN tanpa kata sandi atau gunakan akun yang telah Anda buat sebelumnya.

Catatan: Jika petunjuk masuk tidak muncul, klik tombol Log on (Masuk). Anda harus masuk untuk mengakses dialog konfigurasi.




- 4 Klik termometer Braun dari daftar perangkat untuk menyoroti dan klik tombol pilih.

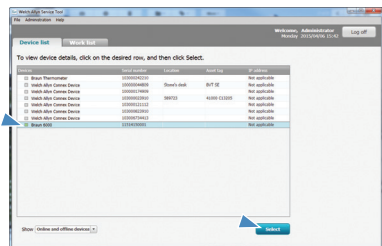


- 5 Tab Device (Perangkat) terbuka.

- 6 Klik tab Configure (Konfigurasi) di kanan tab informasi perangkat.

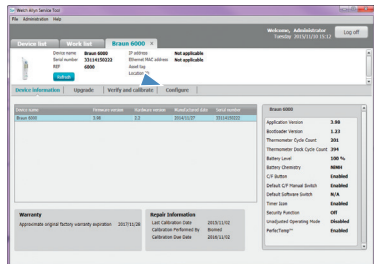


- 7 Klik tombol Change (Ubah) di kotak pengaturan saat ini. Kotak dialog pengaturan konfigurasi terbuka.

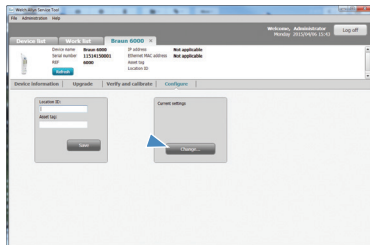

- 8 Untuk memilih fungsi keamanan, klik menu tarik turun dan klik waktu yang diinginkan atau Off (Mati) untuk menonaktifkan.

Setelah pengaturan yang diinginkan dipilih, klik tombol Save (Simpan) untuk mengirim pengaturan ke termometer telinga Braun dan tutup kotaknya.

Untuk menutup kotak tanpa mengubah pengaturan, klik tombol Cancel (Batal).

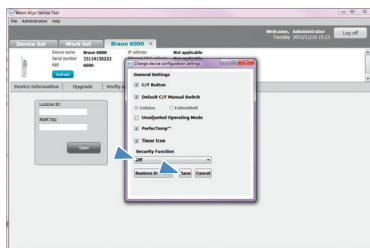

6.3 Alat Servis

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Service Tool (Alat Servis) dan panduan pemasangan Service Tool, kunjungi www.welchallyn.com dan unduh alat servis yang terdapat di Tab Services & Support/Service Centers/Download service tool (Tab Layanan & Dukungan/Pusat Layanan/Unduh alat servis).

7. Perawatan & servis

7.1 Pembersihan



Perhatian



PERHATIAN Jangan gunakan larutan pemutih jenis apa pun ketika membersihkan kontak listrik berbahan logam. Larutan pemutih akan merusak kontak listrik tersebut.



PERHATIAN Bersihkan kontak hanya dengan isopropil alkohol 70%. Biarkan kontak mengering selama 1 menit.

Bila diperlukan, bersihkan stasiun pengisian daya dengan kain yang sedikit lembap atau tisu pembersih dengan larutan isopropil atau etil alkohol 70%, larutan pemutih klorin 10%, larutan pembersih tanpa noda (misalnya Metrex CaviWipes™, PDI Sani-Coth®) atau larutan pembersih hidrogen peroksida (misalnya Virox dan Oxivir).

Larutan pembersih yang disetujui			
Kelompok	Larutan atau merek	Badan stasiun pengisian daya	Kontak Listrik
Klorin dan senyawa klorin	Larutan pemutih Klorin 10%	Ya	Tidak
Senyawa amonium kuarternar	CaviWipes™ Clinell® Universal Wipes SaniCloth Metrex	Ya	Tidak
Hidrogen peroksida	Virox Oxivir	Ya	Tidak
Alkohol	Isopropil atau etil alkohol 70%	Ya	Ya

Bahan pembersih tambahan dapat dievaluasi kesesuaiannya secara berkala. Jika bahan pembersih yang hendak Anda gunakan tidak tercantum di dalam tabel, hubungi Welch Allyn untuk mengetahui apakah bahan pembersih tambahan tersebut disetujui untuk digunakan.

Catatan: Jika bahan pembersih selain isopropil atau etil alkohol mengenai kontak listrik, segera lap hingga kering. Lalu bersihkan kontak dengan isopropil atau etil alkohol.



Perhatian

-  **PERHATIAN** Jangan gunakan bahan pembersih abrasif.
-  **PERINGATAN** Cabut stasiun pengisian daya sebelum melakukan perawatan atau servis apa pun.
-  **PERINGATAN** Jangan merendam stasiun pengisian daya di dalam air atau cairan lain.
-  **PERHATIAN** Lap harus lembap, tidak jenuh. Cairan berlebih dapat menyebabkan kerusakan pada stasiun pengisian daya.
-  **PERHATIAN** Untuk membersihkan termometer dan penyangganya, ikuti petunjuk pembersihan Termometer telinga Braun Thermoscan® PRO 6000 seperti yang ditentukan di Petunjuk penggunaan, perawatan & servis PRO 6000.
-  **PERINGATAN** Sangatlah penting untuk memeriksa kabel secara berkala (setiap 3 bulan) untuk melihat apakah ada kerusakan, khususnya di setiap ujung kabel yang masuk ke steker.

7.2 Instruksi penyimpanan

Simpan termometer dan penutup probe di tempat kering (termometer ini tidak kedap air), bersih dari debu dan kontaminasi serta jauh dari cahaya matahari langsung. Suhu sekitar di lokasi penyimpanan harus tetap konstan dan dalam rentang -20 hingga 50°C (-4 hingga 122°F).

8. Spesifikasi

Rentang suhu sekitar pada pengoperasian: 10–40 °C (50–104 °F)

Perangkat catu daya yang tersertifikasi secara medis untuk penggunaan eksternal:

Voltase Keluaran: 5 Vdc
 Arus Keluaran: 1 A
 Voltase Masukan: 100–240 VAC
 Arus Masukan: 0,3 A
 Frekuensi Masukan: 50–60 Hz

Rentang penyimpanan jangka panjang

Suhu penyimpanan: -20 hingga 50°C (-4 hingga 122°F)
 Kelembapan penyimpanan: 0 hingga 85% tanpa kondensasi
 Daya listrik: 750 mAh
 Garansi baterai yang dapat diisi daya: 3 tahun
 Kapasitas baterai: Hingga 700 pengukuran suhu setiap kali pengisian daya hingga penuh / 3 V
 Jenis baterai yang dapat diisi daya: unit baterai ganda yang dikustomisasi (NiMH)
 Dimensi stasiun pengisian daya: 3,51" T x 4,08" L x 6,02" P
 (89,2 mm T x 103,7 mm L x 153,0 mm P)
 Berat stasiun pengisian daya: 5,3 oz / 150 g



PERHATIAN Jangan gunakan perangkat ini jika terdapat medan elektromagnet atau interferensi lain di luar rentang normal yang ditentukan di dalam IEC 60601-1-2.



Intertek



NiMH

Standar dan kepatuhan

Perangkat ini sesuai dengan Standar Keselamatan dan Kinerja berikut:

Produk ini sesuai dengan ketentuan dari direktif EC 93/42/EEC (Medical Device Directive/Direktif Perangkat Medis).

ANSI/AAMI STD ES60601-1, UL STD 60601-1, CAN/CSA STD C22.2 No. 60601.1, IEC 60601-1, dan EN 60601-1; Edisi ke-2 dan 3.1. Peralatan listrik medis—Bagian 1: Persyaratan umum terkait keselamatan dasar dan kinerja pokok

BS EN 60601-1-2:2015, IEC 60601-1-2:2014

Peralatan listrik medis—Bagian 1-2: Persyaratan umum terkait keselamatan dasar dan kinerja pokok—Standar kolateral: Kompatibilitas elektromagnetik—Persyaratan dan pengujian

IEC/EN 62366-1: 2015 (IEC 60601-1-6:2010+A1: 2013) Perangkat medis—Penerapan rekayasa teknis kemampuan penggunaan terhadap perangkat medis

ISO 14971:2012 Perangkat medis—Penerapan manajemen risiko pada perangkat medis

PERALATAN LISTRIK MEDIS memerlukan langkah pencegahan khusus terkait EMC. Untuk keterangan terperinci mengenai persyaratan EMC, silakan hubungi Pusat Servis resmi setempat. Peralatan komunikasi RF portabel dan seluler dapat memengaruhi PERALATAN LISTRIK MEDIS

Peralatan ME dengan sumber listrik internal.

Pengoperasian berkelanjutan.

Tidak kedap air.



IPX0

Definisi simbol:

Komponen yang Bersentuhan dengan Tubuh Tipe BF

Perhatian



Pernyataan perhatian di dalam panduan ini mengidentifikasi kondisi atau tindakan yang dapat mengakibatkan kerusakan pada peralatan atau harta benda lain, atau hilangnya data.

Peringatan



Pernyataan peringatan di dalam panduan ini mengidentifikasi kondisi atau tindakan yang dapat mengakibatkan penyakit, cedera, atau kematian. Simbol peringatan ditampilkan dengan latar belakang abu-abu dalam dokumen hitam putih.



Peralatan Kelas II



Pisahkan pembuangan Peralatan Listrik dan Elektronik. Jangan buang di tempat pembuangan sampah rumah tangga.



7d Lihat petunjuk penggunaan.

welchallyn.com



Indikator daya



Indikator pengisian daya



Suhu penyimpanan



Kelembapan penyimpanan

9. Garansi produsen tiga tahun terbatas

Untuk Stasiun pengisian daya Model Braun Thermoscan® PRO 6000

Welch Allyn (perusahaan afiliasi Hill-Rom®) menjamin produk tersebut bebas dari cacat material dan pengerjaan, dan bekerja sesuai dengan spesifikasi produsen selama jangka waktu tiga tahun sejak tanggal pembelian dari Welch Allyn atau distributor atau agen resminya.

Tanggal pembelian adalah: 1) tanggal kirim yang tertera pada faktur jika perangkat dibeli secara langsung dari Welch Allyn, 2) tanggal yang ditentukan saat pendaftaran produk, atau 3) tanggal pembelian produk dari distributor resmi Welch Allyn sebagaimana terdokumentasi pada kuitansi distributor, dipilih tanggal yang lebih awal.

Garansi ini tidak mencakup kerusakan yang disebabkan oleh 1) penanganan selama pengiriman, 2) penggunaan atau pemeliharaan yang tidak sesuai dengan petunjuk dalam label, 3) perubahan atau perbaikan oleh orang selain yang ditunjuk oleh Welch Allyn, atau 4) kecelakaan. Garansi ini tidak mencakup baterai, kerusakan pada jendela probe, atau kerusakan pada instrumen yang disebabkan oleh penyalahgunaan, kelalaian, atau kecelakaan, dan hanya sebatas untuk pembeli pertama produk. Unit yang diganti berdasarkan garansi akan memiliki sisa masa garansi dari unit yang diganti. Selain itu, garansi ini menjadi tidak berlaku jika termometer dioperasikan dengan komponen apa pun selain penutup probe Hillrom™ asli.